


BionWell

**BIONWELL iCARE 4D
SL-A505
MASSZÁZSFOTEL**

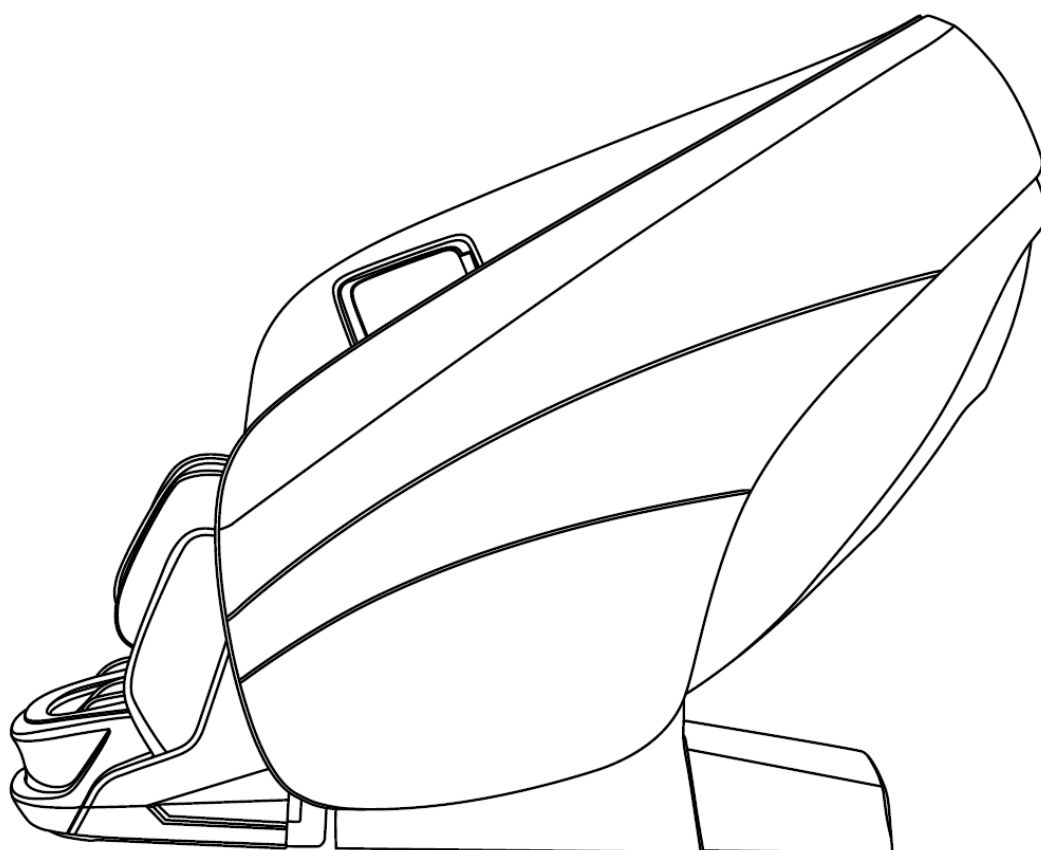

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Fokozott figyelemmel kövesse végig a biztonsági utasításokat, és kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbiekre is. Megjegyzés: cégünk fenntartja a jogot a fotel konstrukciójának és leírásának megváltoztatására minden további figyelmeztetés nélkül. Kérjük, hivatkozzon a fotel aktuális színére.

Tartalom

Biztonság és karbantartás

Biztonsági figyelmeztetés

Alkatrészek neve és funkciója

Funkciók

A készülék használata

Műszaki adatok

Biztonság és karbantartás

1. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



- Kérjük, az alábbiaknak leírtak szerint használja a fotelt.
- Minden, a leírtaktól eltérő használati mód tilos és veszélyes.
- Gyerekeknek tilos a mozgó alkatrészekhez nyúlni.
- Használat után és takarítás előtt is mindig húzza ki a konnektorból a fotel csatlakozóját, elkerülve a személyi sérüléseket, vagy a fotel sérülését.
- Kizárólag jól szigetelt, megfelelően földelt elektromos forráshoz csatlakoztassa.
- A fotelt azonnal kapcsolja ki, ha nem érzi jól magát.
- Ne viseljen ékszereket a masszázsfotel használata közben.
- Ha a fotel nem a megszokott módon működik, kapcsolja ki, és áramtalanítsa, majd keresse fel forgalmazóját. Szakember jelenléte nélkül a fotelt ne szerelje szét!
- Amennyiben haja, fejbőre bármilyen kezelés alatt áll, vagy mielőtt beülne a fotelbe, haja esetleg nedves, kérjük, tegyen törölközőt feje alá a felületek megóvásának érdekében.
- Zsebében ne tároljon törékeny, robbanékony, éghető anyagokat, tárgyakat a masszázsfotel használata közben. Ilyen lehet egy mobiltelefon is.
- 16 éven aluliaknak nem ajánlott használni a masszázsfotelt.
- 130 kg feletti felhasználók esetében a fotel meghibásodására nem tudunk garanciát vállalni.
- Ügyeljen arra, hogy a konnektor, amelyhez csatlakoztatja a készüléket, ne legyen meglazulva.
- Használat után, és tisztítás előtt mindenképpen áramtalanítsa a készüléket.
- A készüléket egyhuzamban használni 20 percig ajánlott.
- A készüléket a használati útmutatónak megfelelően működtesse.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a bőrfelület sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha más fedőréteg sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a hőszugárzó útja nem szabad.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt kültéren.
- Ne ejtsen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- Ne aludjon el a masszázsfotel használata közben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt ittas állapotban, vagy rossz közérzet esetén.
- Kérjük, evés után legalább 1 óra teljen el, mielőtt használja a masszázsfotelt.
- Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne állítsa tartósan túl erősre a masszázst.

2. Környezet

- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt magas hőmérsékletű, ill. nyirkos helyiségben, pl. fürdőszobában. Az optimális használati páratartalom: 20-80% .
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt olyan helyen, ahol hirtelen hőmérsékletingadozás lehetséges. Optimális hőmérséklet a masszázsfotelnek: 0-35 Celsius fok.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túlzottan poros környezetben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túl kicsi helyiségben, vagy olyan helyen, ahol nincs megfelelő szellőzés.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek a masszázsfotelt.
- Ne használja kültéren a masszázsfotelt.
- Ne használja a masszázsfotelt vihar, villámlás közepette.
- Ne használja a masszázsfotelt semmilyen fűtő- vagy hűtőegység közvetlen közelében, vagy olyan közelségben, ami kárt tehet a fotelben.

Biztonság és karbantartás

3. Akik nem használhatják a masszázsfotelt

- Csontritkulásban szenvedők
- Szívbetegségben szenvedők, vagy olyanok, akik elektronikus egészségügyi eszköz (pl. pacemaker) használatára szorulnak
- Lázas betegek
- Terhes, vagy menzesz periódusban lévő nők
- Balesetet szenvedett, vagy bőrbetegségben szenvedő személyek
- 14 év alatti gyerekek, ill. szellemileg labilis állapotban lévő személyek
- Orvosuk által pihenésre intett, vagy magukat rosszul érző személyek
- Nedves testű személyek
- Hőérzékeny személyek óvatosan, orvos beleegyezésére használhatják csak a fotelt, ügyelve, hogy a fotel hátfűtési funkciója ne okozzon nekik gondot.
- Akiknek rosszindulatú daganata van
- A készüléknek fűtött felülete van, így aki a hőre érzéketlen, fokozott óvatossággal használja a masszázsfotelt.
- Súlyos gerincbetegségben szenvedők kérjék ki kezelőorvosuk véleményét.

4. Biztonság

- Ellenőrizze a feszültséget, hogy megfelel-e a készülék előírásainak.
- Nedves kézzel ne húzza ki a tápvezetékét.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, az áramütést, ill. a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.
- Ne sértse fel a vezetékeket, és ne változtasson az áramkörön.
- Ne használjon nedves törölkendőt az elektromos részek, pl. főkapcsoló, vagy tápvezeték megtisztítására.
- Esetleges áramszünet ideje alatt maradjon távol a készüléktől a baleset elkerülése érdekében, ha az áram hirtelen visszajönne.
- Rendellenes működés esetén azonnal állítsa le a készüléket, és konzultáljon a kereskedővel/közvetítővel.
- Rosszullét esetén állítsa le a készüléket, és keresse fel orvosát.
- Nem ajánlott a készülék használata olyan személyeknek (beleértve a gyerekeket), akik fizikailag, szellemileg, vagy érzékelés szempontjából korlátozottak, kivéve, ha az ő egészségükért felelős személy jóváhagyta nekik a fotel használatát.
- Ha a tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.

5. Karbantartás

- A készüléken csak szakember végezhet karbantartást, a felhasználónak tilos a fotel szétszerelése és önálló karbantartása.
- Kérjük, mindig áramtalanítsa a fotelt használat után.
- Ne használja a készüléket, ha meglazult a konnektor.
- Ha a készülék hosszú ideig használaton kívül van, tekerje fel a vezetékét, a fotelt pedig száraz és pormentes helyiségben tárolja, -5 – 35 Celsius fok között, maró gázoktól mentes övezetben, jól szellőző helyiségben.
- Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig magas hőmérsékletű helyiségben, tűz mellett, és ne tegye ki tartósan közvetlen napsugárzásnak.
- Ha a lecsavarható vezeték / tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.

Biztonság és karbantartás


- A készüléket mindig száraz ruhával tisztítsa meg. Ne használjon higítót, benzint, vagy alkoholt.
- A készülék mechanikus alkatrészei speciálisan lettek megtervezve és legyártva, nem igényel különleges karbantartást.
- Ne használjon éles tárgyat a fotel mozgására.
- Ne húzza, vagy gurítsa a fotelt egyenetlen talajon. Ilyenkor mindenképpen emeléssel mozgassa.
- Szakaszosan használja a készüléket; túl sokat egy huzamban ne működtesse.

6. Általános üzemzavarok orvoslása

- Használat közben a motor hangja teljesen természetes.
- Ha az irányító nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a tápvezeték megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz, valamint győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- Ha egy masszázsprogram beállított működési ideje lejár, a készülék automatikusan megáll. Ha a fotel túl sokáig van egyhuzamban működésben, a hőmérséklet-érzékelő berendezés automatikusan leállítja azt. Ilyenkor kérjük, várjon fél órát, és csak utána használja újra a készüléket.

Biztonsági figyelmeztetés

Amikor a lábtartó emelkedik, vagy felemelt állapotban van, nem szabad ránehezedni, hogy elkerüljük annak sérülését, vagy a személyi sérülést!

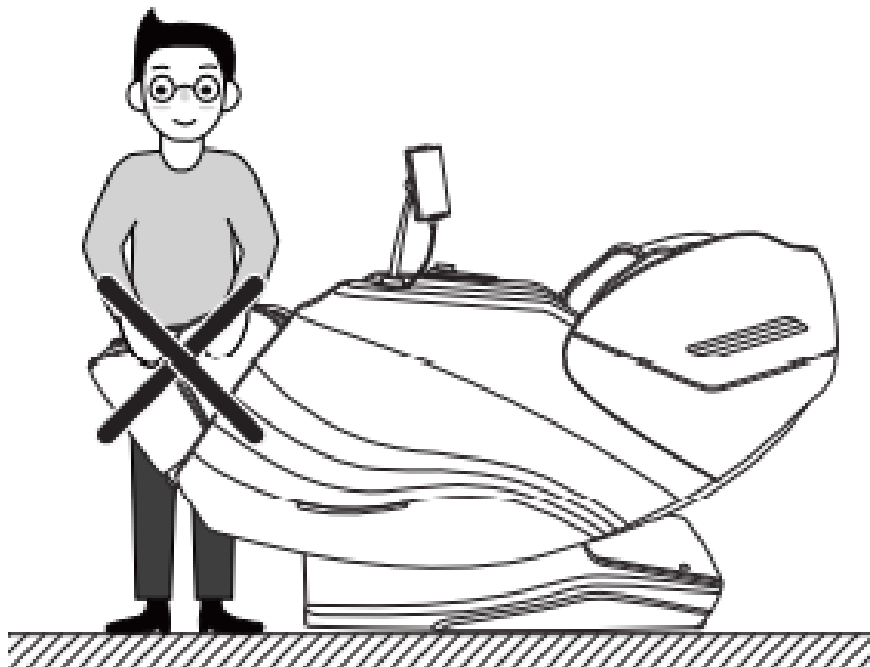


Biztonsági figyelmeztetés

Mielőtt beleülne a masszázsfotelbe, győződjön meg róla, hogy a masszázskézek a háttámla párnái mögött helyezkednek el, hogy elkerülje a diszkomfortérzetet és a masszázskézek sérülését.




Működés közben ne húzza ki (és ügyeljen rá, hogy gyermekei vagy unokái se tegyék) a masszázsfotelből a csatlakozót, és a hosszabbítót se nyomja le, hogy megelőzze az elektromos áramütést vagy a masszázsfotel meghibásodását. Használat után húzza ki a vezérlő csatlakozóját és a tápkábelt, rakja is el őket, ez a legbiztonságosabb megoldás.

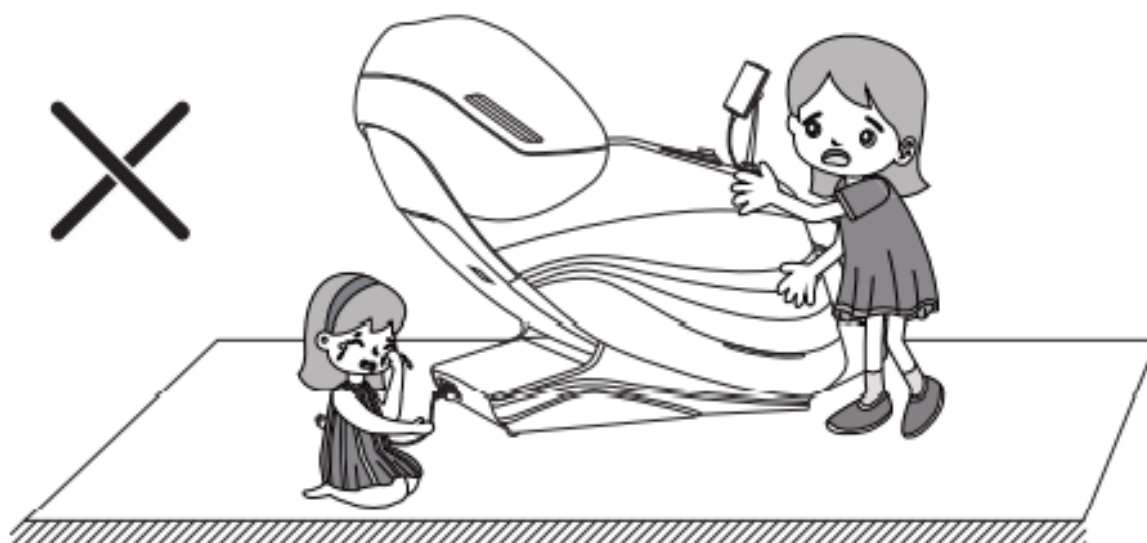


Biztonsági figyelmeztetés

Mielőtt elindítaná, működésbe hozná a fotelt, győződjön meg róla, hogy a lábtartó alatt, illetve a háttámla alatt és mögött nem tartózkodik senki és semmi. A zero gravity pozícióban ugyanis a fotel hátra dől, lejjebb ereszkedik, ami személyi sérülést okozhat annak, aki az előbb említett helyeken tartózkodik, ha tárgyról van szó, megsérülheti azt, valamint a masszázsfotelt is.

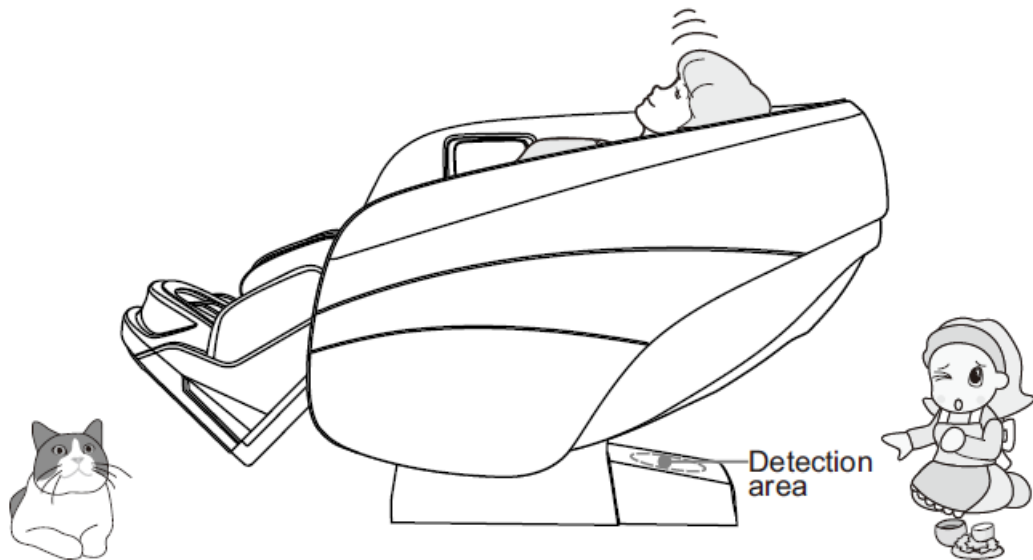


Minden használat előtt ürítse ki a zsebeit, és vegye le az ékszereit, óráját. hogy elkerülje a személyi sérülést, vagy a fotel sérülését.

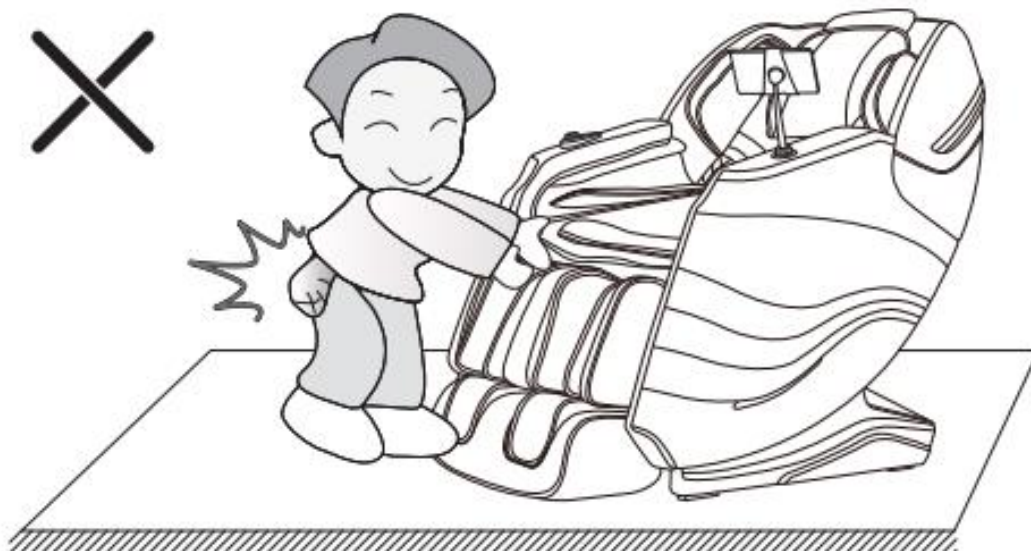


Biztonsági figyelmeztetés

Ne aludjon el a masszázsfotelben, amíg az masszíroz, hogy elkerülje a személyi sérülést.

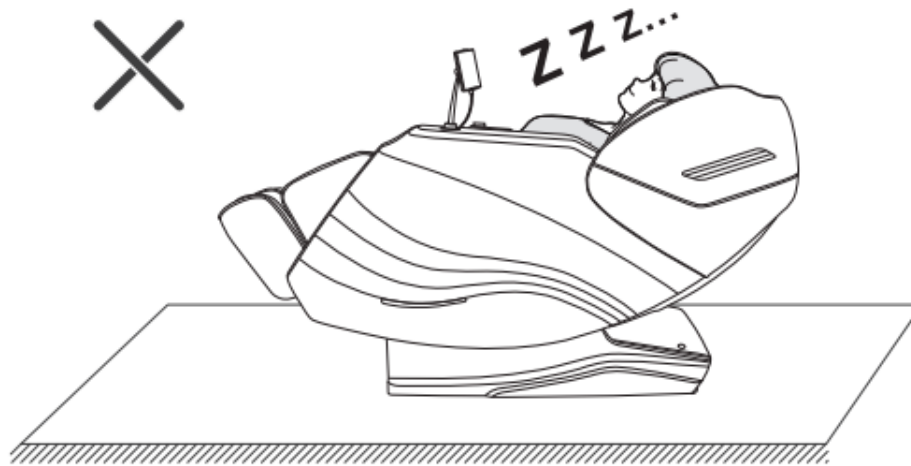


Egyszerre csak egy személy használhatja a fotelt. Gyerekek ne játszanak rajta, ne ugráljanak rajta, ne másszanak fel rá. Így elkerülhetjük a személyi sérülést és a fotel sérülését.

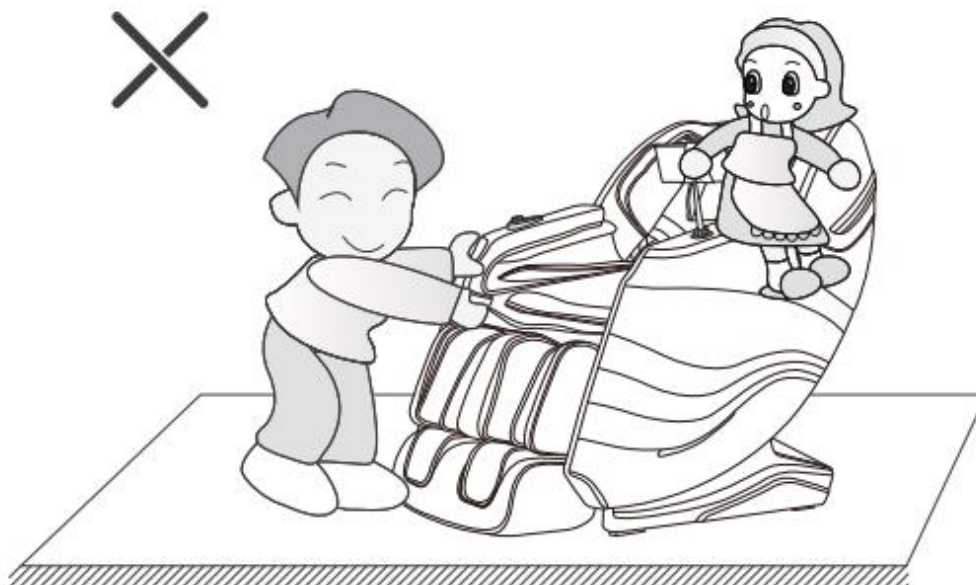


Biztonsági figyelmeztetés

Amikor a fotel lábtartója mozgásban van, mozog, ügyeljen rá, hogy nehegy becsípje a kezét, ne tegye a lábtartó és a háttámla közötti részbe a kezét, se más keményebb tárgyat (pl. mobiltelefon, kulcs, stb.). Így elkerülheti a személyi sérülést és a fotel sérülését.

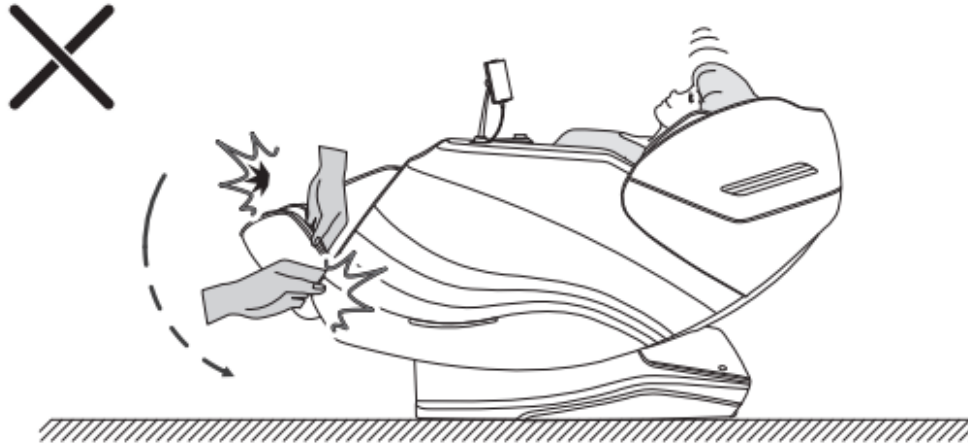


Használat előtt győződjön meg róla, hogy nincs a fotel útjában (hátról alatta, vagy elől a lábtartó alatt) semmilyen kemény tárgy, állat, vagy személy, legyen az gyermek, vagy felnőtt. Így elkerülheti a személyi és a tárgyi sérüléseket, illetve a fotel sérülését.

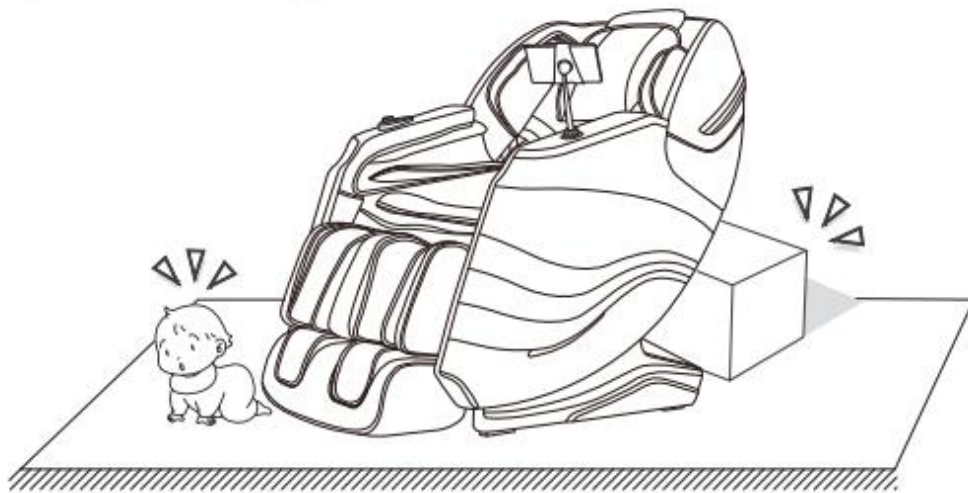

Biztonsági figyelmeztetés




Masszázs előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek idegen tárgyak a masszázsfotel különböző ábrán látható részeiben – és ezekre a helyekre még véletlenül se helyezze egyik testrészét sem!

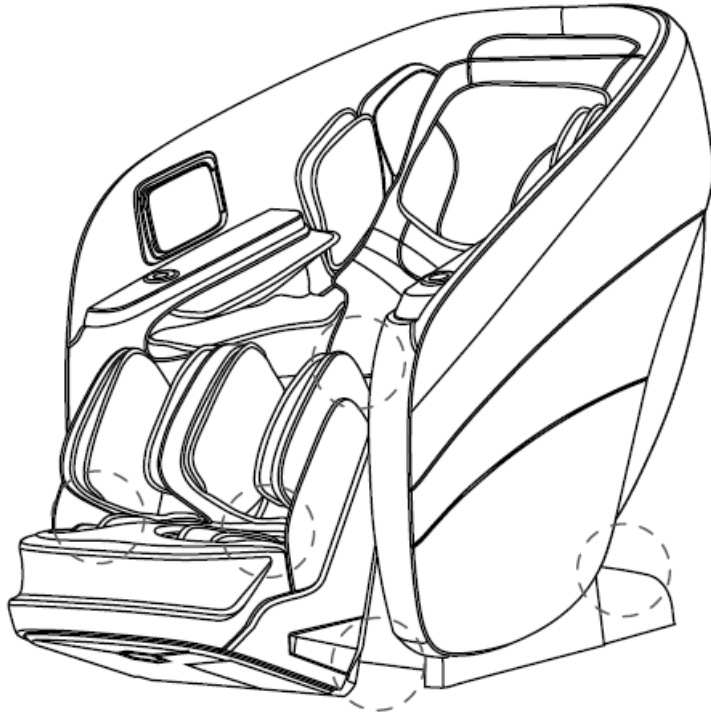

A készülék használata


Az aromapatron cseréje

1. Forgassa el az illatosító fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg le nem válik a mágneses rögzítő mechanizmusról (1. ábra).
2. Távolítsa el a fedelet, hogy hozzáférjen és kicserélje az illatosító tárcsát (2. ábra).
3. A visszahelyezéshez illessze be a fedelet, nyomja le, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg biztonságosan nem rögzül szilárdan a helyére, billegés nélkül (3. ábra).

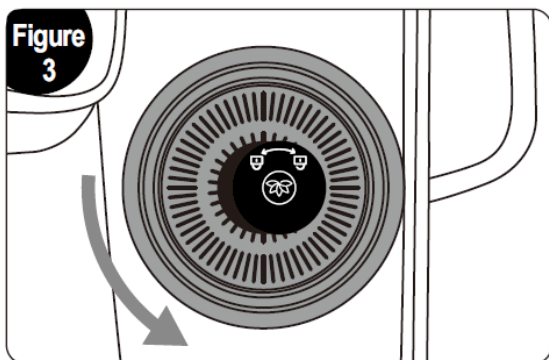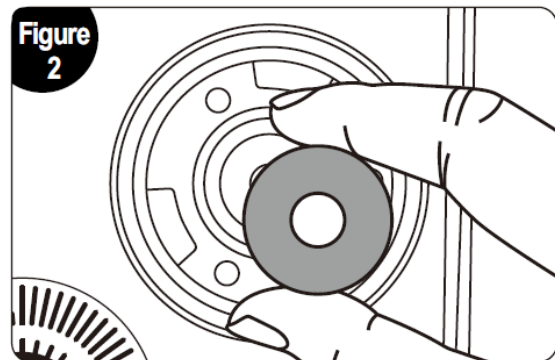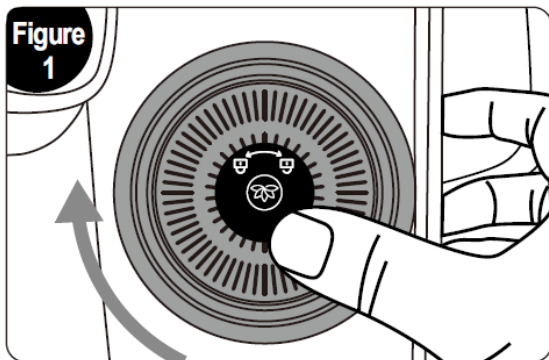


Alkatrészek neve és funkciója

01 – Fejpárna	06 – USB A+C töltőport
02 – Érintőképernyős vezérlő	07 – Erősségállító tekerőgomb 4D
03 – Aromaterápiás patron	08 – Hátpárna
04 – Légpárnás karmasszázs	09 – Karfa LED díszvilágítás
05 – Lábmasszírozó mechanizmus	

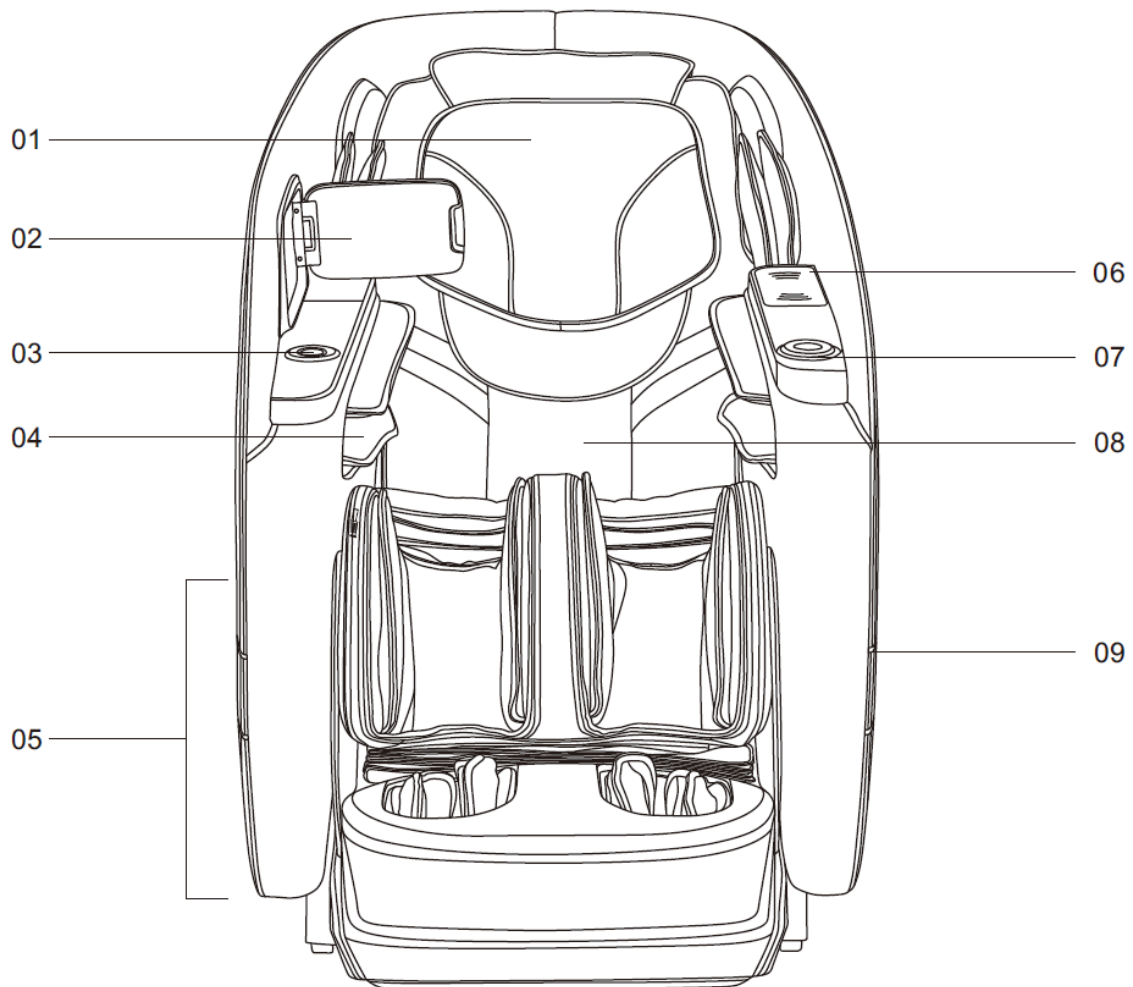

Alkatrészek neve és funkciója

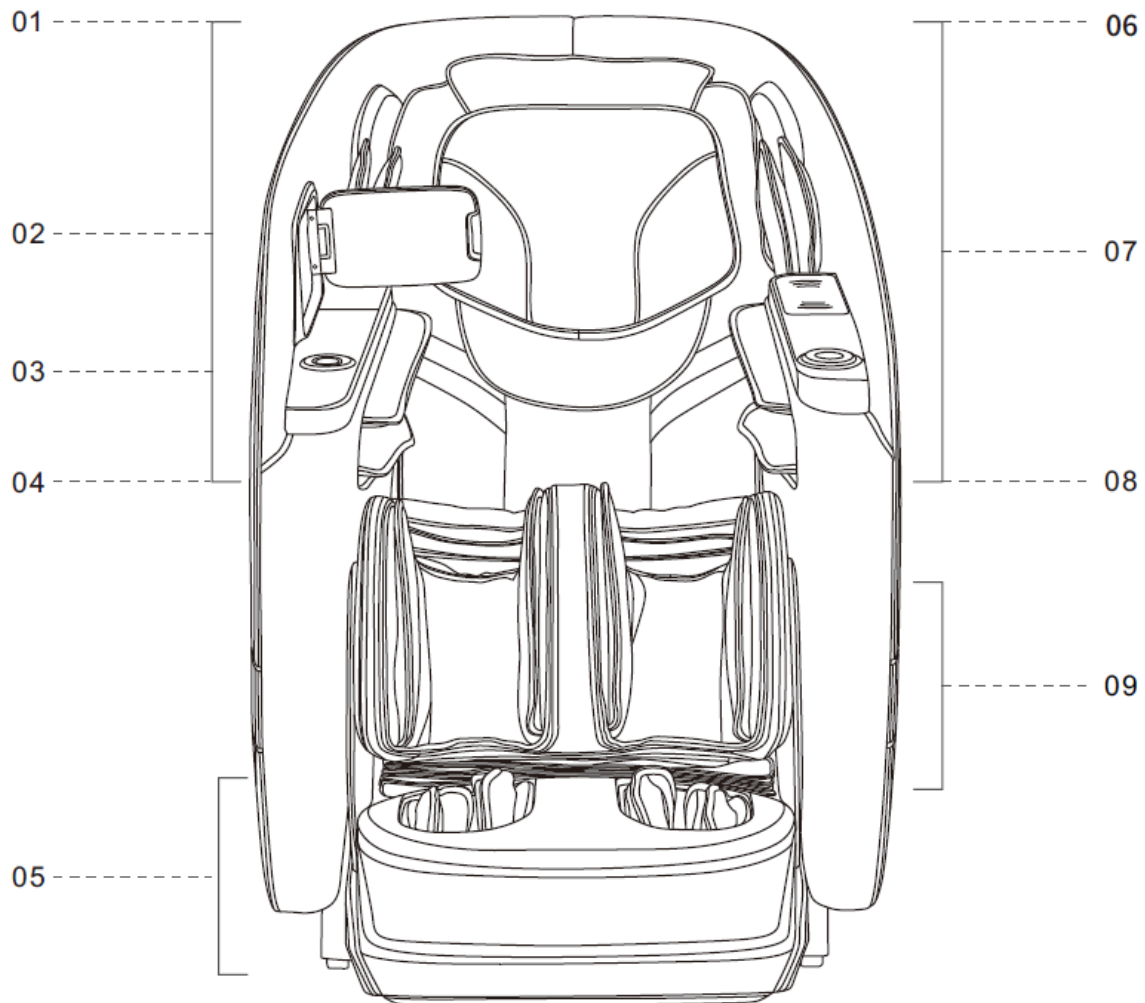


- 01 – Fejtámla –
- Hangvezérlés angol nyelven
 - Beépített mikrofon
 - Narráció
- 02 – Vállrész
- Légpárnás szorítómasszázs
- 03 – Fejtől az ülőfelületig
Görgős masszáz
- 04 – Jobb kar rész
- Légpárnás masszáz
- 05 – Lábrész
- Légpárnás masszáz
 - Talpmasszázs
 - Becsípődésgátló érzékelő
 - Boka masszáz
 - Motorikusan működő lábrész
 - Automata láb hosszfelismerő

- 06 – Vállrész
- 3D digital audio hangszórók
 - Bluetooth
- 07 – Hátrész
- Fűtőegység
- 08 – Bal kar
- Légpárnás masszáz
- 09 – Lábrész
- Légpárnás masszáz

A készülék használata

A fotel bekapcsolása

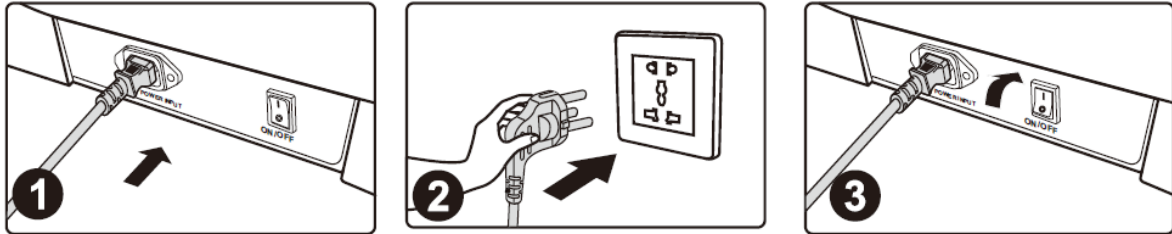

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a masszázsfotelhez.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorhoz.
3. Kapcsolja be a főkapcsolót ("I" állás).

Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a csatlakozódugót sérülések szempontjából.





■Kérjük, a termék kalibrálásának megfelelő tápellátást biztosítson. Szigorúan tilos a termék névleges tápellátásától eltérő tápegységet használni.


■Szigorúan tilos különféle áramátalakító eszközöket csatlakoztatni a termék áramellátására vonatkozó engedély nélkül.

A készülék használata

A masszázs indítása

- Nyomja meg a be/kikapcsolás gombot az érintőképernyős tabletvezérlőn / a karfán (tartsa nyomva legalább 3 mp-ig) a masszázs indításához.
- A készülék először felméri a benne ülő személy testét, megkeresi és megtalálja a vállpozíciót, ezek alapján beállítja a masszázspontokat. Várjon ülve, mozdulatlanul, a fotelbe simulva, ezen művelet befejeztéig.
- A felmérés befejeztével a vezérlő kijelzőjén megjelenik a vállpozíció beállítása ikon, illetve csipogó hangot fogunk hallani. Ezután, ha nem érezzük megfelelőnek a görgők állását a vállunknál, manuálisan állíthatunk rajtuk, 10 különböző magasságban. (Ha 10 másodpercen keresztül nem állítunk a vállpozíción, a masszázs automatikusan elindul. Ha pedig kiválasztunk egy automata masszázsmódot, akkor a masszázs szintén elindul a felmért vállpozíció módosítása nélkül.)


Gomb	Leírás	Kijelző
	Görgők felfelé mozgatása	
	Görgők lefelé mozgatása	

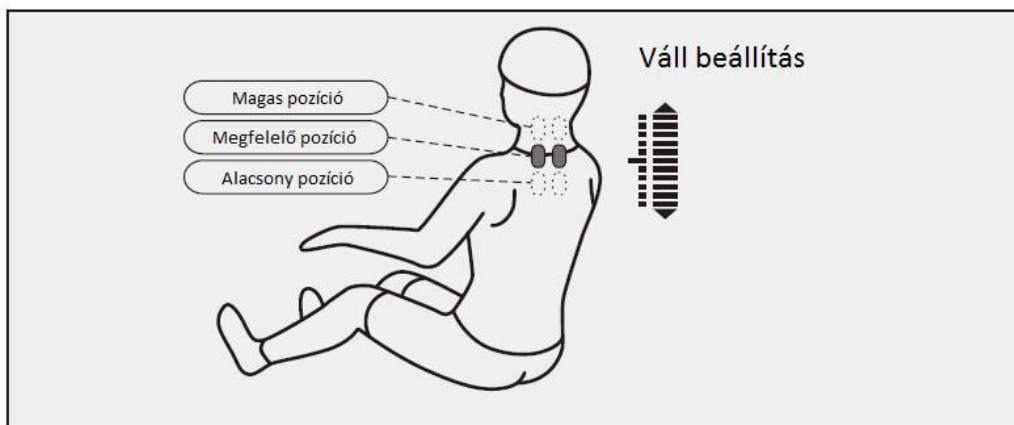

A készülék használata

Érintőképernyős vezérlő – gombok és kijelző

07. Digitális kijelző – A masszázsidőt és a gyári masszázsprogram számát mutatja.
08. Hőterápia – Be/kikapcsolás.
09. Légpárnás masszázs erőssége / Bluetooth gomb – Röviden megnyomva a gombot (többször), választhatunk erősséget a légpárnás szorítómasszázsnek 1-5 erősségi szinten. Hosszabban megnyomva be/ki kapcsolhatjuk a Bluetooth egységet.
10. Hangvezérlés gomb – Röviden megnyomva „felébreszti” a funkciót. Hosszabban nyomva ki/be kapcsolhatja a funkciót.
11. Bluetooth kijelző 12. Hangvezérlés kijelző 13. ECO mód státusz jelző

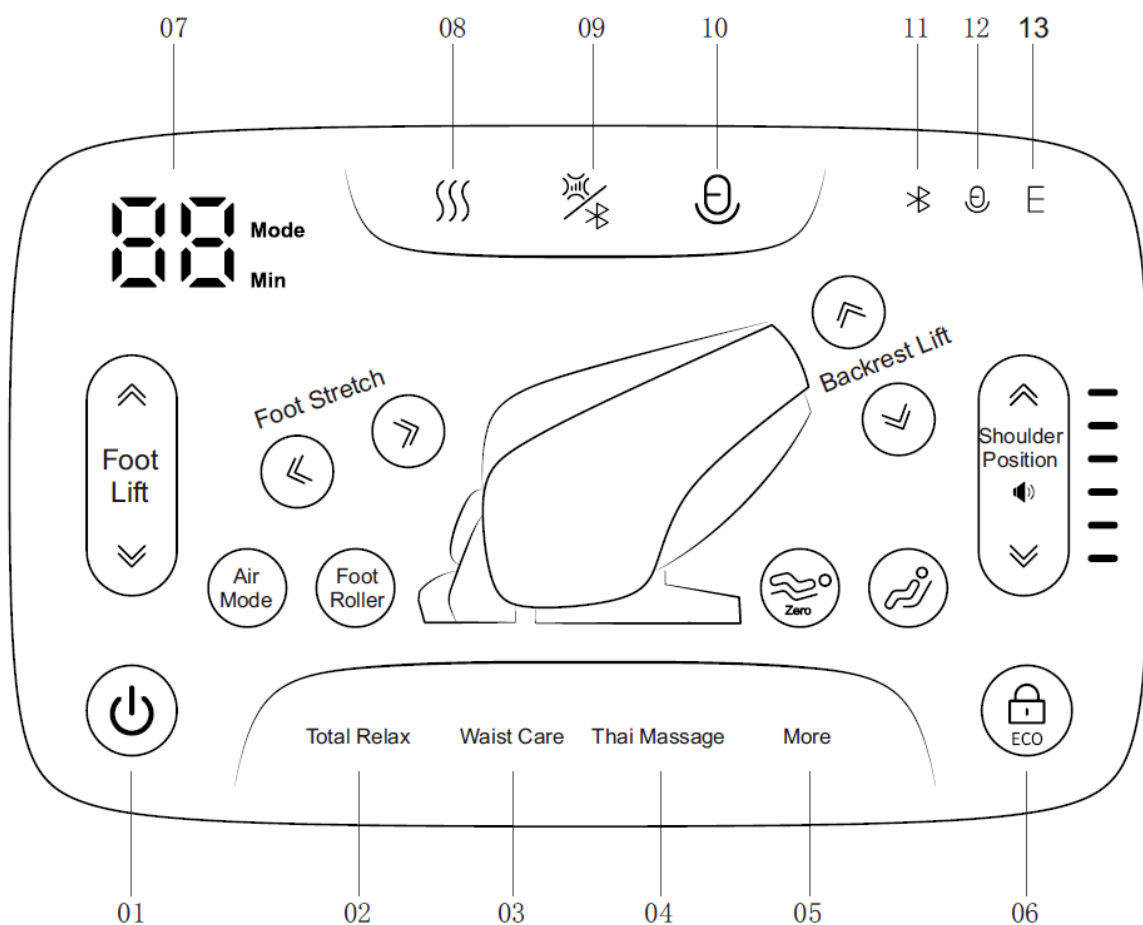


01. BE/KI kapcsoló gomb – Nyomja meg a bekapcsoláshoz. Működés közben nyomja meg a masszázs szüneteltetéséhez és ismét az újraindításához. Masszázs közben nyomja le legalább 3 mp-ig a kikapcsoláshoz.
02. Total Relax – Teljes ellazulás masszázsprogram
03. Waist Care – Derék-ápoló masszázsprogram
04. Thai massage – Thai masszázsprogram
05. More – További automata gyári masszázsprogramok – erről bővebben később olvashat.
06. ECO - Gyerekzár és ECO mód – Nyomja meg röviden a gyerekzár be/kikapcsoláshoz. Nyomja meg hosszabban az ECO mód ki/bekapcsolásához.

A készülék használata

Érintőképernyős vezérlő – gombok és kijelző

18. Foot Lift gombok - Lábrész emelése / süllyesztése
19. Foot Stretch gombok – A lábrész kiterjesztése – visszahúzása
20. Backrest Lift gombok – A háttámla előre/hátra döntése
21. Shoulder position / Volume fel-le gombok – Röviden nyomkodva a gombokat, a vállpozíciót állíthatjuk fel-le irányban. Hosszabban nyomva tartva a gombokat, a hangerőt állíthatjuk hangosabbra/halkabbra.

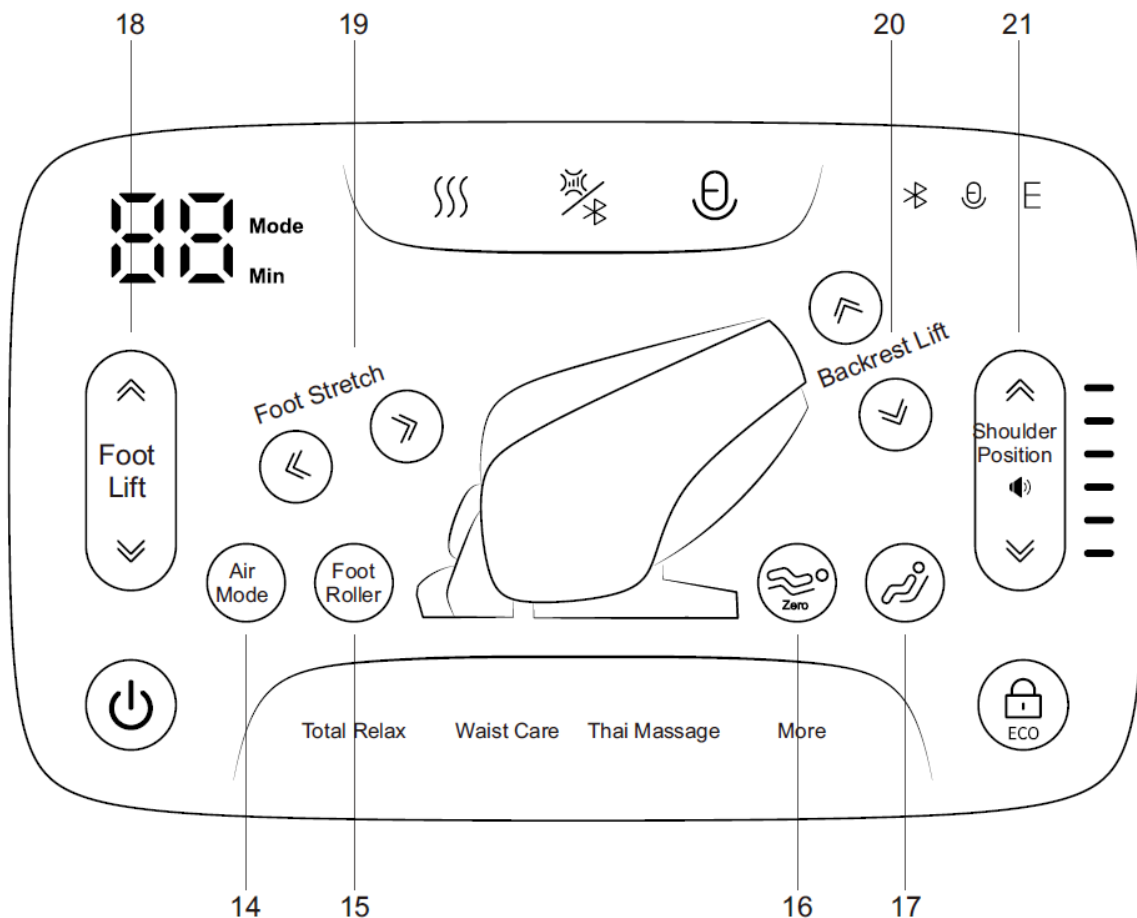


14. Air Mode gomb - Légnymósos masszázsmód: nyomkodva választhatjuk ki, hol masszírozzon: felső részen, alsó részen, teljes testen, vagy kikapcsolás.
15. Foot Roller gomb - Talpmasszázs: 3 szinten állítható, vagy ki is kapcsolható.
16. Zero gomb – Zero Gravitáció – fekvő módok – 3 különféle fekvő mód elérhető – illetve a mód kikapcsolása.
17. Felülés gomb – ha be van kapcsolva, akkor a masszázsidő lejártá után a fotel visszaáll eredeti pozíciójába.

A készülék használata

Erősségállító tekerőgomb és ki/bekapcsolás/szüneteltetés gomb

01 -

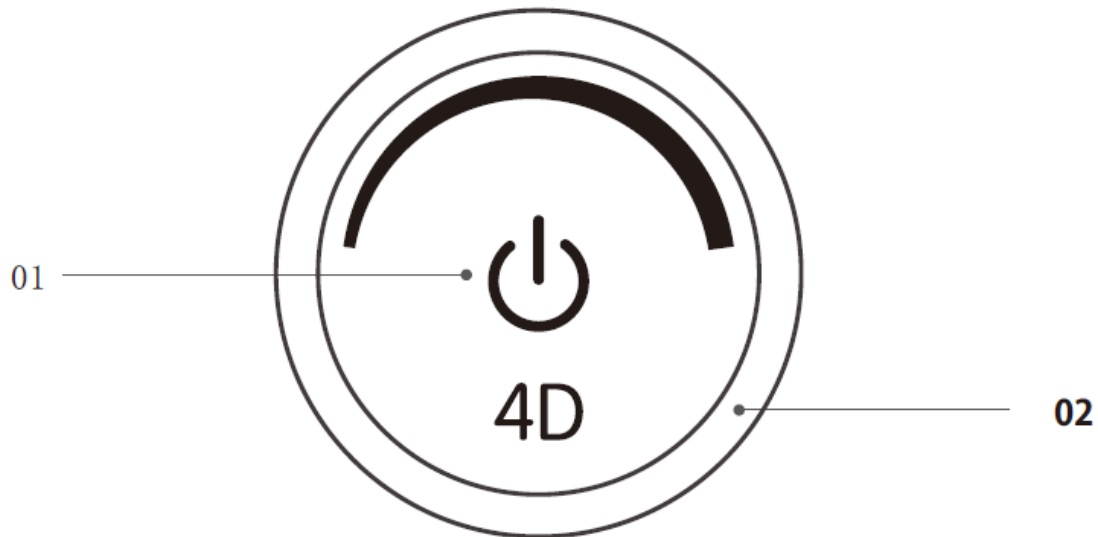

01-Nyomja meg hosszabban a ki/bekapcsolásért. Nyomja meg masszázsközben röviden a szüneteltetés/újraindításhoz.

02- tekerőgomb – a 4D masszázs erősségét állíthatjuk 5 szinten.

Automata masszázsk - 20 db különböző automata gyári 20 perces masszázskprogram - csak 1 gombnyomás, és indulnak a programok.

Professzionális orvosi stáb, vezető Kutató-Fejlesztői gárda által végzett kutatások, valamint több mint 20 év vásárlói- és ügyfél-visszajelzések alapján tudományosan összeállított masszázskprogramok. Válasszon egy előre beállított masszázskt, tapasztalja ki, mely masszázsk azok, melyeket igazán szeret, és jól esnek. A masszázsk különféle masszázskmódokat, különböző mozgásokat kínálnak.

1."Teljes ellazulás" masszázsk - Fekvő módban történő nyújtásával és masszázskmódszereivel hatékonyan enyhíti az derék környéki izomfájdalmat és megszünteti a fáradtságérzete - tehermentesíti a testet és az elmét. **TOTAL RELAX 01**

2. "Derék-ápoló" masszázsk - Masszírozza a derekat gyúrással, ütögetéssel és főként gyögmasszázzsal, így enyhítve a derék környéki izmok fájdalmát; a derék körüli hőterápia segíti a masszázsk pozitív hatásait és kellemes érzést biztosít masszázsk közben; a gyengéd és mérsékelt masszázskintenzitással és kényelmes hőmérséklettel kellemes masszázskélményt nyújt. **WAIST CARE 02**

3. Thai masszázsk - A lábszárakat, a kezeket és a vállakat leszorítja a fotel, a görgők előre nyomják a hátat és a lábkat, így érik el a nyújtó hatást. Javasolt lehet erős stressznek kitett emberek számára, illetve a rossz testtartással, gerincferdüléssel élőknek. **THAI MASSAGE 03**

A készülék használata

Automata masszázsek

4. Vállmasszázs - A nyak és a váll speciális masszázstechnikái a nyakcsigolyák- és a lapockák környékét célozzák meg a nyak- és vállfájdalom enyhítése és a fáradtság csökkentése céljából. **SHOULDER MASSAGE 04**

5. Hátmasszázs - Fókuszban: a hát; hogy csökkenjenek a hátfájdalmak. **BACK MASSAGE 05**

6. Derékmasszázs - Fókuszban: a derék; hogy csökkenjenek a derékfájdalmak. **WAIST MASSAGE 06**

7. Csípőmasszázs - Főként gyúró és kínai masszázstechnikákat alkalmaz a csípő masszírozására. Ezután ütögető és gyúró technikákkal masszíroz a csípőizmok ellazítására és az "emelő" hatás elérésére. Kiváló választás hölgyeknek, de jótékony hatással van a férfi prosztatára is. **HIPS MASSAGE 07**

8. Nyak-váll fókusz - Megmasszírozza a nyakat és a vállakat, nyújtó technikákat is alkalmaz, valamint a hát felső szakaszát is átmasszírozza, melyek hatékony izomlazító hatással bírnak. A Jianjing akupunktúrás pontok megnyomásával enyhítho a nyaki spondylosis (meszesedés) tüneteit és lazítja a nyak és a vállak izmait. Különösen ajánlott lehet ülőmunkát végző felhasználók számára ez a program. **NECK & SHOULDER CARE 08**

9. Kínai masszáz - A hagyományos kínai orvosláson alapuló masszázsek elsősorban a háton és a derékon alkalmaz mélymasszázs, hogy csökkentse a hát és a derék fájdalmát, elősegítse ezen testrészek vérkeringését. Különösen ajánlott lehet hát- és derékfájdalmakkal küzdőknek. **CHINESE MASSAGE 09**

10. Derék - és farizom masszáz - Masszírozza a farizmokat gyúrással és gyógymasszázzsal, majd ütögetéssel és gyúrással. Átmasszírozza a gátizmokat és környéküket, valamint a csípőizmok területét is - lazítja a csípőt és megemeli. Kiváló választás hölgyeknek, de jótékony hatással van a férfi prosztatára is. **WAIST & BUTTOCK SHAPE 10**

11. Nyak-derék-láb fókuszú masszáz - Masszírozza a vállakat és a derekat elsősorban gyúrással és ütögetéssel. A nyomómasszázsához levegős masszázst alkalmaz a lábakon és a lábfejekon, ami nyugtatóbb láb- és talpmasszázszt biztosít. Alkalmos ülőmunkát végző emberek számára, akik kevésbé terhelik a lábakat és a lábfejeket. A masszázsek nemcsak enyhíti az ülőmunkát végző emberek nyak- és derék-környéki fájdalmát, hanem nyugtatja a lábakat és a lábfejeket is. **LEG & FOOT RELIEVE 11**

12. "Nagy fokú élvezet" program - Légpárnás kompressziós masszázst az egész testen a lábhengerrel és a vádli gyúró masszázssal. A vádlinyújtás funkció ki van kapcsolva, alkalmas idős emberek számára és hátfájással küzdőknek is. **SUPERIOR ENJOYABLE 12**

A készülék használata

Automata masszázsek

13. "Nem csak felsővezetőknek" program - Átgúrja és megütögeti a vállat, a nyakat, a hátat és a derekat, csökkenti az izmok fáradtságérzetét, serkenti a vérkeringést, és csökkenti a stresszt a fotel mélymasszázsja által. **PRESIDENT COSY 13**

14. Maradjon fit - program - Masszírozza a vállakat, a nyakat, a derekat és a csípőt gyúró és ujjnyomós technikákkal, így ellazítva a testet és az elmét. Élvezze a királyi/királynői szintű kezelést. **KEEP FIT 14**

15. „Ülőmunka” program - Átgúrja és megütögeti a vállat, a nyakat és a derékrészt, mely enyhítheti a váll (csuklyásizom) és a nyak fájdalmait, csökkentheti a derék környéki izomfájdalmat. Ez a masszázsprogram különösen alkalmas lehet irodai dolgozóknak és mozgásszegény életmódot folytatóknak. **OFFICE REGIMEN 15**

16. Vitalizáló program - Meggyúrja és megütögeti a derekat, a csuklyásizmot (váll) és a nyakat, energizálva a testet. Erős masszázsek, mely alkalmas lehet a stressz kezelésében is, illetve sportolóknak is a kemény, kötött izmok kilazítására is. **ENERGY BOOST 16**

17. Ebédszünet masszázsek – Derék és hátmasszázs gyúró és ütögető technikákkal, oldva a kötött izmokat, serkentve a vérkeringést. A Shenyu akupontot is érintve segít az ebédszünet minőségének javításában, így a délután energikusabban telhet a munkában. **LUNCH BREAK 17**

18. Fájdalomcsökkentő masszázsek – A masszázsek elsősorban gyúró, ütögető és shiatsu technikákat alkalmaz a nyak, a vállak, a hát és az alsó hát megcélzására. Emellett légnyomós masszázst is végez a vádliknál, amely enyhülést nyújt a térdízületeknek. A mély masszázsek segít enyhíteni a fájdalmat és a kellemetlen érzéseket, így ideális hát- és derékfájdalommal küzdők számára. **ACHE RELIEVE 18**

19. Édes álm program - Meggyúrja a vállakat, a nyakat, a hátat és a derekat, megnyomkodja a Fengchi és Shenyu akupontokat az alvás minőségének javítása érdekében. Különösen ajánlott lehet rossz alvóknak **SWEET DREAM 19**

20. Ellazító program - A masszázsek elsősorban gyúró és nyújtási technikákat alkalmaz a nyak és a vállak területén, a felső háti szakaszon pedig *tuinával kombinálva. A Jianjing akupunktúrás pontokra gyakorolt nyomással enyhíti a nyaki gerincferdülésből adódó kellemetlenségeket, és ellazítja a nyak- és vállizmokat. Ajánlott irodai dolgozók és nyakfájdalmakkal küzdők számára. **RELAX MASSAGE 20**

A készülék használata

Bluetooth zenelejátszó rendszer

1. Nyomja meg hosszanezt a gombot




2. Lépjen be a telefonján főmenübe, nyissa meg a „Settings” (Beállítások) menüpontot – Válassza ki a „Bluetooth” opciót – „Bluetooth” megnyitása.
3. Az okostelefonjával vagy más okoseszközzel keresse meg a masszázsfotelt a Bluetooth keresőjében, majd csatlakozzon rá. (IMCM-XXXX)
4. Nyissa meg okostelefonja vagy más okoseszköze zenelejátszóját, és válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

A készülék használata

Hangvezérlés

Angol nyelven

Kapcsolja be ezzel a gombbal. → 

1. Mondja, „Hi, Alice”
2. Ha sikeres volt a művelet, a masszázsfotel válaszol: „I am here.” A következő 6 mp-ben utasítást kell neki adni, különben a funkció kikapcsol. Csak angolul beszéljen, miközben a funkció be van kapcsolva, különben a fotel esetleg olyan funkciókat indít el, amelyeket Ön nem szeretne (a magyar nyelvből angol szavakra következtetve)

Utasítások




A masszázsfotel válasza

Voice Control Entry		
Entry: “Hi Alice” or “Hey Alice”. Answer: I am here.		
No.	Voice control entry	Answer entry
01	Massage on	Answer: Ok,Massage on
02	Massage close	Answer: Ok,Massage close
03	Total Relax	Answer: Ok,Total Relax
04	Waist Care	Answer: Ok,Waist Care
05	Neck & shoulder Care	Answer: Ok,Neck & shoulder Care
06	Energy Boost	Answer: Ok,Energy Boost
07	Lunch Break	Answer: Ok,Lunch Break
08	Thai Massage	Answer: Ok,Thai Massage
09	Sweet Dream	Answer: Ok,Sweet Dream
10	Relax massage	Answer: Ok,Relax massage
11	Open the air pressure	Answer: Ok,Open the air pressure
12	Close the air pressure	Answer: Ok,Close the air pressure
13	Up the seat position	Answer: Ok,Up the seat position
14	Down the seat position	Answer: Ok,Down the seat position

A készülék használata

A masszázs leállítása, kikapcsolás


- Ha a masszázs a beállított időtartam elteltével fejeződik be
 - *ha a „felülés” gomb ki van kapcsolva:* a fotel marad aktuális pozíciójában, de a masszázsképezek visszaállnak alappozícióba. Itt még ha szeretnénk, pihenhetünk a sok esetben fekvő pozícióban. Megnyomva a be/kikapcsolás gombot, a fotel visszaáll az alappozícióba.
 - *ha a felülés gomb be van kapcsolva:* a fotel visszaáll eredeti pozíciójába.
- Masszázs közben a be/kikapcsoló gomb megnyomásával bármikor leállíthatjuk masszázst. a fotel visszaáll eredeti pozíciójába..
- A főkapcsoló segítségével áramtalanítsuk a fotelt, majd húzzuk ki a dugót a konnektorból.

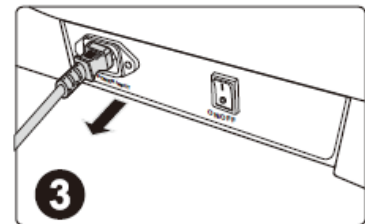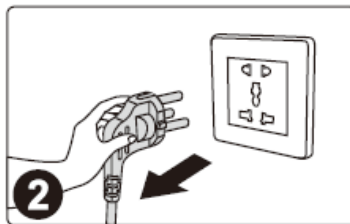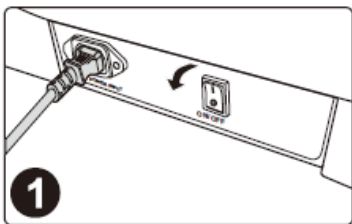

A készülék használata

A fejpárnák és a háttámla párnájának leszerelése és használata

- A háttámlán lévő párnák igénynek megfelelően lágyabbá teszik a görgők általi masszázst.
 - A háttámla párnarésze a háttámla tetején elhelyezett cipzárral kapcsolódik a fotelhez, a fejpárna pedig szintén cipzárral kapcsolódik a háttámla párnájához.
 - Ha erősebb masszázst szeretne, egyszerűen hajtsa fel, vagy cipzározza le a párnákat.

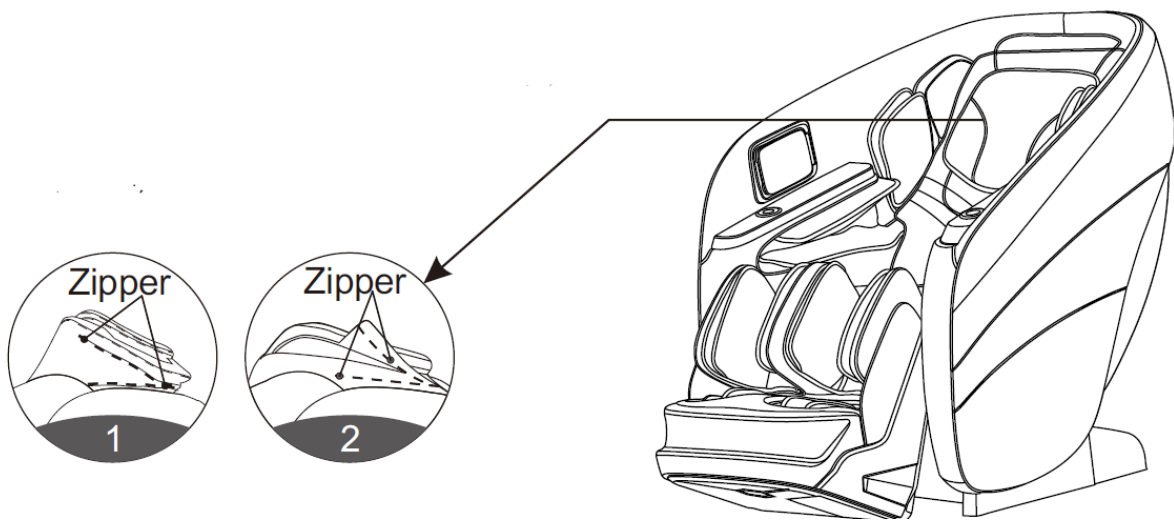

A készülék használata


Padlóvédelem

- Ha a fotelt fapadlón, vagy kényes padlófelületen helyezük el, idővel károsíthatja azt. Javasolt szőnyeg használata.



A fotel mozgatása - Gurítás kerekeken - A masszázsfotel gurításához használja a hátsó görgőket. Döntse hátra a széket körülbelül 45°-ban, ahogy az az ábrán látható. MEGJEGYZÉS: A túlzott erő kifejtése a szék teljes felborulását okozhatja, és a termék károsodását.


1. Mozgatás előtt győződjön meg arról, hogy a masszázsfotel megfelelően ki van kapcsolva, a háttámla és a vádlirész is teljesen vissza van állítva, és a tápellátás le van választva. 2. A széknek mozgás közben üresnek kell lennie; semmilyen személy, háziállat vagy tárgy nem tartózkodhat rajta. 3. Ne mozgassa a széket 2 mm-nél magasabb akadályokon vagy 5 mm-nél szélesebb réseken át. 4. A szék görgőkkel történő mozgatásakor kerülje a folyamatos mozgást 50 méternél nagyobb távolságokon. Ha szükséges, lassan és egyenletes tempóban mozgassa a széket.

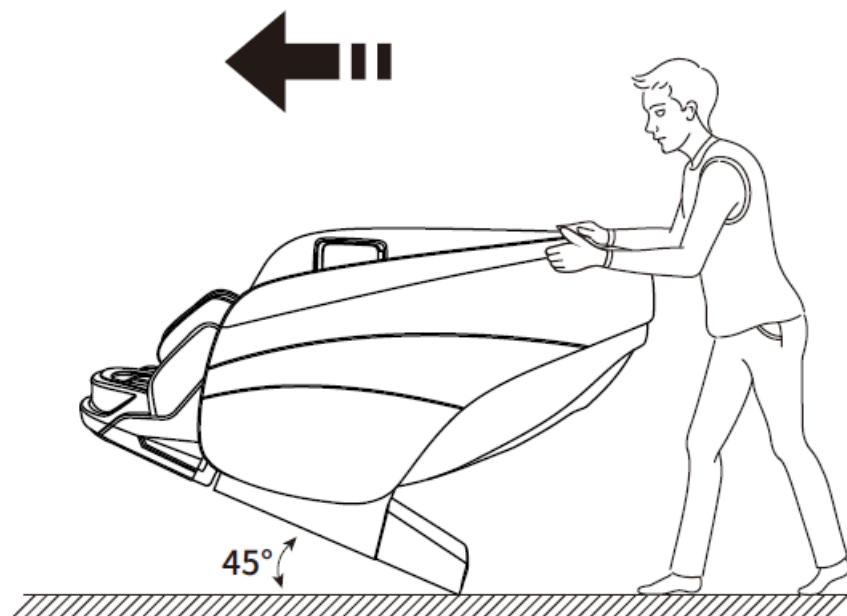

A készülék használata

Emelés


1. Kérjük, emelje fel a masszázsfotelt, amikor kényes felületeken, például fa padlón mozgatja.
2. Hasonló felületeken történő mozgatás esetén ajánlott az emelés, hogy elkerülje a görgők és/vagy a hideg/melegburkolatok károsodását. Legyen óvatos, amikor a széket a kijelölt helyzetbe engedi le, hogy elkerülje a kéz vagy láb sérüléseit. Ne engedje el a széket, amíg az teljesen vízszintes nem lesz. A padló sérülésének elkerülése érdekében ajánlott egy szőnyeg vagy védőtakaró elhelyezése a padlóra.

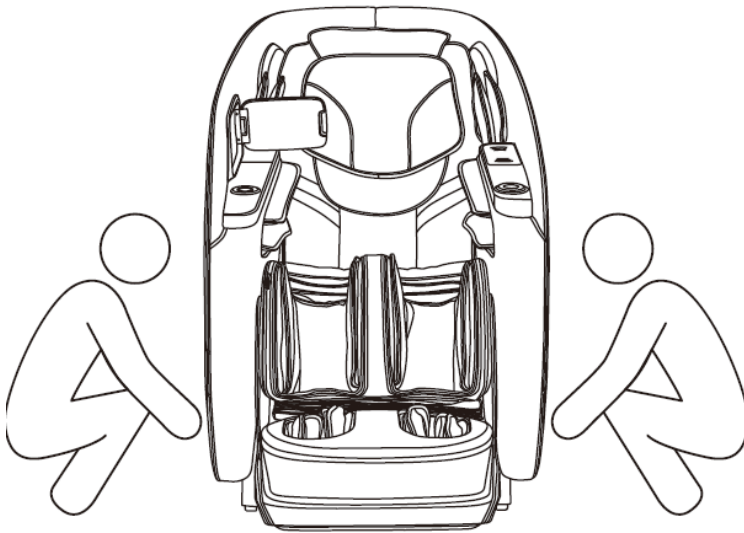


A készülék használata

Távolság a faltól

A masszázsfotel háttámláját mindig legalább 5 cm-re kell tartani a faltól. Ha a háttámla túl közel van a falhoz, akkor a fotel leereszkedéskor ütközni fog a fallal, ami károsítja a terméket.

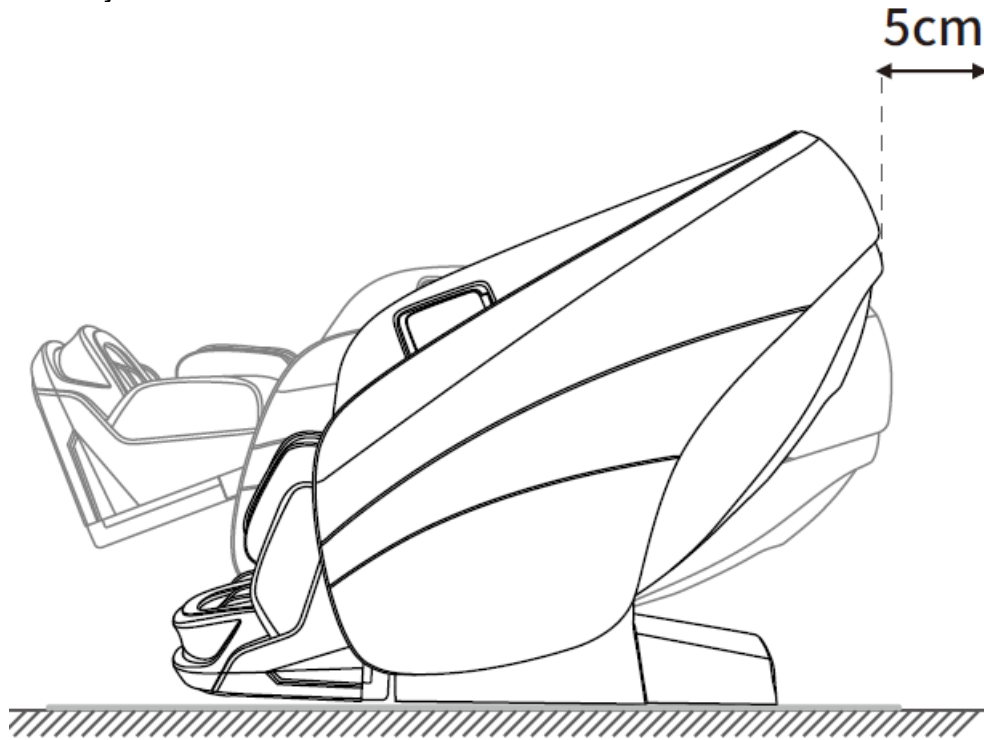

Tisztítás: száraz, puha törölkendővel, esetleg textilbőr ápolóval, műbőr ápolóval. Érdemes letakarni valamilyen takaróval a masszázsfotel, amikor nem használjuk, hogy ne porosodjon. Háziállatokat ne engedjük a közelébe. A Bionwellnél vásárolható takaróhuzat erre az esetre.

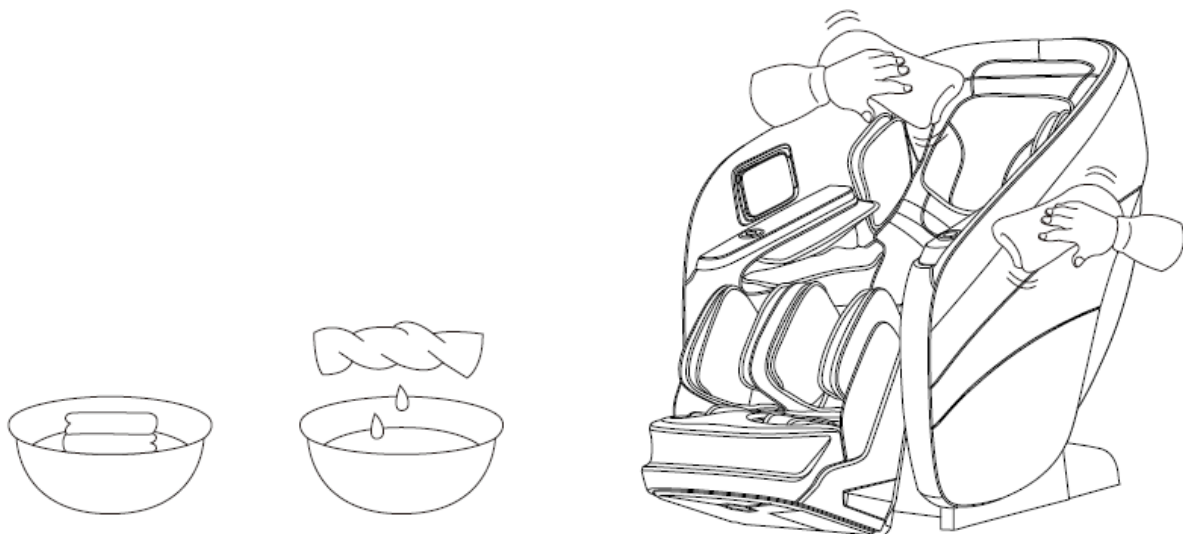

Műszaki adatok

Modell: SLA-505

Név: Bionwell iCare 4D masszázsfotel

Merőleges feszültség: 110-120V ~ 60Hz

220-240V~ 50Hz/60Hz

Teljesítmény: 100W

Alap masszázs-időtartam: 20 perc

Biztonsági struktúra: I. osztály

Felhasznált anyagok: PVC, PA, acél és elektronikus, valamint elektromos alkatrészek

ANYAG	PU	BŐR	TEXTIL	FA