


BionWell

**Bionwell Flame 3D
SL-A2801
MASSZÁZSFOTEL**

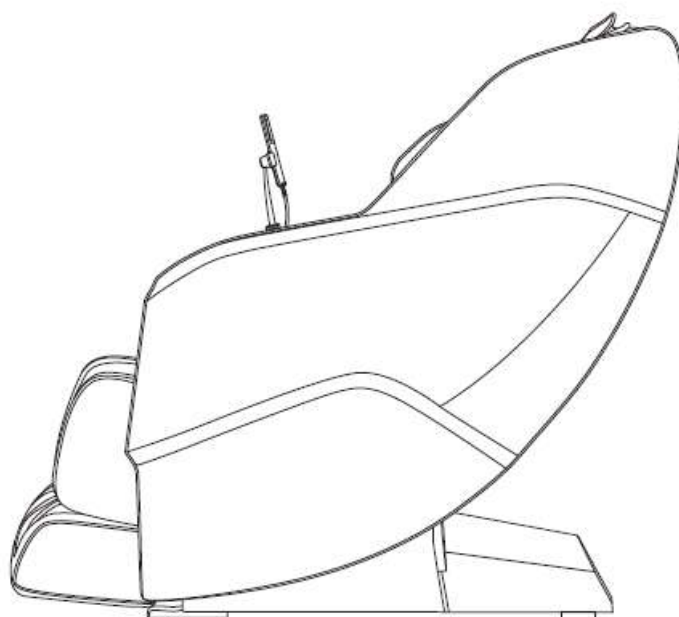

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Fokozott figyelemmel kövesse végig a biztonsági utasításokat, és kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbiekre is. Megjegyzés: cégünk fenntartja a jogot a fotel konstrukciójának és leírásának megváltoztatására minden további figyelmeztetés nélkül. Kérjük, hivatkozzon a fotel aktuális színére.

Tartalom

Biztonság és karbantartás

Biztonsági figyelmeztetés

Alkatrészek neve és funkciója

Funkciók

A készülék használata

Műszaki adatok

1. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



- Kérjük, az alábbiakban leírtak szerint használja a fotelt.
- Minden, a leírtaktól eltérő használati mód tilos és akár élvészélyes lehet!
- Gyerekeknek tilos a mozgó alkatrészekhez nyúlni.
- Használat után és takarítás előtt is mindig húzza ki a konnektorból a fotel csatlakozóját, elkerülve a személyi sérüléseket, vagy a fotel sérülését.
- Kizárólag jól szigetelt, megfelelően földelt elektromos forráshoz csatlakoztassa.
- A fotelt azonnal kapcsolja ki, ha nem érzi jól magát.
- Ne viseljen ékszereket a masszázsfotel használata közben.
- Ha a fotel nem a megszokott módon működik, kapcsolja ki, és áramtalanítsa, majd keresse fel forgalmazóját. Szakember jelenléte nélkül a fotelt ne szerelje szét!
- Amennyiben haja, fejbőre bármilyen kezelés alatt áll, vagy mielőtt beülne a fotelbe, haja esetleg nedves, kérjük, tegyen törölközőt feje alá a felületek megóvásának érdekében.
- Zsebében ne tároljon törékeny, robbanékony, éghető anyagokat, tárgyakat a masszázsfotel használata közben. Ilyen lehet egy mobiltelefon is.
- 16 éven aluliaknak nem ajánlott használni a masszázsfotelt.
- 130 kg feletti felhasználók esetében a fotel meghibásodására nem tudunk garanciát vállalni.
- Ügyeljen arra, hogy a konnektor, amelyhez csatlakoztatja a készüléket, ne legyen meglazulva.
- Használat után, és tisztítás előtt mindenképpen áramtalanítsa a készüléket.
- A készüléket egyhuzamban használni 20 percig ajánlott.
- A készüléket a használati útmutatónak megfelelően működtesse.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a bőrfelület sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha más fedőréteg sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a hőszugárzó útja nem szabad.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt kültéren.
- Ne ejtsen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- Ne aludjon el a masszázsfotel használata közben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt ittas állapotban, vagy rossz közérzet esetén.
- Kérjük, evés/étkezés után legalább 1 óra teljen el, mielőtt használja a masszázsfotelt.
- Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne állítsa tartósan túl erőse a masszázst.

2. Környezet

- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt magas hőmérsékletű, ill. nyirkos helyiségben, pl. fürdőszobában. Az optimális használati páratartalom: 20-80% .
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt olyan helyen, ahol hirtelen hőmérsékletingadozás lehetséges. Optimális hőmérséklet a masszázsfotelnek: 0-35 Celsius fok.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túlzottan poros környezetben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túl kicsi helyiségben, vagy olyan helyen, ahol nincs megfelelő szellőzés.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek a masszázsfotelt.
- Ne használja kültéren a masszázsfotelt.
- Ne használja a masszázsfotelt vihar, villámlás közepette.
- Ne használja a masszázsfotelt semmilyen fűtő- vagy hűtőegység közvetlen közelében, vagy olyan közelségben, ami kárt tehet a fotelben.

Biztonság és karbantartás

3. Akik nem használhatják a masszázsfotelt

- Csontritkulásban szenvedők
- Szívbetegségben szenvedők, vagy olyanok, akik elektronikus egészségügyi eszköz (pl. pacemaker) használatára szorulnak
- Olyan személyek, akiknek trombózis, aneurizma, súlyos visszér vagy más keringési betegségek miatt tilos masszázst kapniuk. Vérrögök megjelenését követő két héten belül szigorúan tilos a vérrögökkel teli testrészek masszírozása!
- Lázas betegek
- Terhes állapotú nők; szülés után legalább 6 hétig (orvosi konzultáció után!) vagy menzesz periódusban lévő nők
- Balesetet szenvedett, vagy bőrbetegségben szenvedő személyek
- 14 év alatti gyerekek, ill. szellemileg labilis állapotban lévő személyek
- Orvosuk által pihenésre intett, vagy magukat rosszul érző személyek
- Nedves testű személyek
- Hőérzékeny személyek óvatosan, orvos beleegyezésére használhatják csak a fotelt, ügyelve, hogy a fotel hátfűtési funkciója ne okozzon nekik gondot.
- Akiknek rosszindulatú daganata van
- A készüléknek fűtött felülete van, így aki a hőre érzéketlen, fokozott óvatossággal használja a masszázsfotelt.
- Súlyos gerincbetegségben szenvedők kérjék ki kezelőorvosuk véleményét.
- Sérüléssel vagy bőrbetegséggel küzdő személyek.
- Személyek, akiknek testsúlya meghaladja a 120 kg-ot.

4. Biztonság

- Ellenőrizze a feszültséget, hogy megfelel-e a készülék előírásainak.
- Nedves kézzel ne húzza ki a tápvezetékét.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, az áramütést, ill. a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.
- Ne sértse fel a vezetékeket, és ne változtasson az áramkörön.
- Ne használjon nedves törölkendőt az elektromos részek, pl. főkapcsoló, vagy tápvezeték megtisztítására.
- Esetleges áramszünet ideje alatt maradjon távol a készüléktől a baleset elkerülése érdekében, ha az áram hirtelen visszajönne.
- Rendellenes működés, zaj, szag, túlmelegedés esetén azonnal állítsa le a készüléket, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és konzultáljon a kereskedővel/közvetítővel.
- Rosszullét esetén állítsa le a készüléket, és keresse fel orvosát.
- Nem ajánlott a készülék használata olyan személyeknek (beleértve a gyerekeket), akik fizikailag, szellemileg, vagy érzékelés szempontjából korlátozottak, kivéve, ha az ő egészségükért felelős személy jóváhagyta nekik a fotel használatát.
- Ha a tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.
- A helyiség elhagyásakor húzza ki a tápellátást.
 - Ne táplálja a készüléket lámpaaljzatokból.
 - A csatlakoztatott készülékek teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a fő aljzat/áramkör névleges áramát.
 - Soha ne használja gyúlékony/robbanásveszélyes anyagok közelében.
 - Ne szerelje szét a terméket, és ne módosítsa a belső vezetékezését, alkatrészeit vagy biztonsági funkcióit.
 - Kihúzásakor ne húzza a tápkábelt.
 - Csak a megadott értékű biztosítékot használja - soha ne cserélje ki vezetőképes anyagokkal vagy helytelen értékűekkel.

- Ne módosítsa a megszakítók vagy a maradékáram-védőkapcsolók kioldási beállításait.

5. Karbantartás

- A készüléken csak szakember végezhet karbantartást, a felhasználónak tilos a fotel szétszerelése és önálló karbantartása.
- Kérjük, mindig áramtalanítsa a fotelt használat után.
- Ne használja a készüléket, ha meglazult a konnektor.
- Ha a készülék hosszú ideig használaton kívül van, tekerje fel a vezetéket, a fotelt pedig száraz és pormentes helyiségben tárolja, +5 – +40 Celsius fok között, maró gázoktól mentes övezetben, jól szellőző helyiségben.
- Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig magas hőmérsékletű helyiségben, tűz mellett, és ne tegye ki tartósan közvetlen napsugárzásnak.
- Ha a lecsavarható vezeték / tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.

Biztonság és karbantartás


- A készüléket mindig száraz ruhával tisztítsa meg. Ne használjon higítót, benzint, vagy alkoholt.
- A készülék mechanikus alkatrészei speciálisan lettek megtervezve és legyártva, nem igényel különleges karbantartást.
- Ne használjon éles tárgyat a fotel mozgatására.
- Ne húzza, vagy gurítsa a fotelt egyetlen talajon. Ilyenkor mindenképpen emeléssel mozgassa.
- Szakaszosan használja a készüléket; túl sokat egy huzamban ne működtesse. Szakaszos működés engedélyezett - a folyamatos, hosszú távú használat tilos!

6. Általános üzemzavarok orvoslása

- Használat közben a motor hangja teljesen természetes.
- Ha az irányító nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a tápvezeték megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz, valamint győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- Ha egy masszázsprogram beállított működési ideje lejár, a készülék automatikusan megáll. Ha a fotel túl sokáig van egyhuzamban működésben, a hőmérséklet-érzékelő berendezés automatikusan leállítja azt. Ilyenkor kérjük, várjon legalább fél órát, és csak utána használja újra a készüléket.

Biztonsági figyelmeztetés

Amikor a lábtartó emelkedik, vagy felemelt állapotban van, nem szabad ránehezedni, hogy elkerüljük annak sérülését, vagy a személyi sérülést!

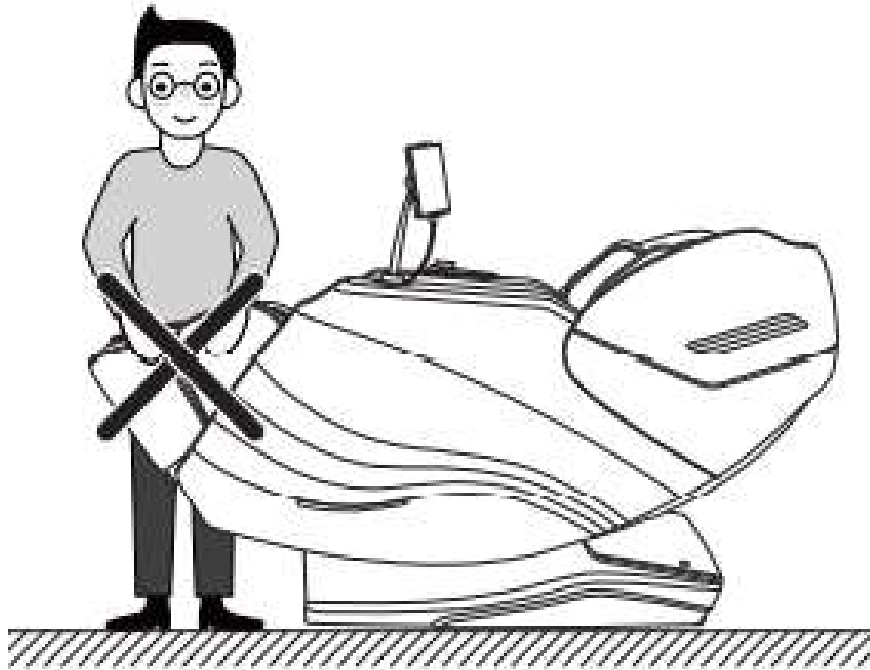


Mielőtt beleülne a masszázsfootelbe, győződjön meg róla, hogy a masszázsgörgők a háttámla párnái mögött helyezkednek el, hogy elkerülje a diszkomfortérzetet és a masszázsgörgők sérülését.




Biztonsági figyelmeztetés

Működés közben ne húzza ki (és ügyeljen rá, hogy gyermekei vagy unokái se tegyék) a masszáfotelből a csatlakozót, és a hosszabbítót se nyomja le, hogy megelőzze az elektromos áramütést vagy a masszáfotel meghibásodását. Használat után húzza ki a vezérlő csatlakozóját és a tápkábelt, rakja is el őket, ez a legbiztonságosabb megoldás.

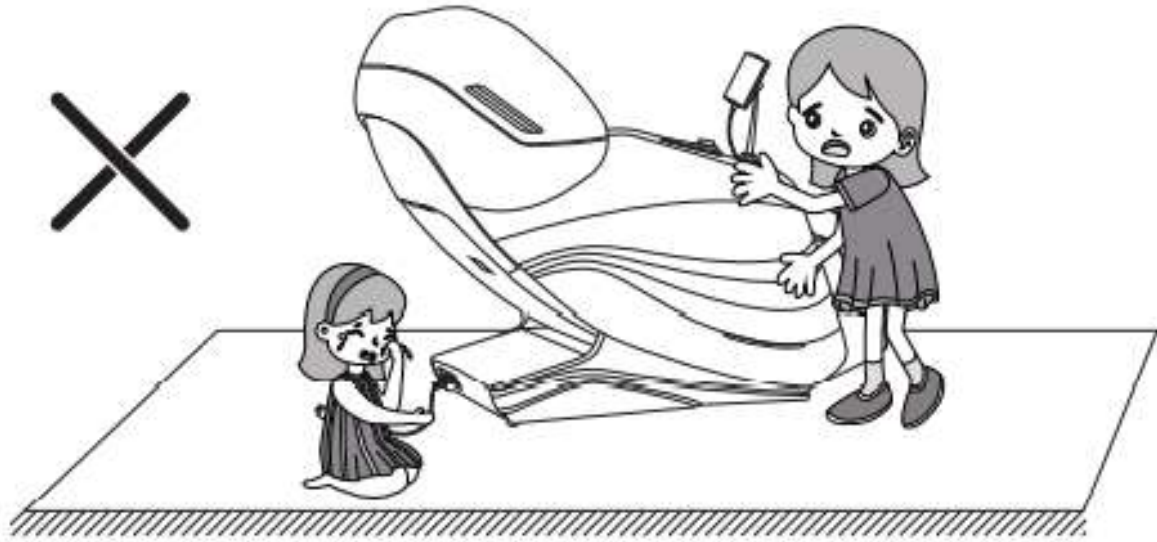

Mielőtt elindítaná, működésbe hozná a fotelt, győződjön meg róla, hogy a lábtartó alatt, illetve a háttámla alatt és mögött nem tartózkodik senki és semmi. A zero gravity pozícióban ugyanis a fotel hátra dől, lejjebb ereszkedik, ami személyi sérülést okozhat annak, aki az előbb említett helyeken tartózkodik, ha tárgyról van szó, megsértheti azt, valamint a masszáfotelt is.

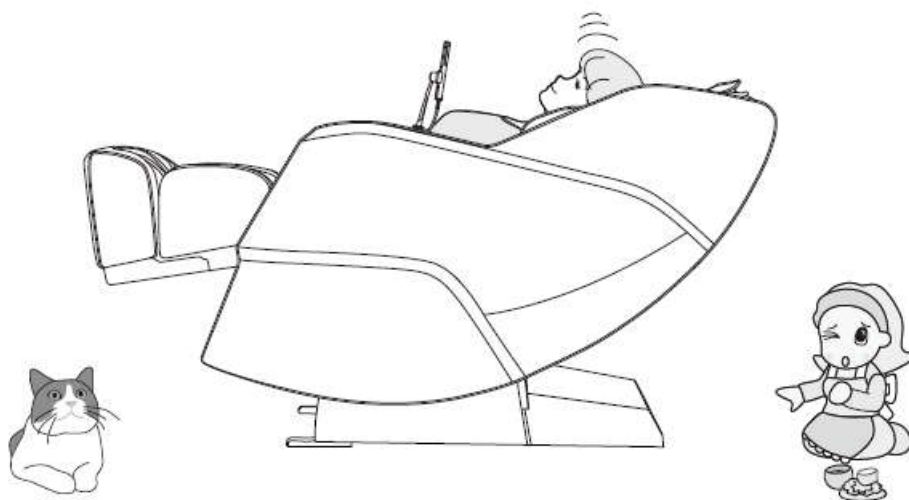


Biztonsági figyelmeztetés

Minden használat előtt ürítse ki a zsebeit, és vegye le az ékszereit, óráját, hogy elkerülje a személyi sérülést, vagy a fotel sérülését.




Győződjön meg róla minden használat előtt, hogy az alább jelölt helyeken nincs idegen tárgy. Semmilyen körülmények között ne engedje, hogy az Ön vagy bárki más keze, lába vagy feje a lábszár mechanizmusa és a foteltest közötti-, vagy a kartámasz és a foteltest közötti-, vagy a fotel mögötti-, vagy a lábtartó vádli-részének jelölt területein legyen.

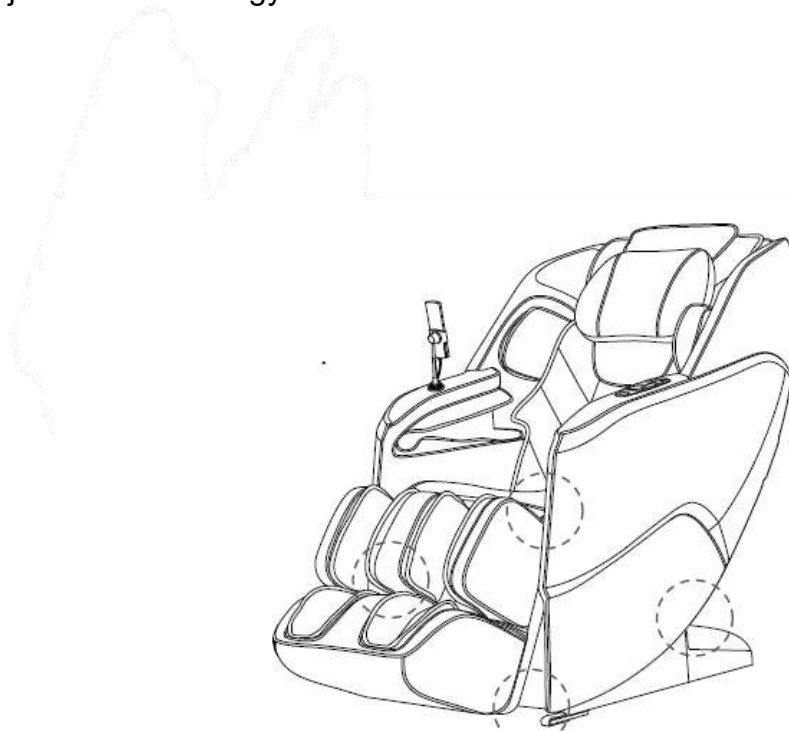


Biztonsági figyelmeztetés

Ne aludjon el a masszázsfotelben, amíg az masszíroz, hogy elkerülje a személyi sérülést.

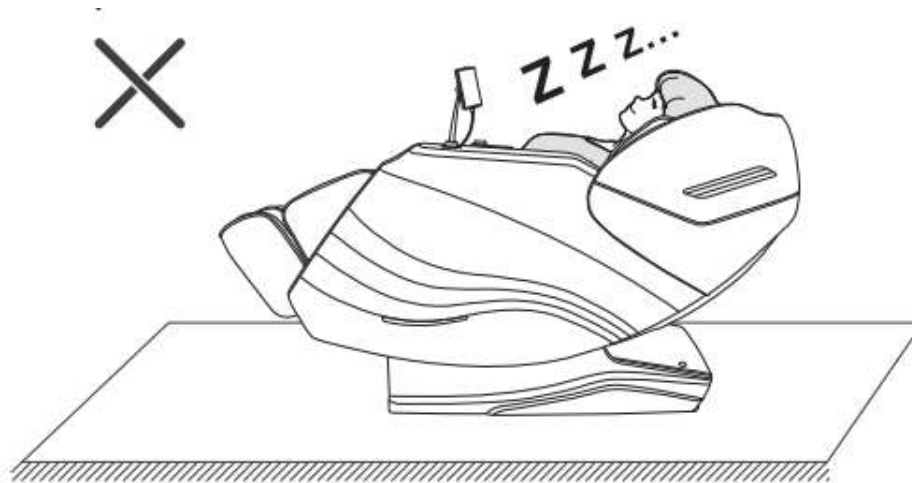


Egyszerre csak egy személy használhatja a fotelt. Gyerekek ne játszanak rajta, ne ugráljanak rajta, ne másszanak fel rá. Így elkerülhetjük a személyi sérülést és a fotel sérülését.

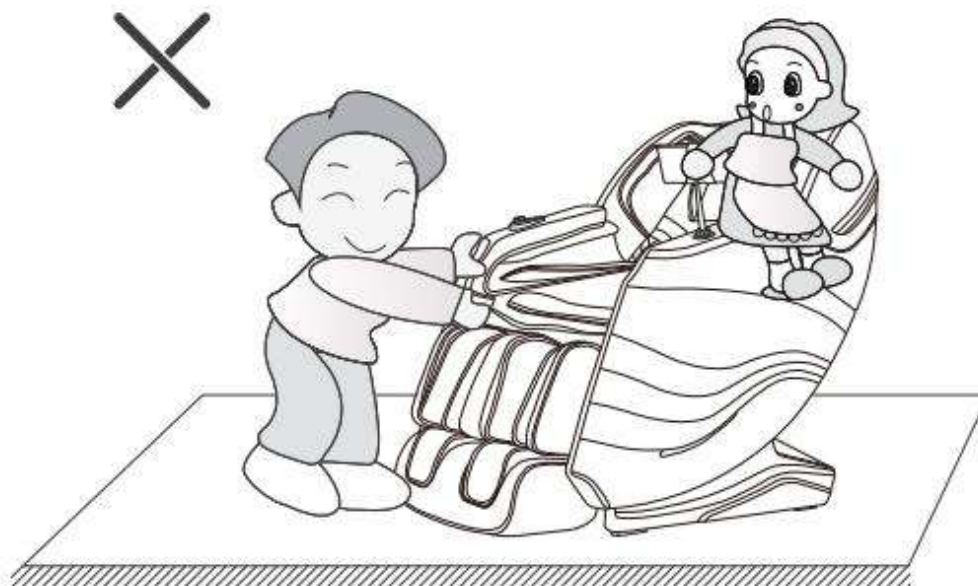


Biztonsági figyelmeztetés


Amikor a fotel lábtartója mozgásban van, mozog, ügyeljen rá, hogy nehegy becsípje a kezét, ne tegye a lábtartó és a háttámla közötti részbe a kezét, se más keményebb tárgyat (pl. mobiltelefon, kulcs, stb.). Így elkerülheti a személyi sérülést és a fotel sérülését.

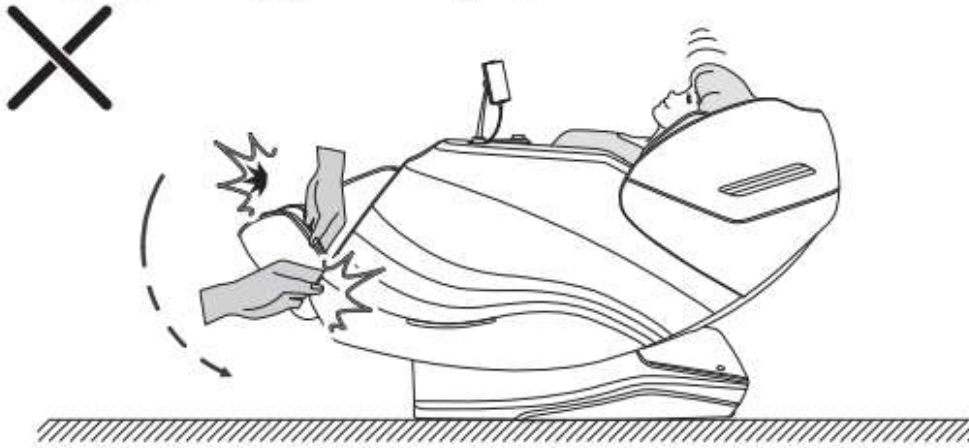

Használat előtt győződjön meg róla, hogy nincs a fotel útjában (hátról alatta, vagy elől a lábtartó alatt) semmilyen kemény tárgy, állat, vagy személy, legyen az gyermek, vagy felnőtt. Így elkerülheti a személyi és a tárgyi sérüléseket, illetve a fotel sérülését.

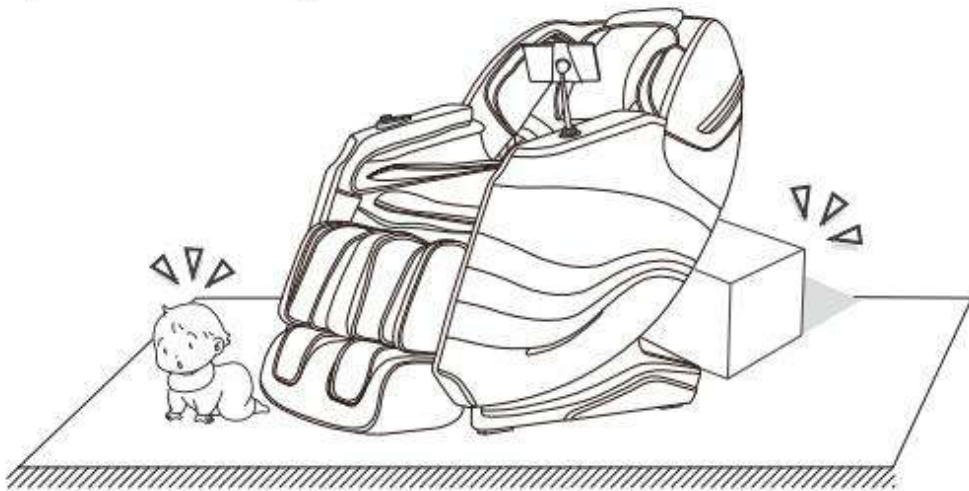

Használat előtt

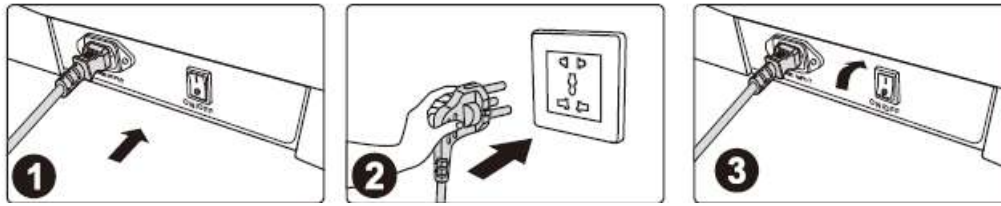


1. Csatlakoztassa a tápkábelt a masszázsfotelhez.
 2. Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba.
 3. Kapcsolja fel a főkapcsolót a fotel alján hátul.
-




- Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a csatlakozódugót sérülések szempontjából.
- Kérjük, a termék kalibrálásának megfelelő tápellátást biztosítson.
- Szigorúan tilos a termék névleges tápellátásától eltérő tápegységet használni.
- Szigorúan tilos különféle teljesítményátalakító eszközöket csatlakoztatni engedély nélkül a termék tápellátására.

Alkatrészek neve és funkciója

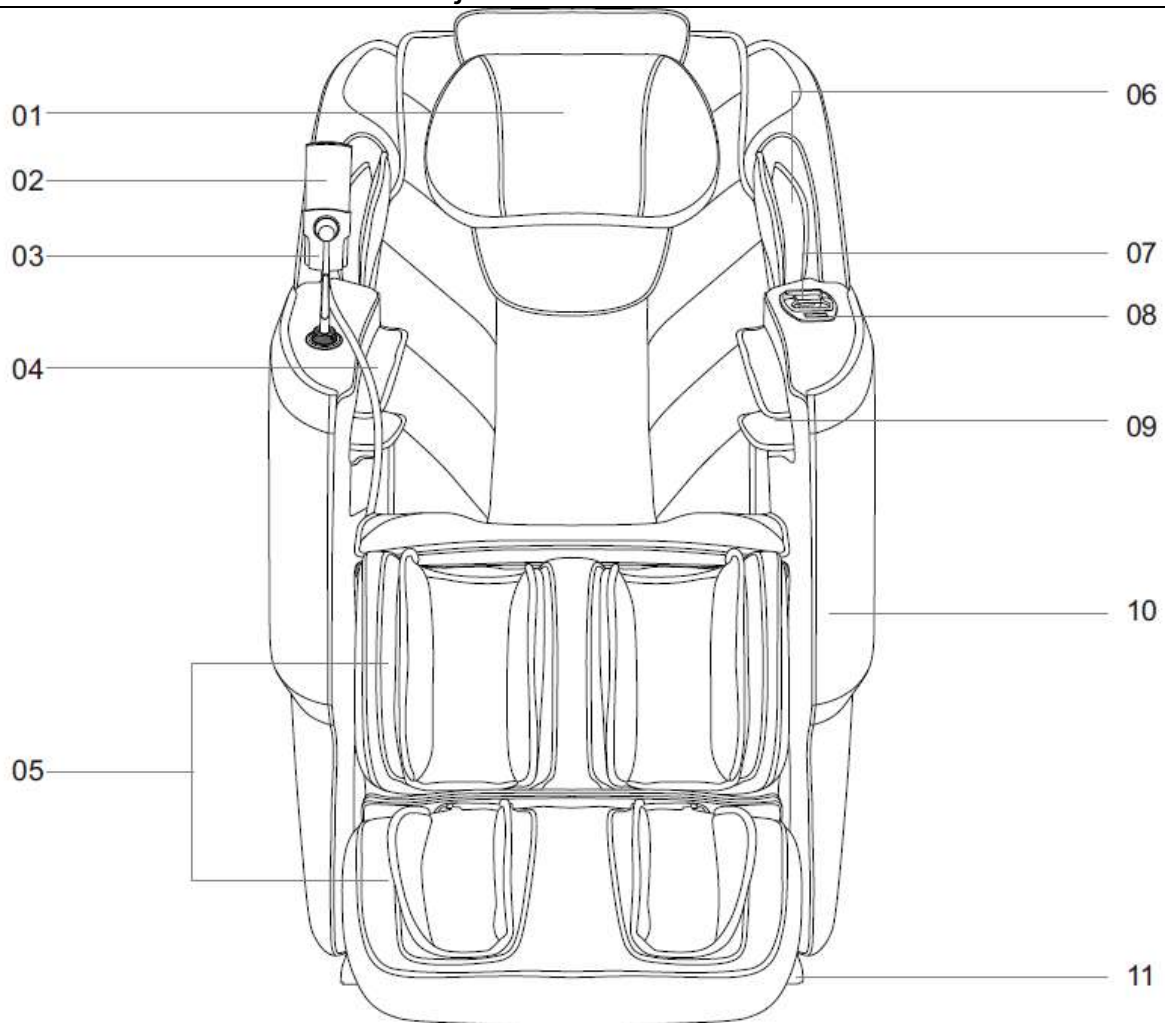


- 01. Fejpárna
- 02. Kézi vezérlő
- 03. Vezérlő tartókonzolja
- 04. Kar légpárnák
- 05. Lábrész masszázsmechanismusai
- 06. Váll légpárnák
- 07. Karfa vezérlőgombok
- 08. USB / Type-C töltőport
- 09. Kar légpárnák
- 10. Karfa
- 11. Oldalborítás

Alkatrészek neve és funkciója

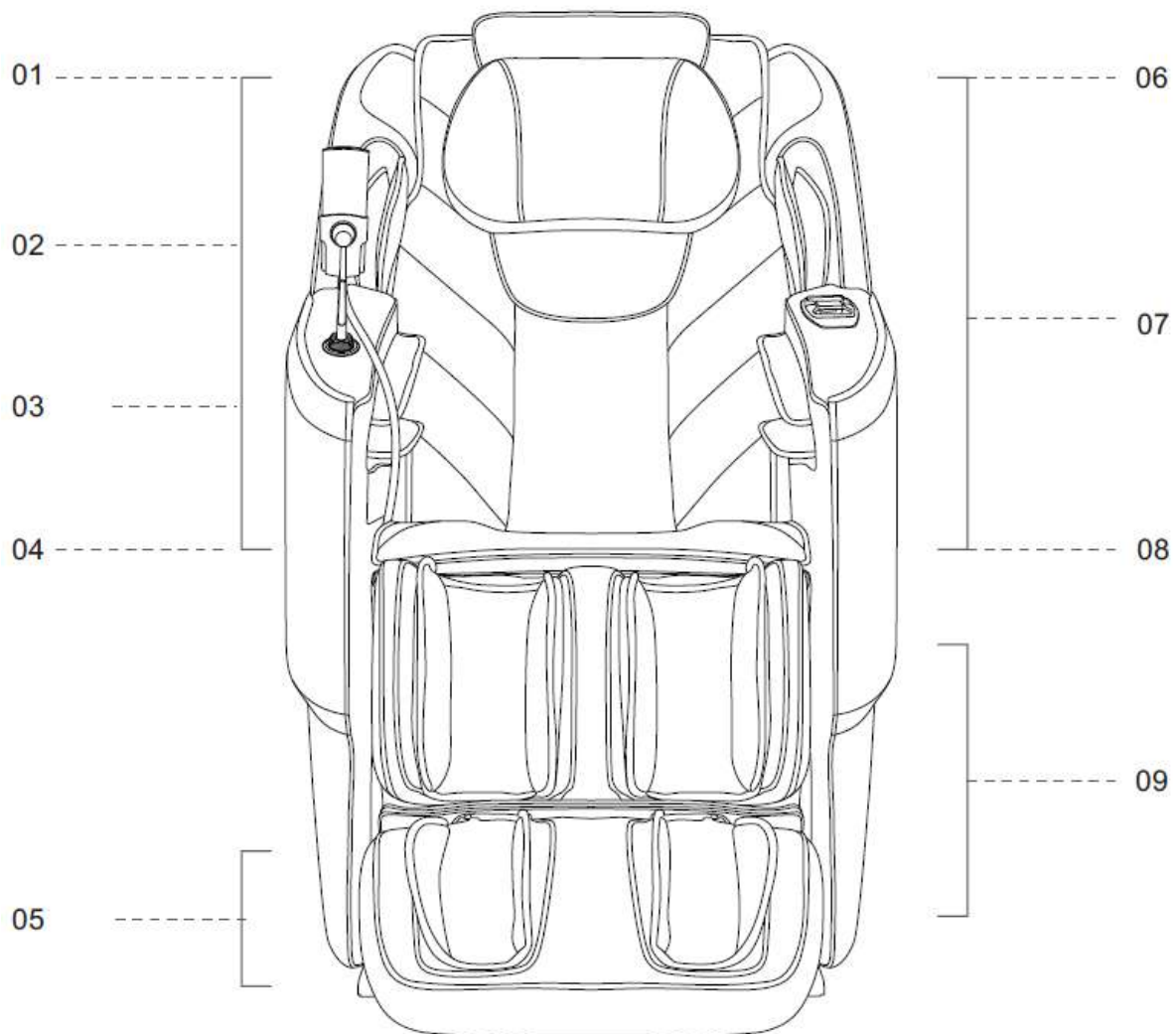


- 01 – Fejrész – 3D digital audio hangrendszer - zenelejátszási lehetőség
- 02 – Vállrész – Légpárnás masszázs
- 03- A fejtől az ülőfelületig – a görgős masszázsmechanizmus útja
- 04 – Jobb kar légpárnák masszázsa
- 05 – Láb – légpárnás masszázs + talpmasszázs + boka- és sarokmasszázs
- 06 – Bal oldali fejrész – hangvezérlő egység mikrofonnal
- 07 – Hátrész – hőterápia fűtőfunkció
- 08 – Bal karfa – légpárnás masszázs
- 09 – Vádli – légpárnás masszázs

A kézi vezérlő használata

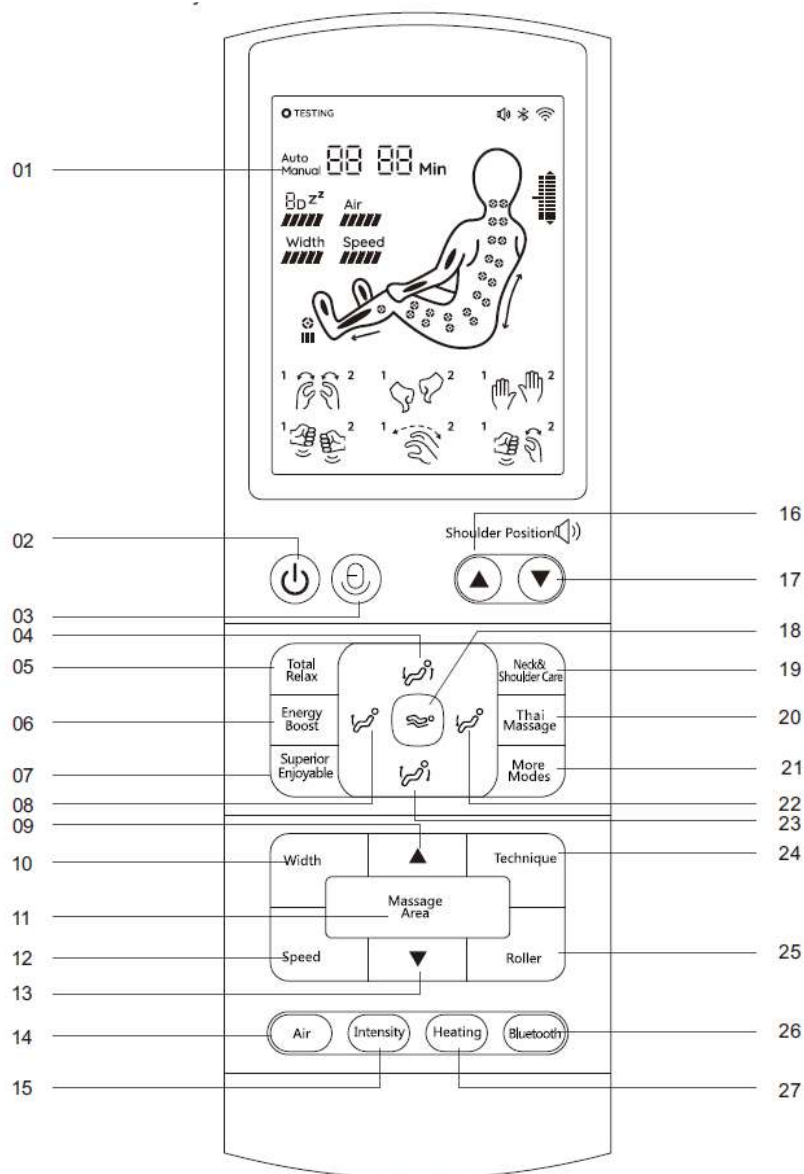


- 01 - LCD kijelző – folyadékkristályos kijelző, amely működés közben megjeleníti a funkciókat.
- 02 - Be/kikapcsoló gomb
- 03 – Hosszan nyomva be/ki kapcsolható a hangvezérlés mód. Röviden nyomva bekapcsolt állapotban „feléleszti” a funkciót.
- 04 – Felültetés gomb – nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a háttámla emeléséhez és a lábtartó süllyesztéséhez – engedje el, ha meg akarja a folyamatot állítani.
- 05 – Total Relax automata masszázsprogram – bővebben később olvashat róla.
- 06 Energy Boost automata masszázsprogram – bővebben később olvashat róla.
- 07 Superior Enjoyable automata masszázsprogram – bővebben később olvashat róla.
- 08 Lábtartó felfele emelése gomb - nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a lábtartó emeléséhez– engedje el, ha meg akarja a folyamatot állítani.

A kézi vezérlő használata

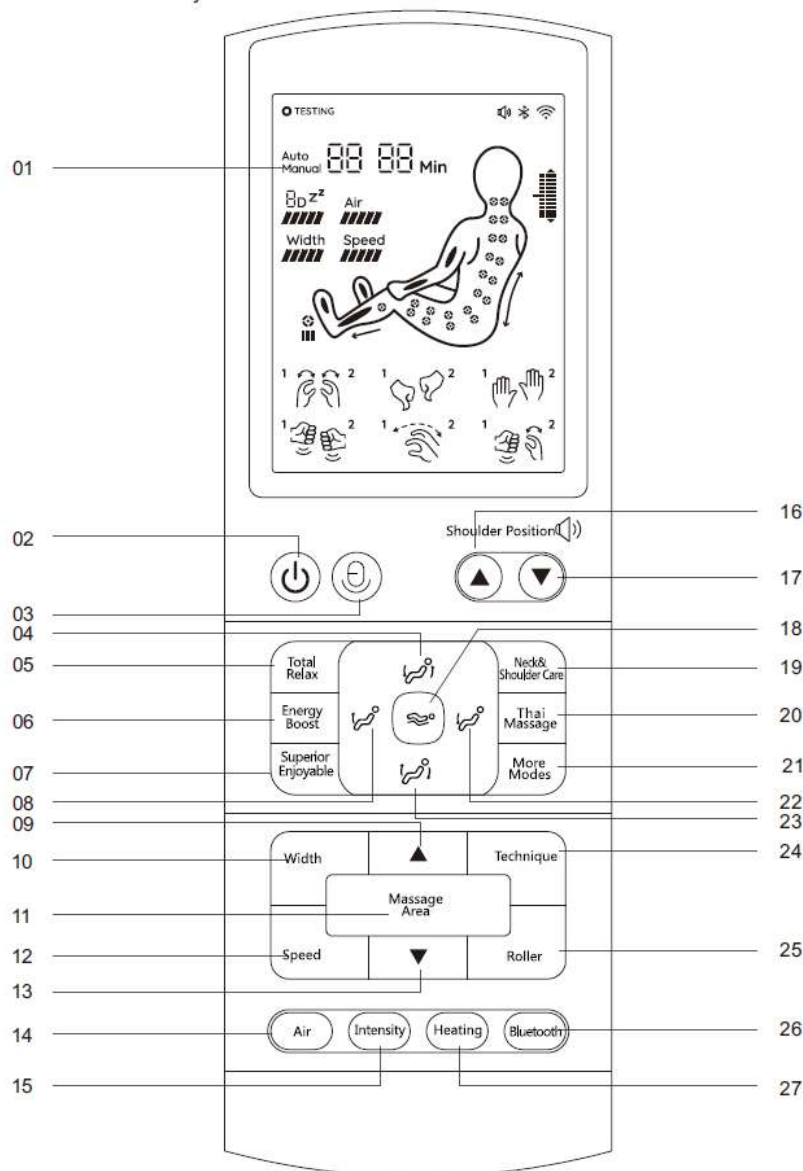


- 09 – Masszázs görgők mozgatása felfele irányban - Csak manuális módban fix pontos és adott testrész masszázsnál használható! Erről később olvashat bővebben.
- 10 – Width - Görgők szélességének beállítása - Csak manuális módban shiatsu és ütögető masszázsmódszereknel használható! Erről később olvashat bővebben.
- 11 – Massage Area - Masszázs helyének módosítása - Csak manuális módban használható! Erről később olvashat bővebben.
- 12 – Speed - Masszázs sebességének módosítása – 5 szinten állítható a gomb nyomogatásával.
- 13 – Masszázs görgők mozgatása lefele irányban - Csak manuális módban fix pontos és adott testrész masszázsnál használható! Erről később olvashat bővebben.

A kézi vezérlő használata

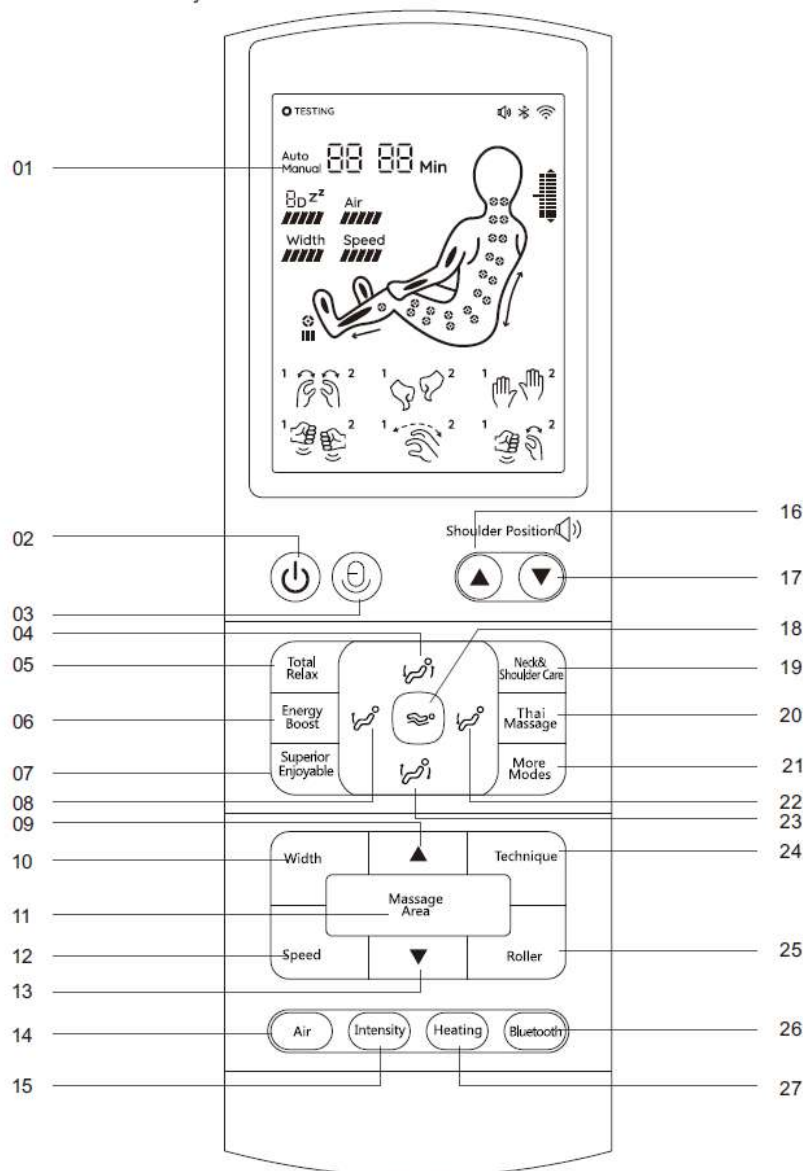

- 14 – AIR - Légpárnás masszáz – ki/be kapcsolása a kompressziós masszáz soknak – a gombot nyomogatva „felsőtest”, „alsótest”, „teljes test” és „kikapcsolás” funkciók érhetőek el.
- 15 – Intensity – Kompressziós légpárnás masszáz intenzitása – 5 szinten állítható a gombot nyomogatva.
- 16 – Shoulder Position – Vállpozíció feljebb állítása – röviden nyomva. Hosszan nyomva a hangerőt hangosítja feljebb
- 17 - Shoulder Position – Vállpozíció lejjebb állítása – röviden nyomva. Hosszan nyomva a hangerőt halkítja lejjebb.
- 18 – Zero gravitáció pozíciók – 2 pozíció és a felültetés funkció elérhető.
- 19 – Neck & Shoulder Care – Nyak- és váll fókuszú automata masszáz program – bővebben később olvashat róla.
- 20 Thai Massage – Thai masszáz stílusú automata masszáz program – bővebben később olvashat róla.

A kézi vezérlő használata

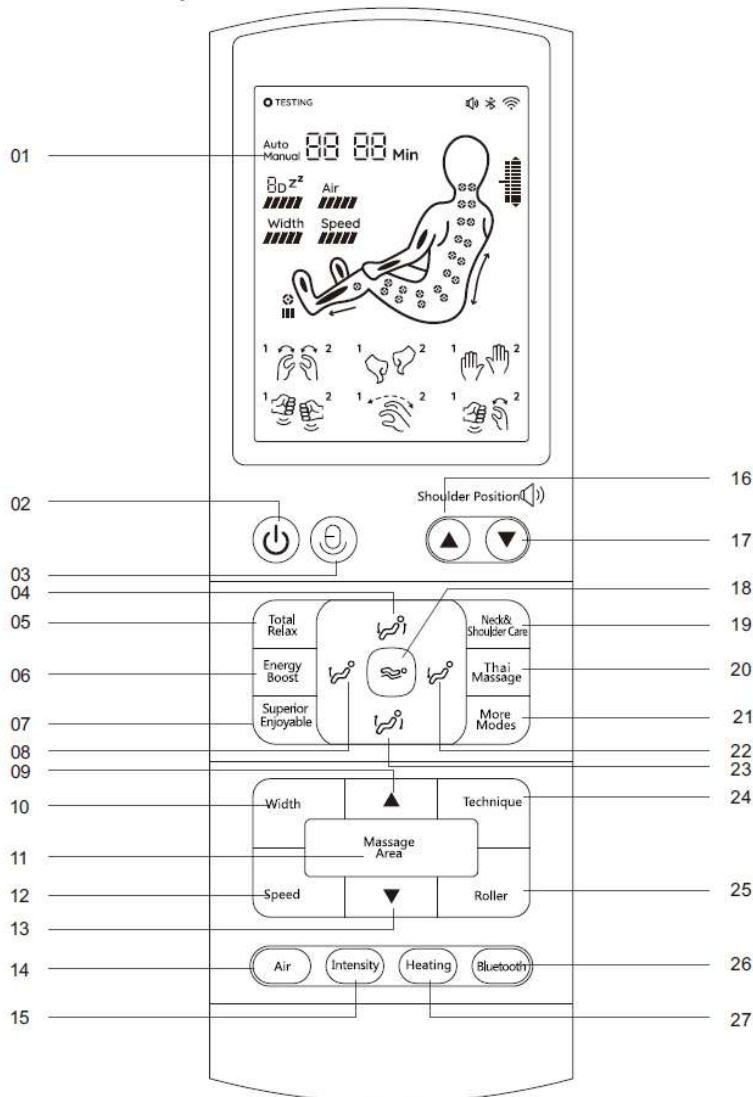


- 21 – More Modes – További automata masszázsprogramok - bővebben később olvashat róluk.
- 22 – Lábtartó süllyesztése – nyomja meg és tartsa lenyomva a folyamat véghezviteléhez. Engedje el a folyamat befejezéséhez.
- 23 – Hátradőlés - nyomja meg és tartsa lenyomva a folyamat véghezviteléhez. A lábtartó emelkedik, a háttámla süllyed. Engedje el a folyamat befejezéséhez.
- 24 – Technique – Masszázstechnikák – A gombot nyomogatva 12 különféle közül választhat. Később olvashat róla bővebben.
- 25 Roller – Talpmasszázs intenzitásának beállítása – A gombot nyomogatva 1-3. szinten állítható, illetve ki is kapcsolható.
- 26 Bluetooth – Hosszan nyomva ki/be kapcsolható a Bluetooth egység. Bekapcsolt állapotban csatlakozhat a masszázsfotelhez okoseszközeivel, és zenét hallgathat a masszázsfotel hangszóróin keresztül.
- 27 Heating – Röviden megnyomva ki/be kapcsolhatja a hátfűtés funkciót. Hosszan nyomva ki/be kapcsolhatja a csökkentett üzemmódot.

A karfa vezérlő használata

01 – USB / Type-C töltőport – masszázsközben töltheti okoseszközeit.


02 – Be/kikapcsoló illetve szünet/újraindítás gomb – Legalább 3 mp hosszan lenyomva a gombot be/kikapcsolhatja a masszázsfotelt. Masszázs közben röviden lenyomva szüneteltetheti/újraindíthatja a masszázst.

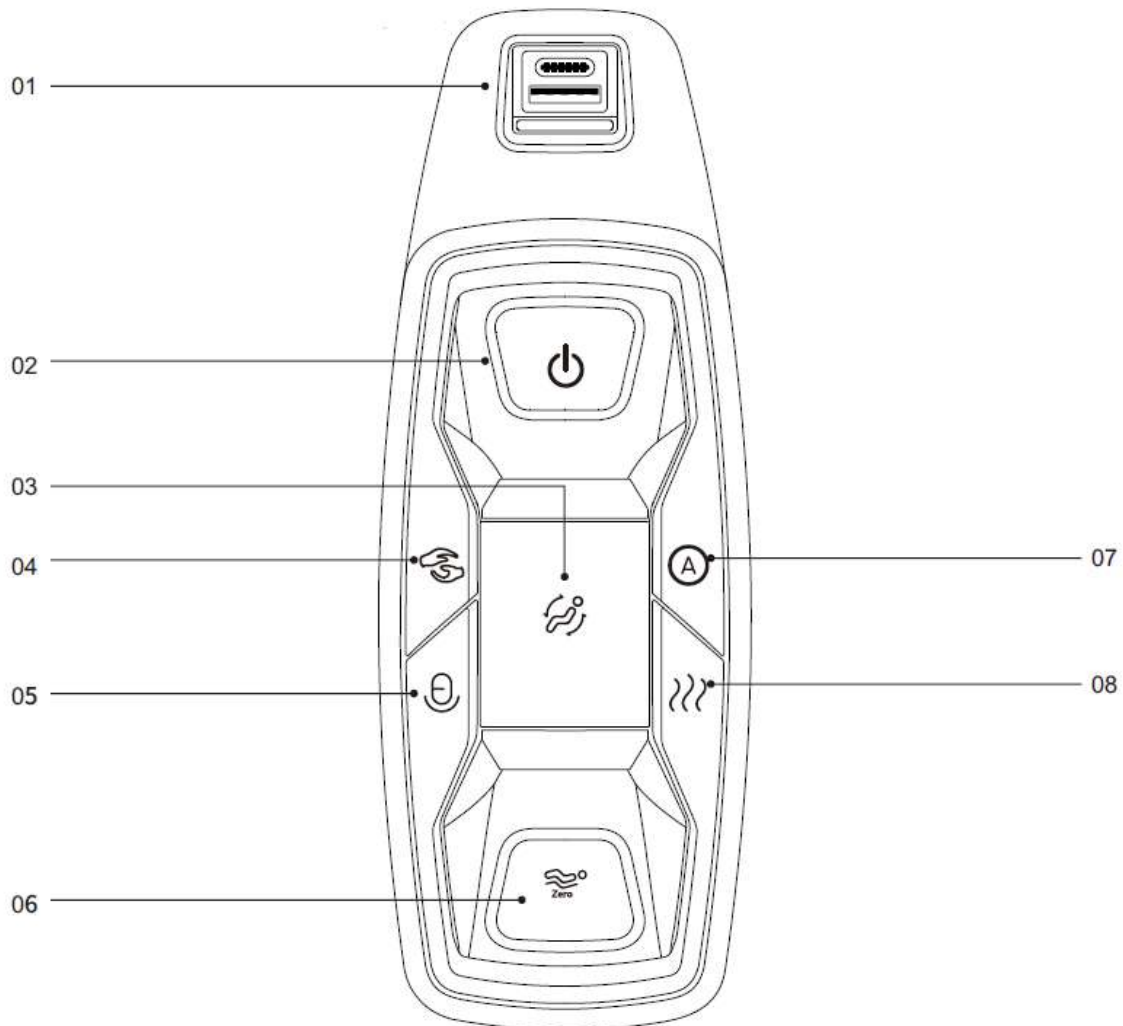

03 – Felültetés & Hátradöntés – Tolja előre a gombot a felültetéshez, húzza maga felé a hátradöntéshez. Tolja előre 2x gyorsan és tartsa nyomva a gombot a lábtartó süllyesztéséhez. Tolja hátra 2x gyorsan és tartsa nyomva a gombot a lábtartó emeléséhez.

04- Masszázstechnikák – Nyomogassa ezt a gombot a masszázstechnikák közötti váltáshoz: nem masszírozó funkció; Gyúró masszázst I-IV.; Ütögető masszázst I-II; Gyúrás-Ütögetés szinkronban I-IV.; Shiatsu (ujjnyomásos masszázst) – Összesen 12 db masszázstechnika közül választhat.

A karfa vezérlő használata

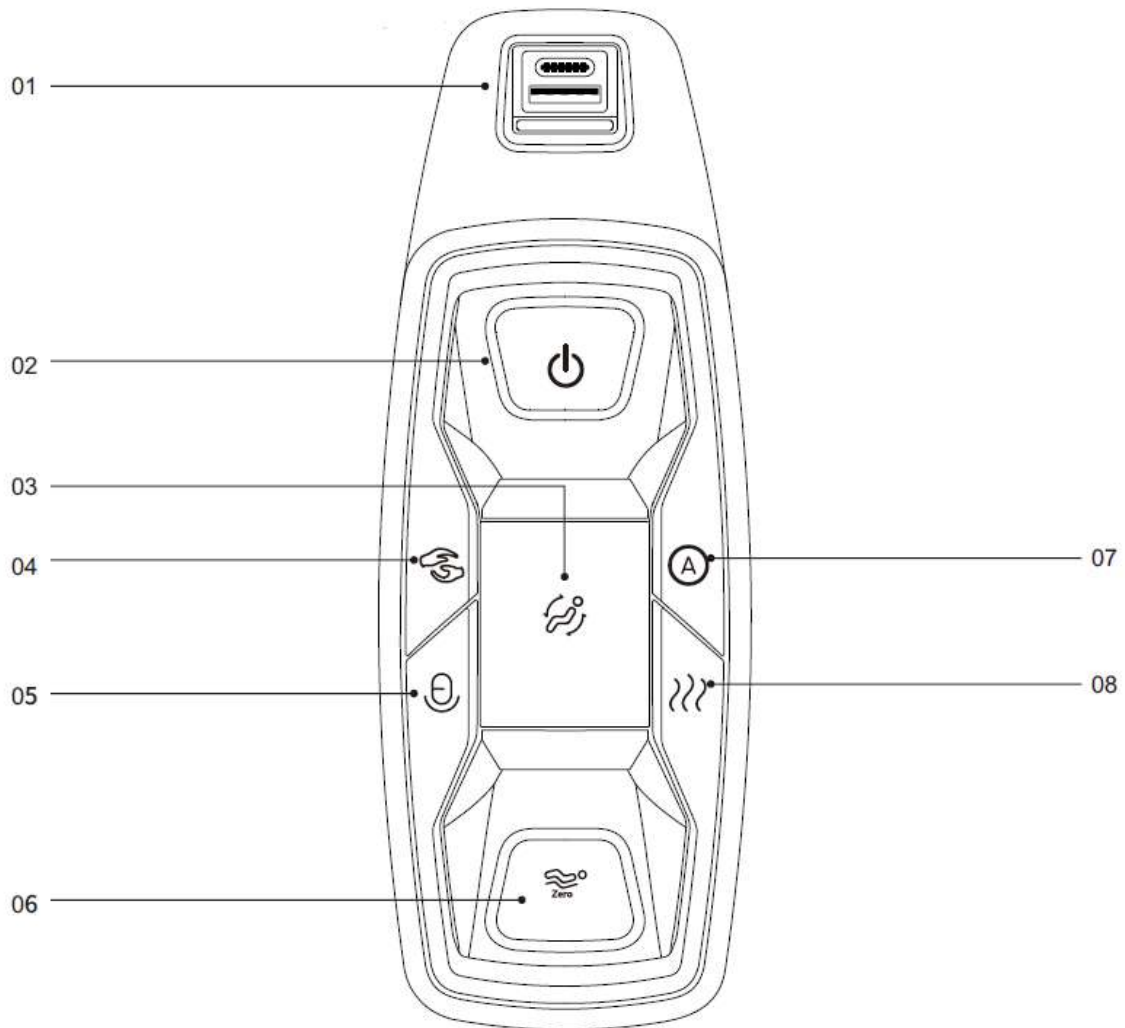

05 – Hangvezérlés gomb – Hosszan nyomva ki/be kapcsolhatja a funkciót. Röviden nyomva bekapcsolt állapotban „felébresztheti” a funkciót.

06 – Zero gravitáció funkció – 2 féle pozíció és felültetés mód érhető el a gomb nyomogatásával.



07 – Automata masszázsmódok közötti váltás – 18 automata program közül választhat, a gomb nyomogatásával érhetőek el.

08 – Hátmelegítő funkció – nyomja meg a be/kikapcsoláshoz.



A készülék használata


A masszázs indítása

- Nyomja meg a kézikonzolon a be/kikapcsolás gombot a masszázs indításához.

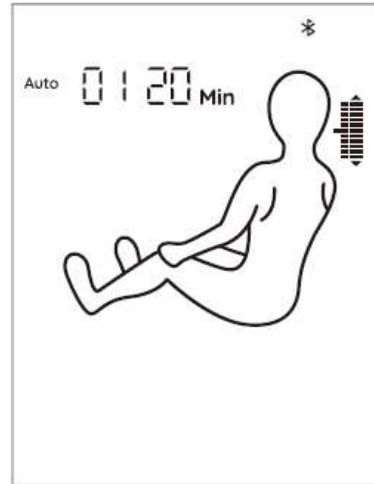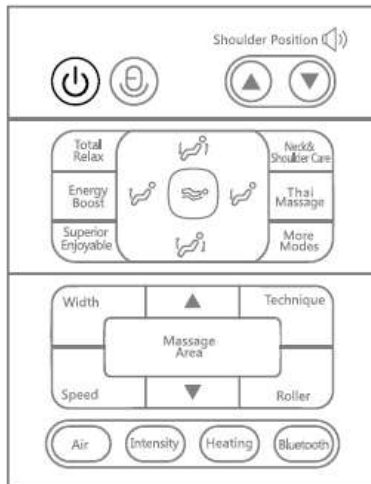

- A készülék elkezd hátradőlni, aztán felméri a benne ülő személy testét, megkeresi és megtalálja a vállpozíciót, ezek alapján beállítja a masszázspontokat. Várjon ülve, mozdulatlanul, a fotelbe simulva, ezen műveletek befejeztéig.
- A felmérés befejeztével a fotel erről tudomást ad; Ezután, ha nem érezzük megfelelőnek a görgők állását a vállunknál, manuálisan állíthatunk rajtuk, 10 különböző magasságban. (Ha 10 másodpercen keresztül nem állítunk a vállpozíción, a masszázs automatikusan elindul.)

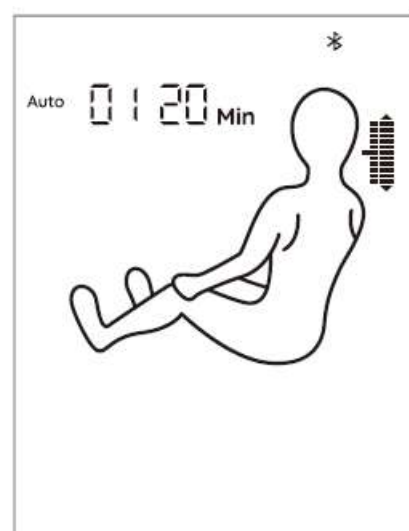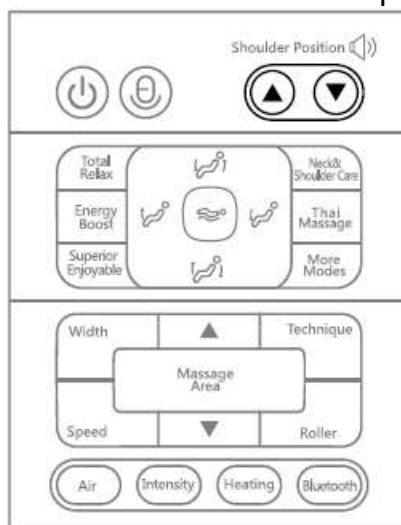

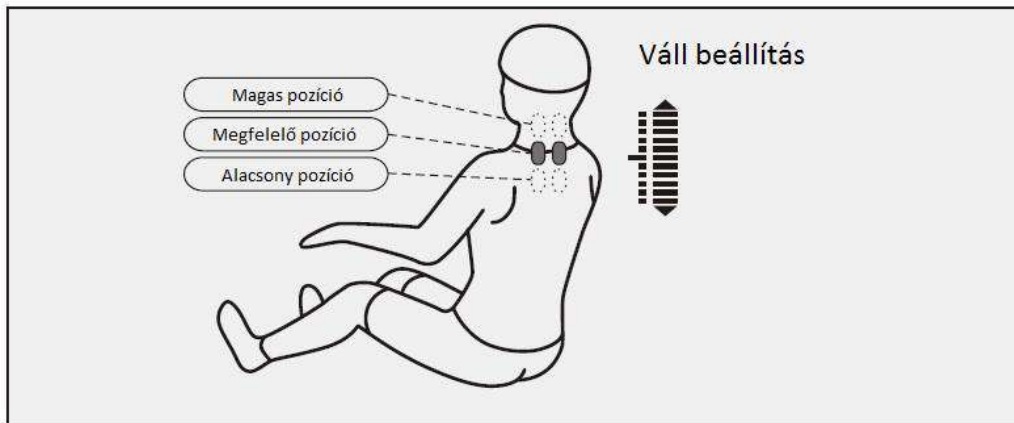

Automata masszázsek

18 db különböző automata masszázs funkció - csak 1-1 gombnyomás, és indulnak a programok!

- TOTAL RELAX - Relaxációs masszázs: Majdnem fekvő helyzetben történő masszázs; hatékony hátnyújtás; enyhíti a derék környéki izomfájdalmat és megszüntetheti a fáradtságot; nagyszerű masszázserő; enyhíti a testre és az elmére nehezedő stresszt. KIJELZŐ: 01
- ENERGY BOOST - Aktivizáló masszázs - Mélyen masszírozza át az egész testet gyúrással, ütögetéssel és shiatsu technikákkal, hogy felébressze az emberi test vitalitását és energiáját. KIJELZŐ: 02
- SUPERIOR ENJOYABLE - Masszázsprogram nem csak időskorúaknak - Kompressziós légmasszázs dolgozik a testen, illetve a talpgörgő is masszíroz. A vádlit ebben a programban nem nyújtja a fotel. A program különösen alkalmas lehet idősek és hátfájdalomban szenvedők számára. A masszázs intenzitása gyengéd. KIJELZŐ: 03
- NECK & SHOULDER CARE - Nyak-váll masszázs: Csökkenti az ezeken a területeken fellépő fájdalmakat, és fáradtságérzetet. A nyakat és a vállakat elsősorban gyúró és nyújtási technikákkal, valamint a felső hátat gyógymasszázzsal masszírozza, majd a Jianjing akupunktúrás pontok megnyomásával enyhítheti a nyaki meszesedés tüneteit és a nyak valamint a vállak izmainak ellazítását. A masszázs intenzitása gyengéd. Különösen alkalmas lehet irodai dolgozók és nyaki fájdalomtól szenvedők számára. KIJELZŐ: 04

Automata masszázsek

- **THAI MASSAGE** - Thai masszázs - A masszázsfotel "megfogja" a lábakat, a kezeket és vállakat a légpárnák segítségével, miközben a masszírozógörgők előrenyomják a hátat és a derekat. Ez hatékony nyújtást és gyógymasszázst eredményez., Különösen alkalmas lehet nagy stressz alatt álló emberek számára, és gerincferdüléssel élőknek. A masszázs intenzitása erős. KIJELZŐ: 05
- **CHINESE MASSAGE** - Kínai masszázs - A hagyományos kínai orvoslás masszázstechnikájával főként a hátat és a derekat masszírozza. Serkenti a hát és a derék vérkeringését, megnyugtatja a meridiánokat és oldja a hát és a derék merevségét. Különösen alkalmas lehet hát- és derékfájdalmakkal, valamint ágyéki fájdalmakkal küzdők számára. A masszázs intenzitása gyengéd. KIJELZŐ: 06
- **FATIGUE RECOVERY** - Fáradtság-csökkentő masszázs - Gyúrás, ütögetés és ujjnyomás (shiatsu) segítségével mély nyomást gyakorol a nyakra, a hátra, a derékra, a farizmokra és a lábakra - csökkenti a test fáradtságát, hogy a test jobban ellazulhasson. KIJELZŐ: 07
- **GENTLE WAVES RUB** - Lágy masszázshullám - Főként légpárnás masszázst alkalmazva serkenti a vérkeringést, enyhítheti a fájdalmat a test különböző részein, és mélyen oldja az izomfáradtságot. KIJELZŐ: 08
- **MERIDIAN TREATMENT** - Meridián kezelés - Gyúrás, ütögetés, ujjnyomás (shiatsu) és gyógy-masszázstechnikákkal dolgozik, illetve a légpárnákkal rögzíti a lábakat, kezeket és vállakat, majd nyújtómasszázsral megnyugtatja a meridiánokat. Serkenti a vérkeringést és oldja a testben lévő blokkokat. KIJELZŐ: 09
- **WAIST CARE** - Derék fókuszú masszázs: Csökkenti az ezeken a területeken fellépő fájdalmakat, és fáradtságérzetet. A derekat gyúrással, kopogtatással és ezek szinkron-masszázsával masszírozza. KIJELZŐ: 10
- **LEG&FOOT RELIEVE** - Masszázs láb-váll-derék fókusszal - Masszírozza a vállakat és a derekat elsősorban gyúrással, ütögetéssel, gyúrással és ütögetéssel, a vádlira és a lábfejre pedig kompressziós masszázst alkalmaz, ami nyugtató vádli- és lábmasszázst tesz lehetővé. KIJELZŐ: 11

Automata masszázsek

- **PRESIDENT COSY** - "Elnöki kényelem" - masszázs - Masszírozza a vállakat, a nyakat, a hátat és a derekat elsősorban gyúrással, ütögetéssel, és ezek szinkronmasszázsával. Enyhíti a fáradtságot, serkenti a vérkeringést és oldja a stresszt a mélymasszázzsal. Különösen alkalmas lehet férfiak számára. A masszázs intenzitása mérsékelt. **KIJELZŐ: 12**
- **KEEP FIT** - "Maradjon fit!" program - Megmasszírozza a vállakat, a nyakat, a derekat és a csípőt környékét gyúró és shiatsu technikákkal. Ellazítja a testet és az elmét. Fenséges testkezelés. A masszázs intenzitása gyengéd. **KIJELZŐ: 13**
- **OFFICE REGIMEN** - "Sokat ülök" program - A vállak, a nyak és a derék masszázsa gyúró, ütögető, és ezek szinkronmasszázs-technikáival. Enyhíti a váll- és nyakfájdalmat, javítja az ágyéki izmok feszülését, és karbantartja az ágyék környéki gerinc szakaszt a mélymasszázzsal. Különösen alkalmas lehet ülőmunkát végzők számára. **KIJELZŐ: 14**
- **HEALTH RECHARGE** - Vitalizáló masszázs: Mélyen masszírozza át az egész testet gyúrással, ütögetéssel és shiatsu technikákkal, hogy serkentse a vérkeringést a testben. Különösen alkalmas lehet azoknak, akik nem mozdulnak ki otthonról. A masszázs intenzitása mérsékelt-gyengéd. **KIJELZŐ: 15**
- **LUNCH BREAK** - "Ebédszünet" masszázsprogram - Masszírozza a hátát és a derekat gyúró és ütögető technikákkal, valamint megnyomkodja a Shenyu akupunktúrás pontot.- így energikusabb lehet a délutáni munkában. **KIJELZŐ: 16**
- **WARMING & DETOX** - "Melegítés és detox" program - Mélyen masszírozza át az egész testet akupunktúrás pontok gyúrással, ütögetésével, ujjnyomással és egyéb masszázstechnikákkal, hogy az inger teljesen elérje az izomszövet mély rétegeit - a fotel fűtő funkciójával a kellemes érzet és a masszázs hatékonysága fokozódik. A program szabályozza a Qi-t és a véráramlást, valamint hatékony lehet a vizesedés csökkentésére. **KIJELZŐ: 17**
- **SWEET DREAM** - "Jobb pihenés" masszázs - Masszírozza a vállakat, a nyakat, a hátat és a derekat gyúró és gyógy masszázs technikákkal. Megnyomkodja a Fengchi és Shenyu akupunktúrás pontokat az alvásminőség javítása és az alvás elősegítése érdekében. Különösen alkalmas lehet alvászavarokkal küzdők számára. A masszázs intenzitása gyengéd. **KIJELZŐ: 18**

Manuális masszázs

Nyomogassa a „**Technique**” gombot a masszázs technikák közötti váltáshoz.

Masszázstechnikák (11 különböző!) Gyúrómasszázs (kneading) 4 különféle módon, ütögető masszázs (tapping) 2 különféle módon, gyúrá-ütögetés (knead&tap) szinkronban 4 különböző módon, valamint shiatsu (ujjnyomás) masszázsmódszer. Ha a kijelző nem mutat semmit, akkor nem masszíroz.

Kijelző

Nyomogassa a gombot a technikák váltogatásához.



Gyúró masszázs 1. – A sebessége 5 szinten állítható.



Gyúró masszázs 2. – A sebessége 5 szinten állítható.



villog - Gyúró masszázs 3. – A sebessége 5 szinten állítható.



villog - Gyúró masszázs 4. – A sebessége 5 szinten állítható.



Ütögető masszázs 1. – A sebessége és a szélessége 5 szinten állítható.



Ütögető masszázs 2. – A sebessége és a szélessége 5 szinten állítható.



Gyúró és Ütögető masszázs szinkronban 1. – A sebessége 5 szinten állítható.



Gyúró és Ütögető masszázs szinkronban 2. – A sebessége 5 szinten állítható.



villog - Gyúró és Ütögető masszázs szinkronban 3. – A sebessége 5 szinten állítható.



villog - Gyúró és Ütögető masszázs szinkronban 4. – A sebessége 5 szinten állítható.



Shiatsu (ujjnyomás) masszázs . – A szélessége 5 szinten állítható.

Manuális masszázs

Speed – Masszázs sebességének beállítása

Nyomja meg a „Speed” gombot. 1-5 szinten állítható, 1 a leglassabb, 5 a leggyorsabb fokozat. Nem minden masszázs sebessége állítható! Erről egy bekezdéssel feljebb tájékozódhat.

A vezérlő kijelzőjén ez jelenik meg. (level: szint)



Width – Masszázs szélességének beállítása

Nyomja meg a „Width” gombot. 1-5 szinten állítható, 1 a legkeskenyebb, 5 a legszélesebb fokozat. Nem minden masszázs szélessége állítható! Erről két bekezdéssel feljebb tájékozódhat.

A vezérlő kijelzőjén ez jelenik meg. (level: szint)



Masszázs helyének beállítása

Nyomja meg a „Massage Area” gombot . a masszázs helyének kiválasztásához. 5 féle hely közül választhat: Pontmasszázs; Testrész-masszázs; Teljes test masszázs; Felsőtest masszázs; Alsótest-masszázs. Nyomogassa a gombot a masszázs helyének megváltoztatásához.

- Kijelző: H0 – Fix pontos masszázs – Nyomja meg a „Fel” / „Le” nyilacska gombot. a masszázs helyének megváltoztatásához.
- Kijelző: H1 – Testrész-masszázs - Nyomja meg a „Fel” / „Le” nyilacska gombot. a masszázs helyének megváltoztatásához.

Kijelző: H2 – Teljes test masszázs

Kijelző: H3 – Felsőtest masszázs

Kijelző: H4 – Alsótest masszázs

Manuális masszáz

Kompressziós nyomómasszázs légpárnákkal (Air) – masszáz helye

Nyomogassa az „Air” gombot a kompressziós masszáz helyének váltogatásához. 3 helyen tudnak masszírozni a légpárnák: Felső test; Alsó test; Teljes test.

Kijelző:

Upper Air
Massage



Felső test masszázsa

Lower Air
Massage



Alsó test masszázsa

Full Body
Air Massage




Teljes test masszázsa

Ha a kijelzőn eltűnnek a jelölések a képen látható helyekről, akkor a gomb nyomogatásával kikapcsolta a légpárnás masszázst. Nyomja meg újra a gombot a masszázis ismételt elkezdéséhez.

Kompressziós nyomómasszázs légpárnákkal (Air) – masszáz erőssége

Nyomogassa az „Intensity” gombot a kompressziós masszázis erősségének váltogatásához. 5 intenzitás választható ki: 1 a leggyengébb; 5 a legerősebb szorítás.

Kijelző (level: erősség)

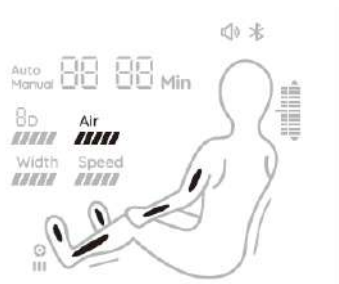

level 1



level 2



level 3



level 4




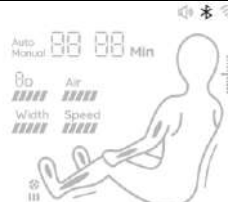


level 5

A készülék használata

Manuális masszázs

Egyéb manuális funkciók

Funkció	Gomb	Leírás	Kijelző
Hőterápia a deréknál	Heat – röviden megnyomva	Be/kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot. 3 perc a felfűtési idő.	
Alacsony teljesítményű működés	Heat – hosszan nyomva	Alacsony teljesítményű működés	
Talpmasszázs	Roller	1-3. szinten állítható a sebessége. 4. megnyomásra a funkció kikapcsol. A kis vonalak a masszázs sebességét jelzik.	
Hangerő beállítása	„Shoulder Position” fel-le nyilacska gombok hosszan nyomva	Hosszan való lenyomásukkal hangosítható / halkítható a hangerő.	
Bluetooth - zenelejátszás	Bluetooth	Bekapcsoláshoz / kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot. Párosíthatja okoseszközével a masszázsfotel, és zenét hallgathat a masszázsfotel hangszóróin keresztül.	
Hangvezérlés angol nyelven	„Mikrofon” jel a piros színű „Be/kikapcsoló” gomb mellett jobbra // karfán mikrofon jeles gomb	Hosszan nyomva bekapcsolja a funkciót. Ha be van kapcsolva a funkció, röviden nyomva és a „Hi Alice / Hey Alice” mondattal a bal hangszóró fel beszélve aktiválhatja a hangvezérlés asszisztent. Az válaszolni fog: „I’m here”. Ezután 6 mp-en belül szükséges elmondania a parancs-szavakat-mondatokat, amiket a következő oldalon olvasat. Ha 6 mp-ig nem mond semmit, újra kell aktiválnia az asszisztent.	

A készülék használata

Manuális masszázs

Hangvezérlés - parancsok






Entry: "Hi Alice" or "Hey Alice". Answer: I am here.		
No.	Voice control entry	Answer entry
01	Massage close	Answer: Ok, Massage close
02	Massage on	Answer: Ok, Massage on
03	Total Relax	Answer: Ok, Total Relax
04	Energy Boost	Answer: Ok, Energy Boost
05	Sweet Dream	Answer: Ok, Sweet Dream
06	Neck & Shoulder Care	Answer: Ok, Neck & Shoulder Care
07	Lunch Break	Answer: Ok, Lunch Break
08	Thai Massage	Answer: Ok, Thai Massage
09	Open the air pressure	Answer: Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Answer: Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Answer: Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Answer: Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Answer: Ok, Change the other mode
14	Go little down	Answer: Ok, Go little down
15	Go little up	Answer: Ok, Go little up

Note: commands 14 and 15 can only be used after command 13

A készülék használata

Manuális masszázs

Fotel dőlésszögének beállítása

Funkció	Gomb	Leírás
Felülés		A gomb folyamatos nyomására a háttámla emelkedik, a lábtartó ereszkedik. Újbóli megnyomásra a mozgás megáll. Amint eléri a megfelelő ülőszintet, engedje el a gomb nyomását, és a fotel csipogó hangja megszűnik.
Elfekvés		A gomb folyamatos nyomására a háttámla ereszkedik, a lábtartó emelkedik. Elengedésre megáll. Amint eléri megfelelő fekvőszintet, engedje el a gomb nyomását, és a fotel csipogó hangja megszűnik.
Lábtartó emelése		A gomb folyamatos nyomására a lábtartó emelkedik. Elengedésre megáll. Amint eléri megfelelő lábtartó-szintet, engedje el a gomb nyomását, és a fotel csipogó hangja megszűnik.
Lábtartó süllyesztése		A gomb folyamatos nyomására a lábtartó ereszkedik. Elengedésre megáll. Amint eléri megfelelő lábtartó-szintet, engedje el a gomb nyomását, és a fotel csipogó hangja megszűnik.
Fekvő mód 1		Fekvő mód 1 – 1x megnyomva
Fekvő mód 2		Fekvő mód 2 – 2x megnyomva




A készülék használata

A masszázs leállítása, kikapcsolás

Masszázs közben a be/kikapcsoló gomb megnyomásával (kézi vezérlő / karfa vezérlő) vagy hangvezérléssel bármikor leállíthatjuk masszázst. A fotel visszaáll eredeti pozíciójába.

Ha a masszázs a beállított időtartam elteltével fejeződik be, akkor a fotel marad aktuális pozíciójában, de a masszázsgörgők visszaállnak alappozícióba. Itt még ha szeretnénk, pihenhetünk az aktuális pozícióban. Megnyomva a be/kikapcsolás gombot, a fotel visszaáll az alappozícióba.


A főkapcsoló segítségével áramtalanítsuk a fotelt, majd húzzuk ki a dugót a konnektorból, és a tápkábelt a fotelből.

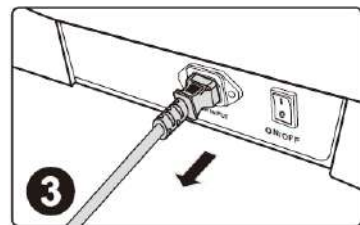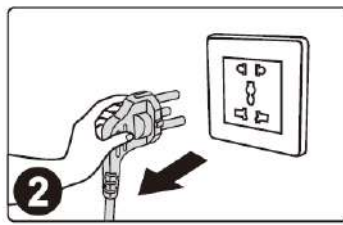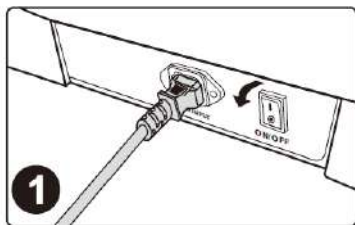

A készülék használata

A fejpárnák és a háttámla párnájának leszerelése és használata

- A háttámlán lévő párnák igénynek megfelelően lágyabbá teszik a görgők általi masszázst.
 - A háttámla párnarésze a háttámla tetején elhelyezett cipzárral kapcsolódik a fotelhez, a fejpárna pedig szintén cipzárral kapcsolódik a háttámla párnájához.
 - Ha erősebb masszázst szeretne, egyszerűen hajtsa fel, vagy cipzározza le a párnákat.

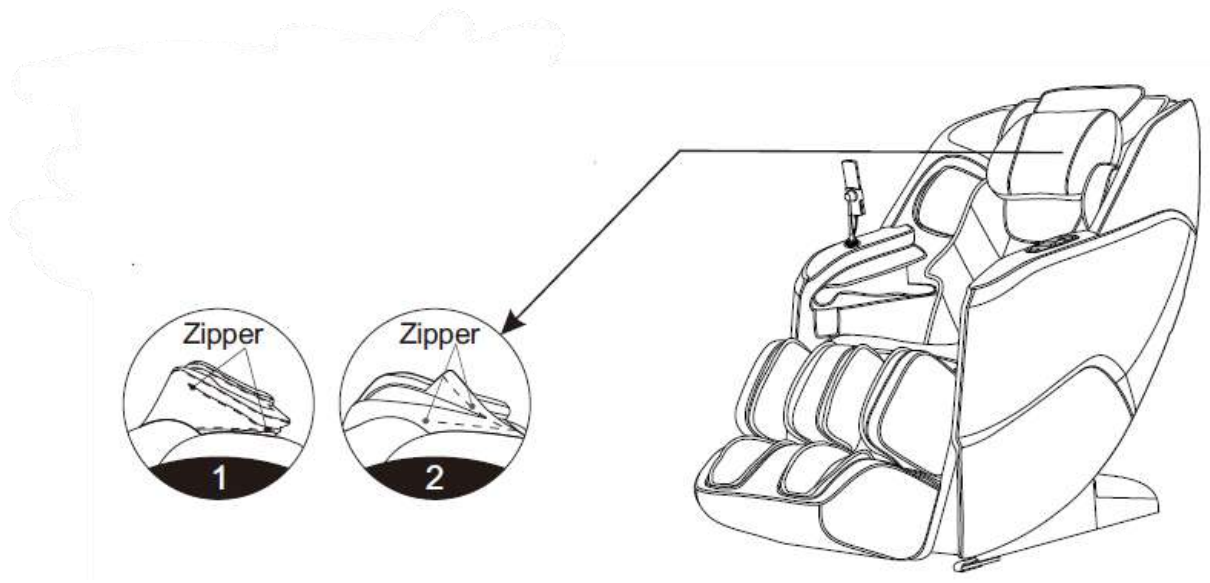


Padlóvédelem

- Ha a fotelt fapadlón, vagy kényes padlófelületen helyezük el, idővel károsíthatja azt. Javasolt szőnyeg használata.




A fotel mozgatása

- Mozgatás előtt a főkapcsoló segítségével áramtalanítsuk a fotelt, majd húzzuk ki a dugót a konnektorból, és az érintőképernyős vezérlő kábeljét is húzzuk ki, vegyük le a vezérlőt is a fotelről.
Győződjünk meg róla, hogy semmilyen elektromos vezeték, vagy egyéb akadály nincs az útban. A háttámlánál fogva a fotelt hátra döntve, majd a súlypontot a hátsó kerekekre helyezve, szépen lassan, a fotelt a kívánt helyre guríthatjuk. Finoman, óvatosan helyezzük le a kívánt helyre. A kerekek segítségével csak rövid távokra mozgassuk a masszázsfotelt. Hosszabb távolságokra használjunk más szállítóeszközt.

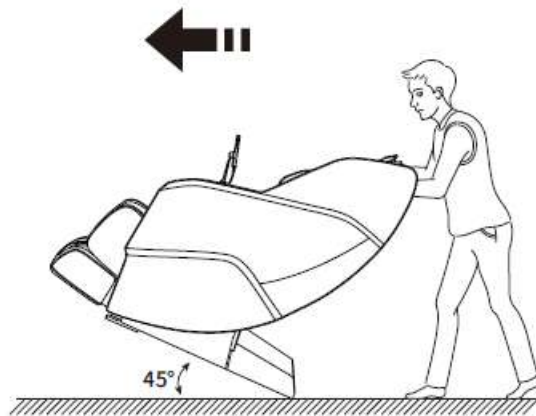


Figyelem: Ne mozgassa a masszázsfotelt kerekeivel fa- vagy kényes padlón, egyenetlen talajon vagy keskeny helyen. A masszázsfotel emeléséhez két emberre van szükség. Az emeléskor a lábtartó zárólemet és a háttámla burkolatának hornyait fogva tudjuk mozgatni a fotelt. Ne emelje közvetlenül a karfát!

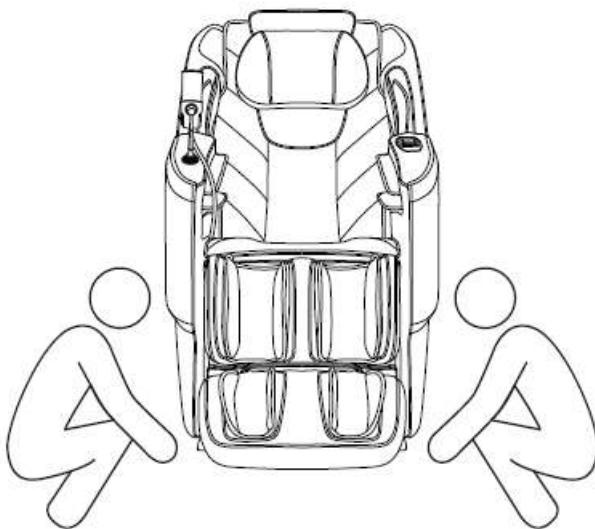

A készülék használata


Távolság a faltól

A masszázsfotel háttámláját mindig legalább 5.5 cm-re kell tartani a faltól. Ha a háttámla túl közel van a falhoz, akkor a fotel leereszkedéskor ütközni fog a fallal, ami károsítja a terméket.

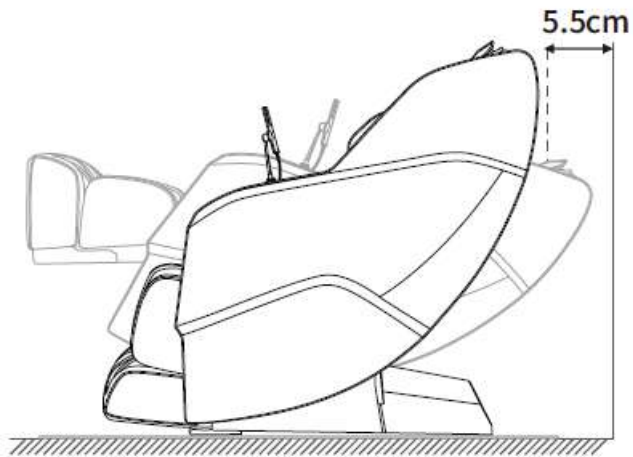

Műbőr és műanyag alkatrészek tisztítása Törölje át a bőrt egy puha, száraz ruhával.

■ Ne használjon vegyszereket, például hígítót, benzint, alkoholt stb. a készülék tisztításához. ■ Kereskedelmi forgalomban kapható bőrpoló termékek (rongyok) használata esetén kérjük, kövesse a használati utasításokat. ■ Ha a műbőr különösen szennyezett, törölje át a következő módon. ① Mártson egy puha kendőt vízbe vagy 3–5% semleges mosószert tartalmazó forró vízbe, majd csavarja ki alaposan. ② A fenti puha kendőt használja a bőr felületének áttöréséhez. ③ Törölje le a tisztítóoldatot tiszta vízzel átitatott és alaposan kicsavart ruhával. ④ Törölje át egy száraz puha ruhával. ⑤ Hagyja természetesen megszáradni. ■ Ha a foltok nehezen távolíthatók el, kérjük, mártson kereskedelmi forgalomban kapható melamin-habot semleges mosószerbe, majd törölje át vele a készüléket. ■ Ne használjon hajszárítót a felület szárításához. ■ Legyen óvatos, amikor színes textil-anyagokkal törli a gépet, mivel az anyag színe foltot hagyhat a műbőr felületén. ■ Ne tartsa ezeket az alkatrészeket hosszú ideig műanyaggal érintkezve, mert ez elszíneződést okozhat. ■ A műbőr elszíneződhet, ezért ha Ön fest(et)i a haját, kérjük, takarja le az érintett részt egy törölközővel.

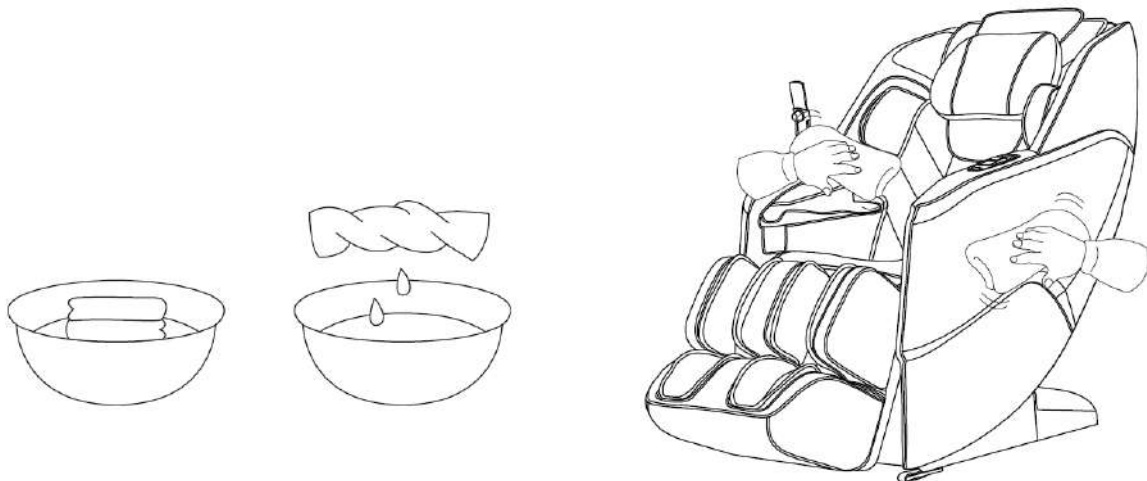

Vegye figyelembe!

-
- A masszázsfolel 20 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.
-
- Ez a termék kiváló minőségű, korrózióálló bőrből készült, amely megfelel a környezetvédelmi követelményeknek. A bőr anyagok inherens tulajdonságai miatt a súrlódás során enyhe zaj hallható, ami normális jelenség. Megjegyzés: Ha a gép működése közben szövet- vagy bőrszakadás hangját hallja, azonnal hagyja abba a használatát, és kérjen forgalmazói segítséget.
-

Ha bármilyen rendelleneset tapasztal, vagy a készülék megsérül, illetve ha a tápkábel vagy a tápcsatlakozó rendellenesen forró, vagy megsérültek, azonnal vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval!

Bármilyen kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval: Bionwell Magyarország Kft.

Műszaki adatok

Modell: SL-A2801-2

Név: Bionwell Flame 3D masszázsfotel

Merőleges feszültség: 110-120V ~ 60Hz // 220-240V~ 50Hz/60Hz

Teljesítmény: 100W

Alap masszázs-időtartam: 20 perc

Biztonsági struktúra: I. osztály