


# BIONWELL SL-A158 Brisbane MASSZÁZSFOTEL

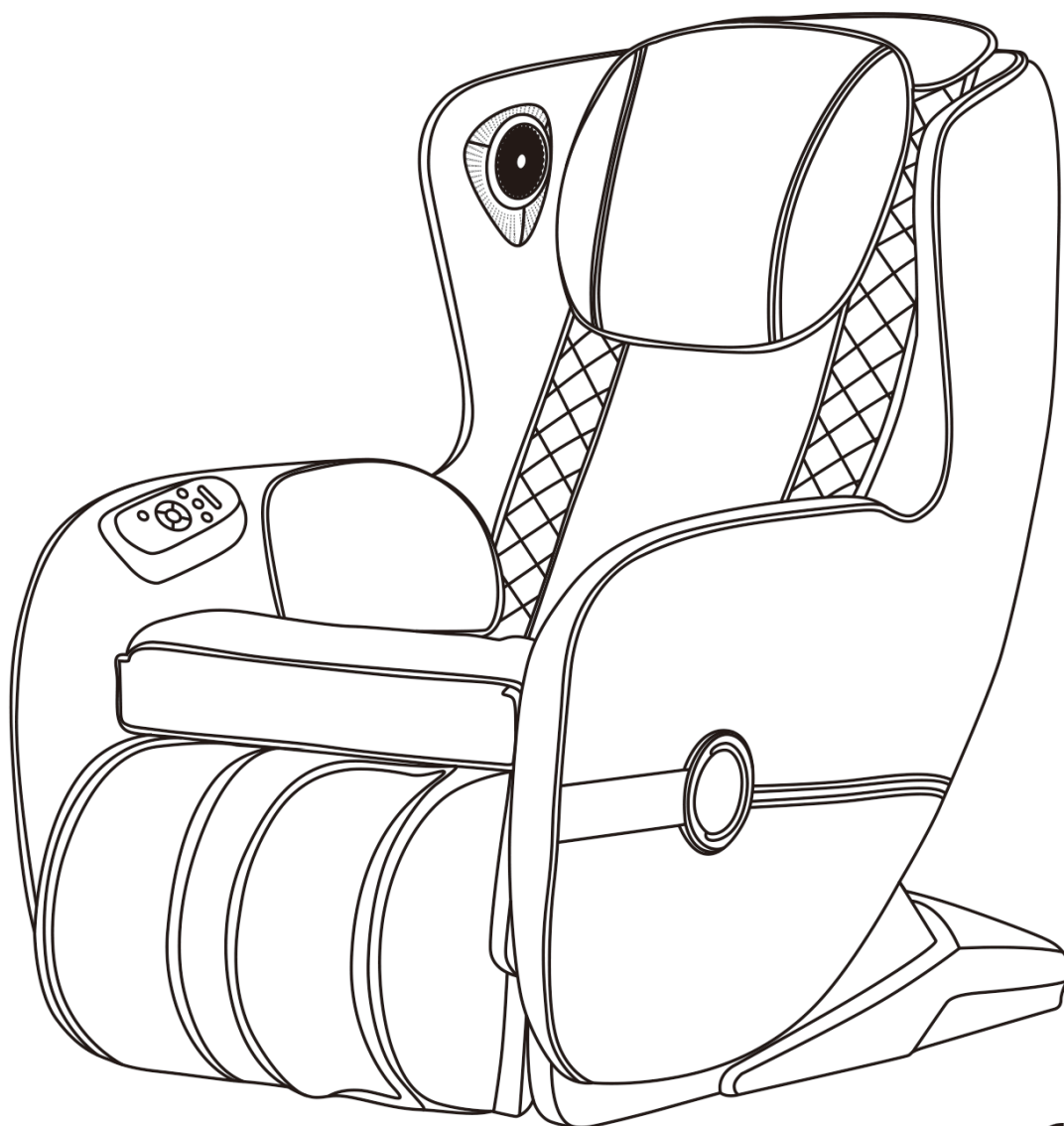

CE

[www.bionwell.hu](http://www.bionwell.hu)

*BionWell*

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Fokozott figyelemmel kövesse végig a biztonsági utasításokat, és kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbiekre is. Megjegyzés: cégünk fenntartja a jogot a fotel konstrukciójának és leírásának megváltoztatására minden további figyelmeztetés nélkül. Kérjük, hivatkozzon a fotel aktuális színére.

## Tartalom

---

Biztonság és karbantartás	3
Biztonsági figyelmeztetés	5
Alkatrészek neve és funkciója	7
Funkciók	8
A készülék használata	9
Műszaki adatok	15



### 1. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Gyerekeknek tilos a mozgó alkatrészekhez nyúlni.
- Kizárólag jól szigetelt, megfelelően földelt elektromos forráshoz csatlakoztassa.
- Használat után, és tisztítás előtt mindenképpen áramtalanítsa a készüléket, hogy elkerülje az áramütést vagy a fotel sérülését.
- A készüléket a használati útmutatónak megfelelően működtesse.
- Ne viseljen ékszereket a masszázsfotel használata közben.
- Ne használja a masszázsfotel szabadtéren.
- Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a fotel működtetése előtt.
- Minden, a leírt szabályos használati módokon kívüli működtetési mód szigorúan tilos.
- A készüléket egyhuzamban használni 20 percig ajánlott.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel, ha a bőrfelület sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel, ha más fedőréteg sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel, ha a hőszigetelő útja nem szabad.
- Ne ejtsen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- Ne aludjon el a masszázsfotel használata közben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel ittas állapotban, vagy rossz közérzet esetén.
- A fotelt azonnal kapcsolja ki, ha nem érzi jól magát.
- Kérjük, evés után legalább 1 óra teljen el, mielőtt használja a masszázsfotel.
- Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne állítsa tartósan túl erősre a masszázst.
- Ha a fotel nem a megszokott módon működik, kapcsolja ki, és áramtalanítsa, majd keresse fel forgalmazóját. Szakember jelenléte nélkül a fotelt ne szerelje szét!
- Amennyiben haja, fejbőre bármilyen kezelés alatt áll, kérjük, tegyen törölközőt feje alá a felületek megóvásának érdekében. Nedves testtel, nedves hajjal a fotelbe ülni szigorúan tilos és életveszélyes, ne tegyen ilyet!
- 16 éven aluliaknak nem ajánlott használni a masszázsfotel.
- 130 kg feletti felhasználók esetében a fotel meghibásodására nem tudunk garanciát vállalni.
- Ügyeljen arra, hogy a konnektor, amelyhez csatlakoztatja a készüléket, ne legyen meglazulva.

### 2. Környezet

- Kérjük, ne használja a masszázsfotel magas hőmérsékletű, ill. nyirkos helyiségben, pl. fürdőszobában.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel olyan helyen, ahol hirtelen hőmérsékletingadozás lehetséges.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel túlzottan poros környezetben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel túl kicsi helyiségben, vagy olyan helyen, ahol nincs megfelelő szellőzés.

### 3. Akik nem használhatják a masszázsfotel

- Csontritkulásban szenvedők
- Szívbetegségben szenvedők, vagy olyanok, akik elektronikus egészségügyi eszköz (pl. pacemaker) használatára szorulnak
- Lázas betegek
- Terhes, vagy menzesz periódusban lévő nők
- Balesetet szenvedett, vagy bőrbetegségben szenvedő személyek
- Szellemileg labilis állapotban lévő személyek – csak felügyelettel használhatják
- Orvosuk által pihenésre intett, vagy magukat rosszul érző személyek

## Biztonság és karbantartás

---

- Nedves testű személyek
- Hőérzékeny személyek
- Akiknek rosszindulatú daganata van
- A készüléknek fűtött felülete van, így aki a hőre érzéketlen, fokozott óvatossággal használja a masszázsfotelt.
- Súlyos gerincbetegségben szenvedők kérjék ki kezelőorvosuk véleményét.

### 4. Biztonság

- Ellenőrizze a feszültséget, hogy megfelel-e a készülék előírásainak.
- Nedves kézzel ne húzza ki a tápvezetékét.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, az áramütést, ill. a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.
- Ne sértse fel a vezetékeket, és ne változtasson az áramkörön.
- Ne használjon nedves törülköződőt az elektromos részek, pl. főkapcsoló, vagy tápvezeték megtisztítására.
- Esetleges áramszünet ideje alatt maradjon távol a készüléktől a baleset elkerülése érdekében, ha az áram hirtelen visszajönne.
- Rendellenes működés esetén azonnal állítsa le a készüléket, és konzultáljon a kereskedővel/közvetítővel.
- Rosszullét esetén állítsa le a készüléket, és keresse fel orvosát.
- Nem ajánlott a készülék használata olyan személyeknek (beleértve a gyerekeket), akik fizikailag, szellemileg, vagy érzékelés szempontjából korlátozottak, kivéve, ha az ő egészségükért felelős személy jóváhagyta nekik a fotel használatát.
- Ha a tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a forgalmazó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.
- Gyermek csak szülői / felnőtt felügyelettel tartózkodhatnak a masszázsfotel közelében.

### 5. Karbantartás

- A készüléken csak szakember végezhet karbantartást, a felhasználónak tilos a fotel szétszerelése és önálló karbantartása.
- Kérjük, mindig áramtalanítsa a fotelt használat után.
- Ne használja a készüléket, ha meglazult a konnector.
- Ha a készülék hosszú ideig használaton kívül van, tekerje fel a vezetékét, a fotelt pedig száraz és pormentes helyiségben tárolja.
- Ne hagyja a készüléket magas hőmérsékletű helyiségben, vagy tűz mellett, és ne tegye ki tartósan közvetlen napsugárzásnak.
- Ha a lecsavarható vezeték / tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.
- A készüléket mindig száraz ruhával tisztítsa meg. Ne használjon hígítót, benzint, vagy alkoholt.
- A készülék mechanikus alkatrészei speciálisan lettek megtervezve és legyártva, nem igényel különleges karbantartást.
- Ne használjon éles tárgyat a fotelt mozgatására.
- Ne húzza, vagy gurítsa a fotelt egyetlen talajon. Ilyenkor mindenképpen emeléssel mozgassa.
- Szakaszosan használja a készüléket; túl sokat egy huzamban ne működtesse.

### 6. Általános üzemzavarok orvoslása

- Használat közben a motor hangja teljesen természetes.


## Biztonság és karbantartás


---


- Ha az irányító nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a tápvezeték megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz, valamint győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- Ha egy masszázsprogram beállított működési ideje lejár, a készülék automatikusan megáll. Ha a fotel túl sokáig van egyhuzamban működésben, a hőmérséklet-érzékelő berendezés automatikusan leállítja azt. Ilyenkor kérjük, várjon legalább fél órát, és csak utána használja újra a készüléket.


## Biztonsági figyelmeztetés

---

 Amikor a lábtartó emelkedik, vagy felemelt állapotban van, nem szabad ránehezedni, vagy lefelé nyomni, hogy elkerüljük annak sérülését, vagy a személyi sérülést.

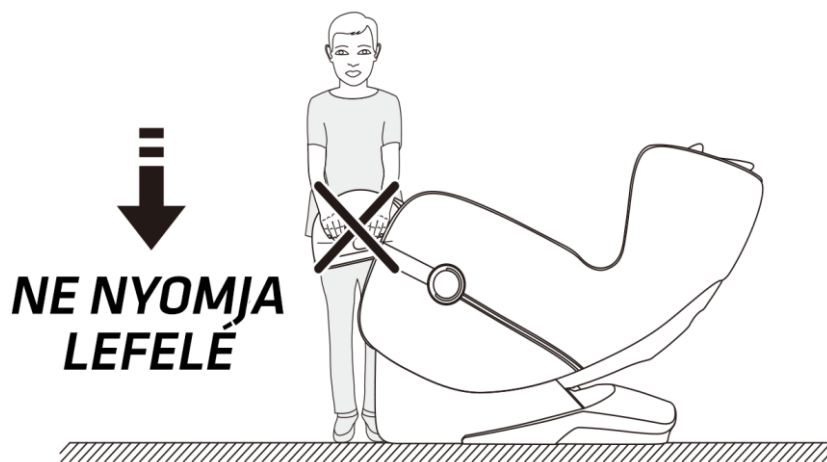


 Mielőtt beleülne a masszázsfootelbe, győződjön meg róla, hogy a masszázskezek a háttámla párnái mögött helyezkednek el, hogy elkerülje a diszkomfort-érzetet és a masszázskezek sérülését.

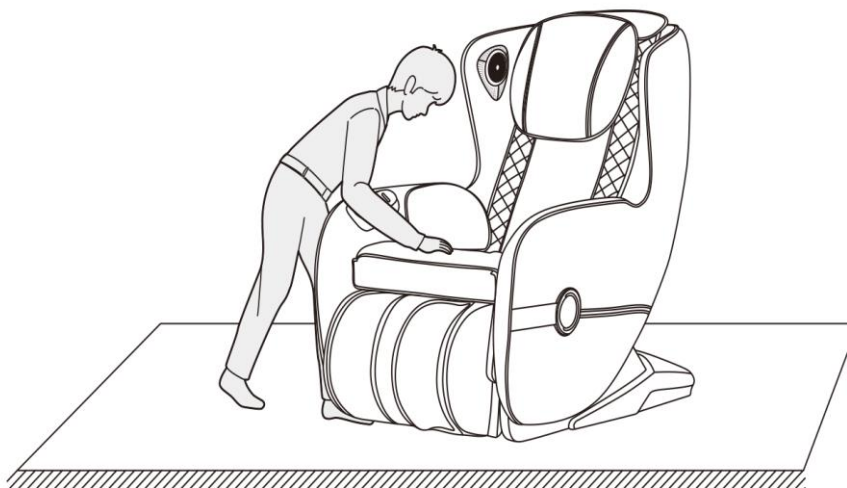


## Biztonsági figyelmeztetés

---

⚠ Működés közben ne húzza ki (és ügyeljen rá, hogy gyermekei vagy unokái se tegyék) a masszázsfotelből a csatlakozót, hogy megelőzze az elektromos áramütést vagy a masszázsfotel sérülését. Használat után húzza ki a vezérlő csatlakozóját és a tápkábelt, rakja is el őket, ez a legbiztonságosabb megoldás.

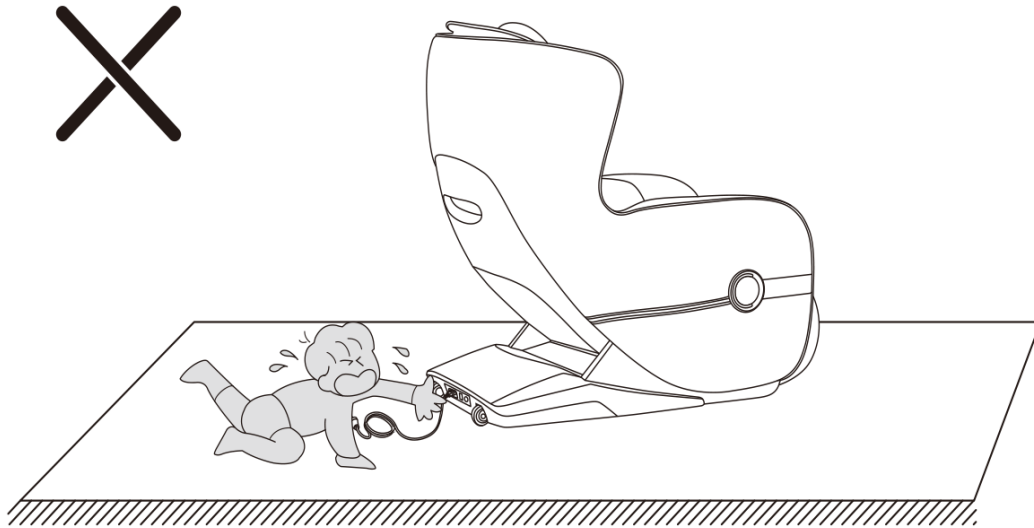


⚠ Mielőtt elindítaná, működésbe hozná a fotelt, győződjön meg róla, hogy a lábtartó alatt, illetve a háttámla alatt és mögött nem tartózkodik senki és semmi. A zero gravity pozícióban ugyanis a fotel hátra dől, lejjebb ereszkedik, ami személyi sérülést okozhat annak, aki az előbb említett helyeken tartózkodik, ha tárgyról van szó, megsértheti azt, valamint a masszázsfotelt is.

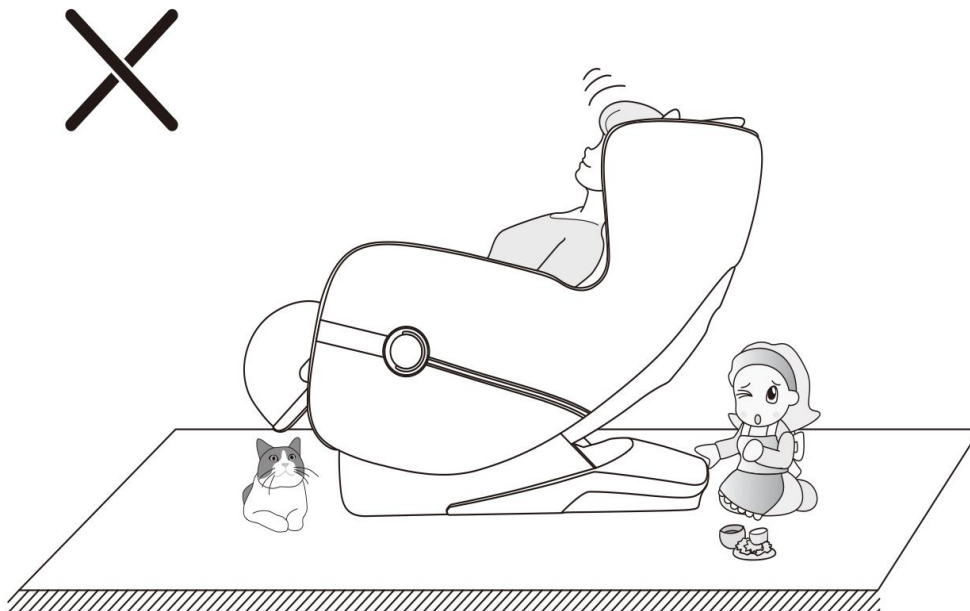


## Biztonsági figyelmeztetés

⚠ A masszázsfotel nem túl nehéz, ennek ellenére szigorúan tilos gyerekek mozgatni, elkerülve a termék károsodását vagy személyi sérülést

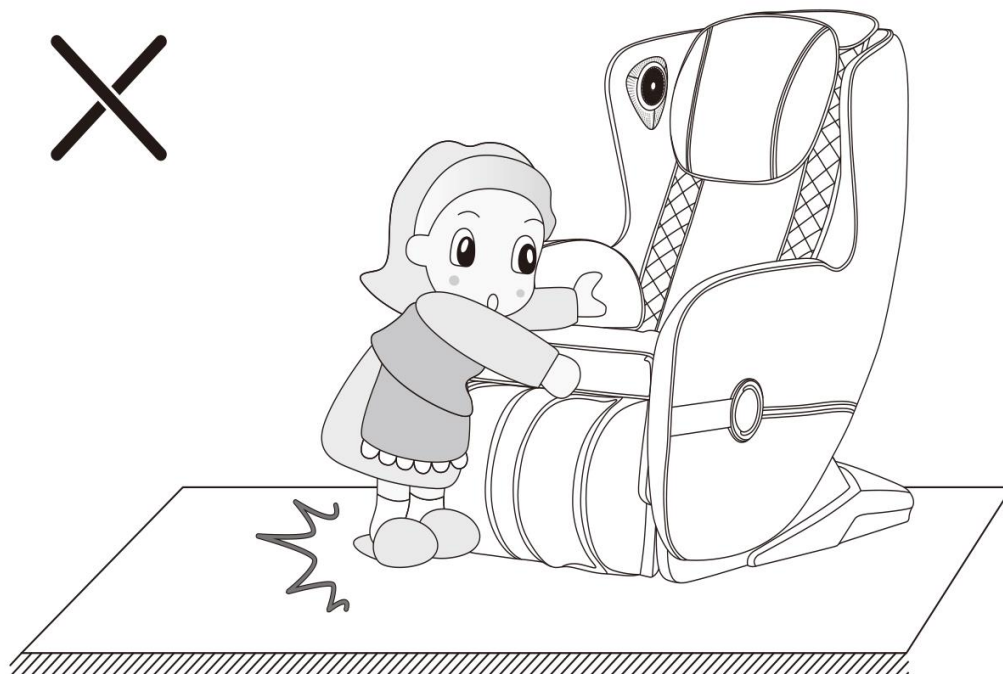


## Alkatrészek neve és funkciója

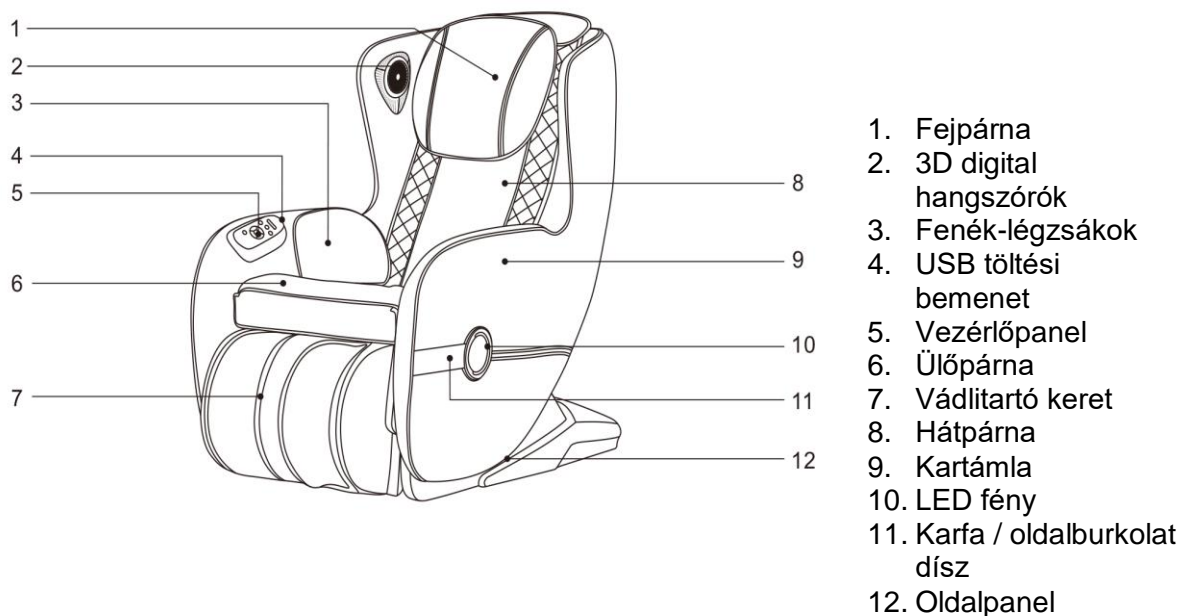

## Alkatrészek neve és funkciója

---

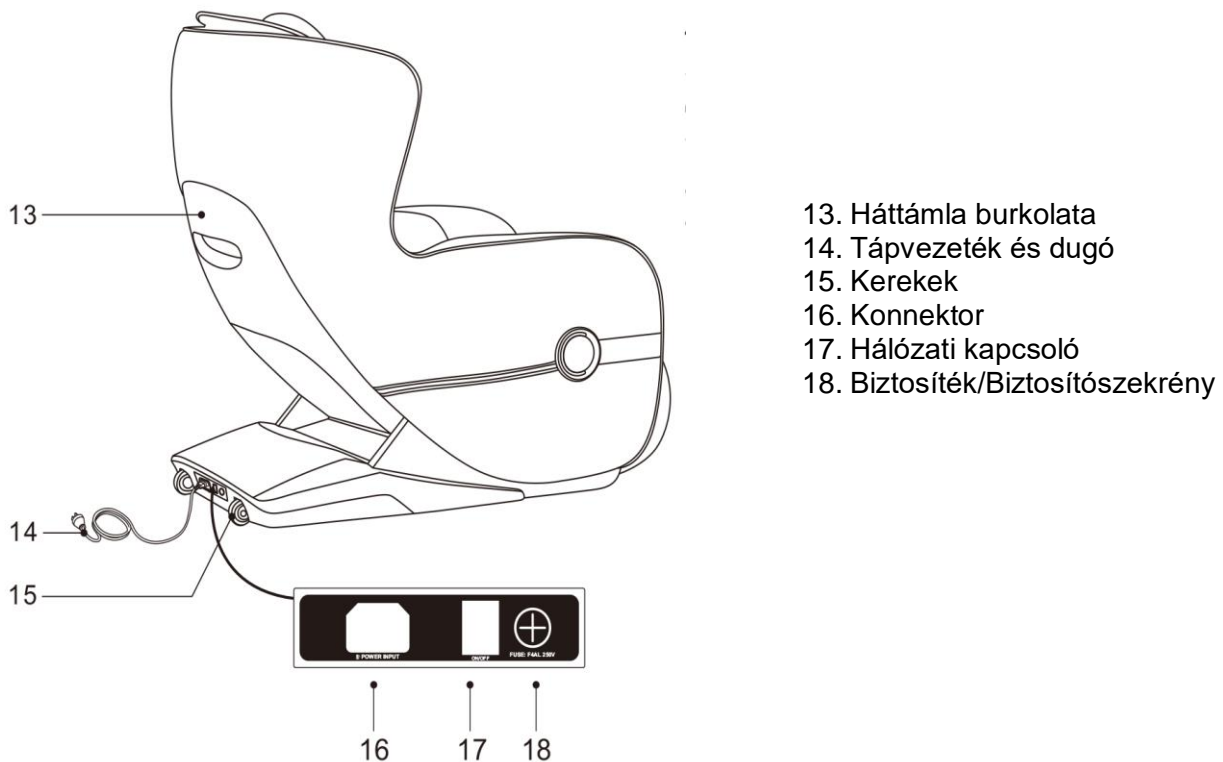

## Funkciók

---


Lásd részletesen: <https://bionwell.hu/masszazsfotelek/sl-a-158-brisbane-masszazsfotel>

- Vertikálisan mozgó, négy kerék meghajtású, csendes, intelligens masszázsképezek masszírozzák Önt, utánozva az emberi érintést, így biztosítva egy tökéletes masszázst otthonában.
- Ötféle masszázstechnikával masszíroznak: Gyúrás/dagasztás (kneading), shiatsu, kopogás (knocking), érintés (tapping), érintés & gyúrás (kneading&tapping).
- Háromféle automata masszázs funkció: Hát- és deréknyújtás, nyak és vállmasszázs és teljes testmasszázs.
- Manuális masszázs: Teljes testes, felsőtest, alsótest, részterületen és rögzített ponton, mind az 5 db masszázstechnikával masszíroznak, 3 gyorsasági szinten: lassú, közepes, gyors. A rögzített ponton és a részterületen történő masszázs során a masszázsképezek fel-le állíthatók. A shiatsu és az érintés (tapping) masszázsok alkalmával a masszázsgörgők szélessége három szinten állítható: széles, közepes és keskeny.
- Légnyomós masszázs három üzemmódban: Lábak légnyomós masszázs, mely 2 intenzitással állítható be.
- Kék színű LED világítás a kartámasz oldalán
- A vezérlő hátoldalán egy USB mobiltelefon töltő található
- Masszázs idő-jelzés
- Zenelejátszó rendszer: beépített 3D digital hangszóró a bal és jobb karfában

- Bluetooth: okoseszközével csatlakozhat a masszázsfotelhez, és hallgathatja saját zenéit
- A lábtartó 180°-os forgatásával Ön személyre szabott lábmasszázst kaphat.
- A fotel 2D masszázsmechanizmussal lett megtervezve, amely lehetővé teszi a görgők intenzitásának és erősségének beállítását. SL típusú sín a háttámlában - illeszkedik a test görbéihez, és a nyaktól a combig masszíroz, csökkentve a nyak, a váll, a derék és a csípő fájdalmát.
- Zero gravity funkció: Amikor a masszázsfotel fekvő van, akkor tapasztalhatja meg a zero gravity pozíciót. A Zero Gravity pozíció pozitív hatást gyakorol a hát egészségére. A Zero Gravity funkció azt jelenti, hogy a masszázsfotel fekvő helyzetbe állítható és a comb valamint a vádli magasabban helyezkedik el, mint a szív. Az egyes testrészek gravitációja egyenletesen oszlik el a masszázsfotelen, hogy teljes mértékben felszabadítsa a testre, és a gerincre gyakorolt nyomást. Olyan súlytalansági állapotot kínál Önnek, amely segíti a tökéletes kikapcsolódást.
- A masszázsfotel kikapcsolása után a masszázskézek visszaállnak eredeti pozíciójukba.
- Az SL típusú háttámla pálya illeszkedik az emberi test görbéjéhez, fekvő állapotban elérheti a zero gravity állapotot.

## A készülék használata

---

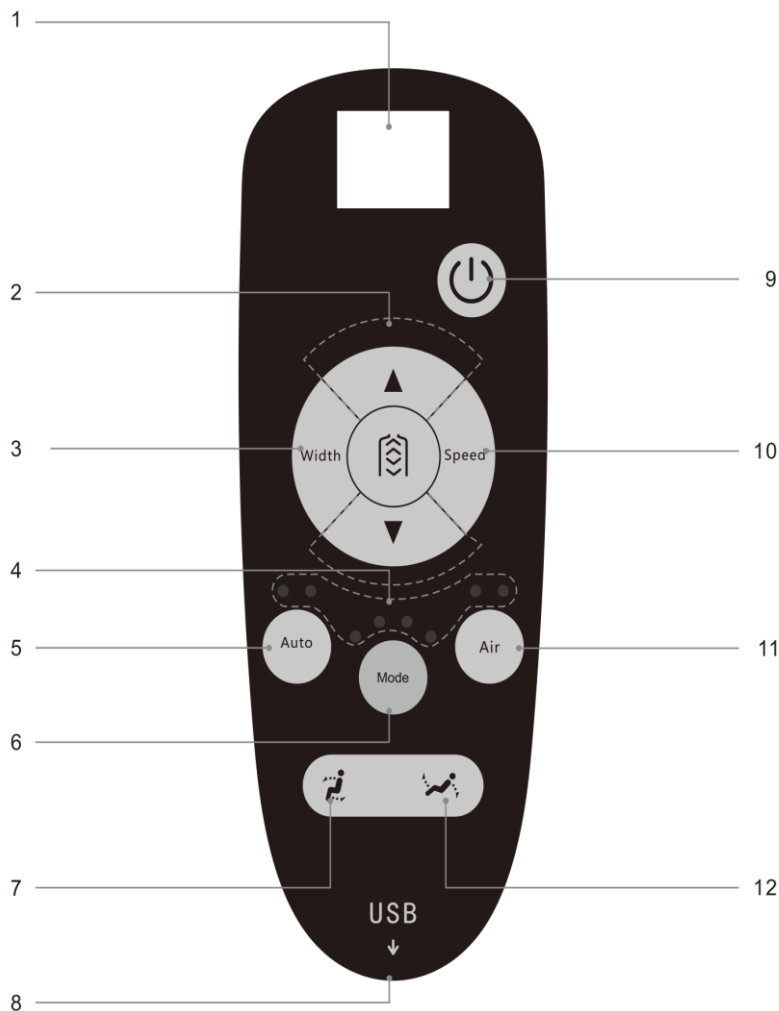

## A készülék használata

---

### Gombok


1. LED kijelző – jelzi a masszázsmódokat és a masszázsidőt.
2. Masszázs hatótávolság beállítása
3. Masszázs szélességének beállítása
4. LED világítások a masszázsfunkciók jelzésére
5. Automata masszázssok be/kikapcsolása
6. Manuális (kézi) masszázssok
7. Emelés gomb – Háttámla emelkedése és lábtartó lejjebb eresztése
8. USB bemenet
9. Be/Kikapcsolás
10. Masszázs sebességének beállítása
11. Automatikus légmasszázs be/kikapcsolása
12. Dőlés gomb - Háttámla leengedése és lábtartó emelése

## A készülék használata

---




1. **Csatlakoztassuk a fotelt egy megfelelően földelt konnektorba, helyezzük áram alá.**
2. **A masszázs indítása**
  - Nyomja meg a be/kikapcsolás gombot a masszázs indításához, a masszázsfotel ezután automatikusan beáll a pozícióba.
  - Amikor kijelző „HH”-t mutat, és csipogást hall, a fel és le gombokkal állíthatja be a váll helyzetét. Ennek beállítása nélkül, 5 mp után a masszázs automatikusan elindul.
  - Az alapbeállítás az 1. számú automata masszázs légmasszázzsal, de más masszázsmódokat is választhat.

### A, Automata masszázssok

Gomb	Leírás	Kijelző
	Teljes testmasszázs: csökkenti a fáradtságot és a fájdalmat	A1
	Nyak- és vállmasszázs	A2
	Hát- és derékmasszázs	A3



## A készülék használata

### B, Manuális masszázsk


Gomb	Leírás	Kijelző
	Gyúrás (a masszázs sebessége beállítható)	● ○ ○ ○
	Érintés (a masszázs sebessége és szélessége beállítható)	○ ● ○ ○
	Gyúrás & Érintés (a masszázs sebessége beállítható)	○ ○ ● ○
	Kopogás (a masszázs sebessége és szélessége beállítható)	○ ○ ○ ●
	Shiatsu (a masszázs sebessége és szélessége beállítható)	● ○ ○ ○
	Érintés (a masszázs sebessége és szélessége beállítható)	○ ● ○ ○
	3 szélesség beállítása lehetséges	D1, D2, D3
	3 sebességi fokozat beállítása lehetséges	P1, P2, P3

## A készülék használata



### C, Masszázsterület beállítása

Gomb	Leírás	Kijelző
	Pontra ható masszázs fix pozícióban	H0
	Részleges masszázs egy adott kisebb területen	H1
	Teljes felsőtest masszázs	H2
	Alsótest masszázs	H3
	Teljes testmasszázs	H4
	Masszázsgörgők pozíciójának állítása fel-le (részleges, és pontra ható masszázsmódban használható)	

### D, Légnyomásos masszázs

Gomb	Leírás
	gyenge, közepes, erős

### E, A háttámla és a lábtartó pozíciójának beállítása

Funkció	Gomb	Leírás
Felülés		A gomb folyamatos nyomására a háttámla lassan emelkedik, a lábtartó ereszkedik. Elengedésre megáll. Amint eléri az ülőszintet, megáll az emelkedés.
Elfekvés		A gomb folyamatos nyomására a háttámla ereszkedik, a lábtartó emelkedik, lassan. Elengedésre megáll. Amint eléri a fekvőszintet, megáll az ereszkedés.

### 3. Bluetooth zenelejátszó rendszer

1. Lépjen be a főmenübe, nyissa meg a „Settings” (Beállítások) menüpontot – Válassza ki a „Bluetooth” opciót – „Bluetooth” megnyitása – a Bluetooth automatikusan keresi, felismeri az új Bluetooth eszközöket.

2. Az okostelefonjával vagy más okoseszközzel keresse meg a masszázsfotelt a Bluetooth keresőjében, majd csatlakozzon rá.



3. Nyissa meg okostelefonja vagy más okoseszköze zenelejátszóját, és válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

### 4. A masszázs leállítása, kikapcsolás

- Masszázs közben a piros be/kikapcsoló gomb megnyomásával bármikor leállíthatjuk a készüléket. A fotel és a masszázskézek visszaállnak alapozíciójukba. Ha a masszázs a beállított időtartam (alapbeállítás 20 perc) elteltével fejeződik be, a masszázskézek alapozícióba állnak vissza, a fotel. Ezután fog kikapcsolni a fotel.
- A főkapcsoló segítségével áramtalanítsuk a fotelt, majd húzzuk ki a dugót a konnektorból.


### 5. A vádlitartó mozgatása

Az első ábra szerint (Figure 1) hajtsa le vízszintesig (forgatni nem szabad), majd húzzuk előre 5 cm-re, ezután tudjuk teljesen lefelé fordítani (Figure 2).

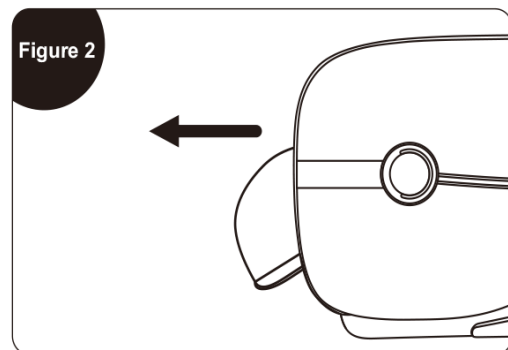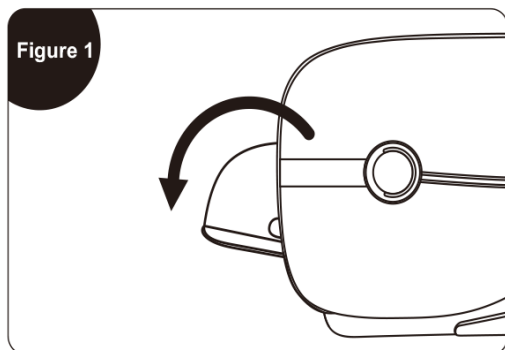


## 6. Padlóvédelem

- Ha a fotelt fapadlón helyezzük el, idővel károsítani fogja azt. Javasolt szőnyeg használata.

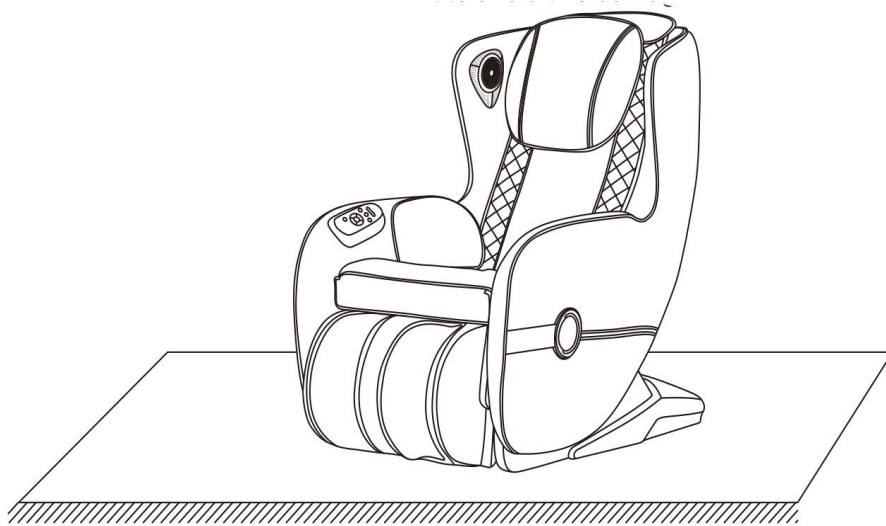

## 7. A fotel mozgatása

- Győződjünk meg róla, hogy semmilyen elektromos vezeték, vagy egyéb akadály nincs az útban, és a fotel sincs áram alatt (ellenőrizzük le, mielőtt elkezdenénk mozgatni a fotelt). A háttámlánál fogva a fotelt hátradöntve, majd a súlypontot a hátsó kerekre helyezve, szépen lassan, a fotelt a kívánt helyre guríthatjuk, majd egy lassú, finom mozdulattal helyezzük le a földre.
- Megjegyzés: Mozgatás előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget, majd húzza ki a tápkábelt és a vezérlőkábelt.
- Figyelem: Ne mozgassa a masszázsfotelt kerekeivel fa padlón, egyenetlen talajon vagy keskeny helyen. A masszázsfotel emeléséhez két emberre van szükség. Az egyik a háttámla kereténél fogja a fotelt, a másik a lábtartó kereténél. Kérjük, ne emelje közvetlenül a karfát, mert nem bírja el a fotel súlyát, így a fotel emelés közben leeshet, ami megsértheti minde a fotelt, mind a személyeket, akik emelik, vagy a környezetében vannak.

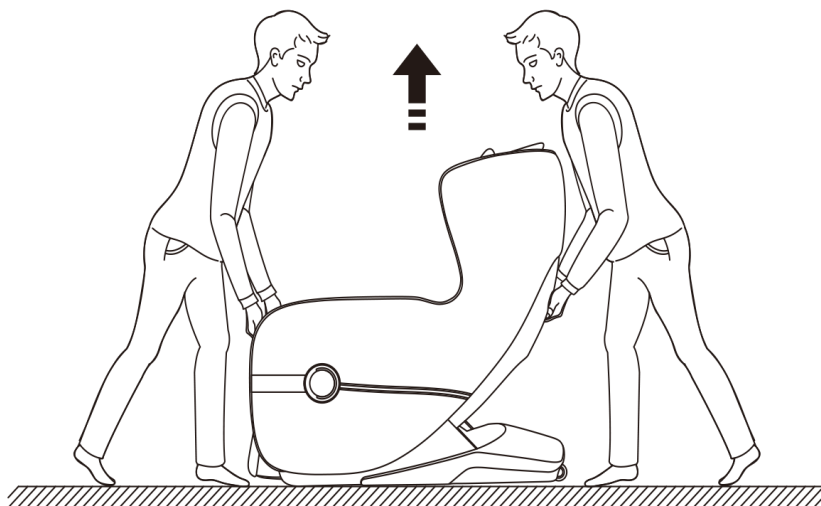

13

## Műszaki adatok

---

Modell: SL-A158

Név: Brisbane masszázsfotel

Merőleges feszültség: 110-120V~ 60Hz  
220-240V~ 50Hz/60Hz

Teljesítmény: 60W

Alap masszázsidő-tartam: 20 perc

Biztonsági struktúra: I. osztály

Felhasznált anyagok: PVC, PA, acél és elektronikus alkatrészek

ANYAG	PU	BŐR	TEXTIL	FA
-------	----	-----	--------	----