


BIONWELL SL-A90 L.A. MASSZÁZSFOTEL

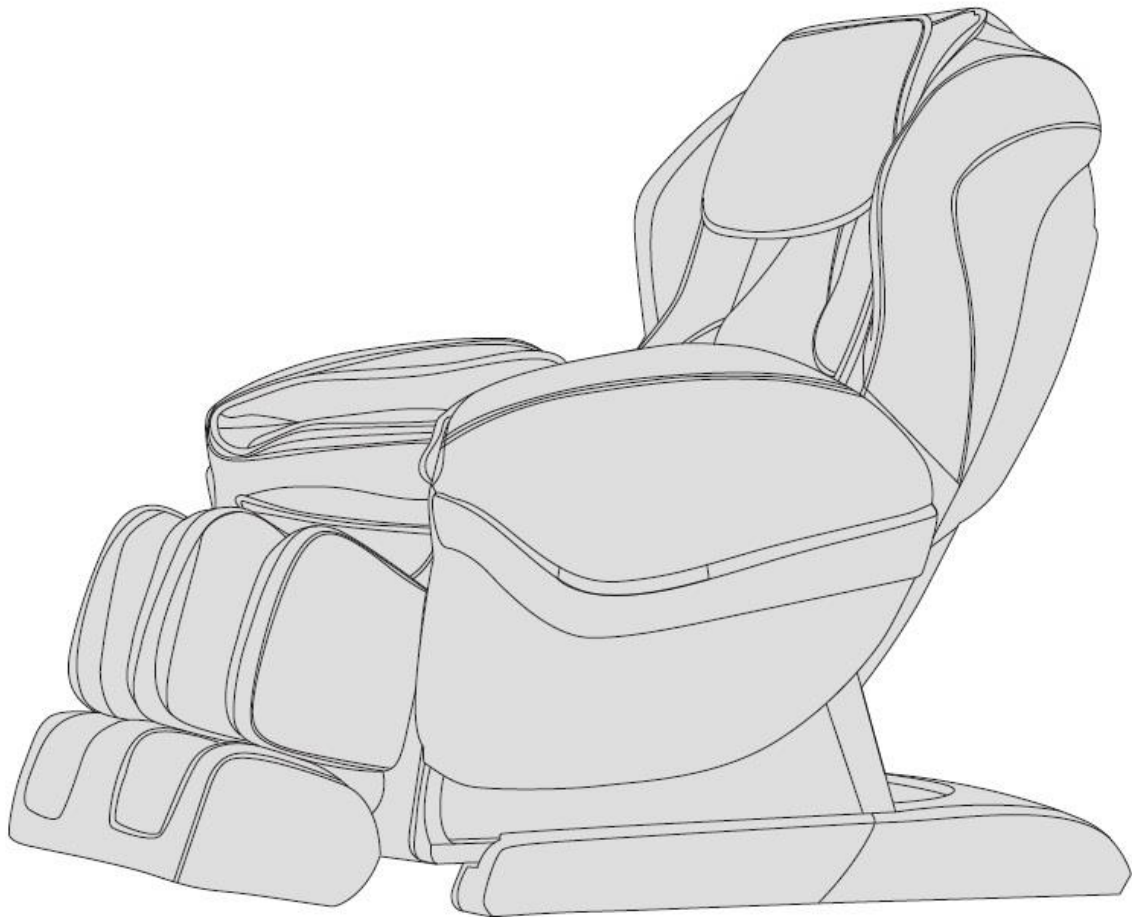

www.bionwell.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Fokozott figyelemmel kövesse végig a biztonsági utasításokat, és kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbiekre is. Megjegyzés: cégünk fenntartja a jogot a fotel konstrukciójának és leírásának megváltoztatására minden további figyelmeztetés nélkül. Kérjük, hivatkozzon a fotel aktuális színére.

Tartalom

Biztonság és karbantartás	2
Alkatrészek neve és funkciója	4
Funkciók	5
A készülék használata	6
Műszaki adatok	12

1. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



- Gyerekeknek tilos a mozgó alkatrészekhez nyúlni.
- A fotelt azonnal kapcsolja ki, ha nem érzi jól magát.
- Ha a fotel nem a megszokott módon működik, kapcsolja ki, és áramtalanítsa, majd keresse fel forgalmazóját. Szakember jelenléte nélkül a fotelt ne szerelje szét!
- Amennyiben haja, fejbőre bármilyen kezelés alatt áll, vagy mielőtt beülne a fotelbe, haja esetleg nedves, kérjük, tegyen törölközőt feje alá a felületek megóvásának érdekében.
- 16 éven aluliaknak nem ajánlott használni a masszázsfotelt.
- 130 kg feletti felhasználók esetében a fotel meghibásodására nem tudunk garanciát vállalni.
- Ügyeljen arra, hogy a konnektor, amelyhez csatlakoztatja a készüléket, ne legyen meglazulva.
- Használat után, és tisztítás előtt mindenképpen áramtalanítsa a készüléket.
- A készüléket egyhuzamban használni 20 percig ajánlott.
- A készüléket a használati útmutatónak megfelelően működtesse.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a bőrfelület sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha más fedőréteg sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt szabadban.
- Ne ejtsen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- Ne aludjon el a masszázsfotel használata közben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt ittas állapotban, vagy rossz közérzet esetén.
- Kérjük, evés után minimum 1 óra elteltével használja a masszázsfotelt.
- Kérjük, sérülés elkerülése érdekében ne állítsa tartósan túl erősre a masszázst.

2. Környezet

- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt magas hőmérsékletű, ill. nyirkos helyiségben, pl. fürdőszobában.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt olyan helyen, ahol hirtelen hőmérsékletingadozás lehetséges.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túlzottan poros környezetben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túl kicsi helyiségben, vagy olyan helyen, ahol nincs megfelelő szellőzés.

3. Akik nem használhatják a masszázsfotelt

- Csontritkulásban szenvedők
- Szívbetegségben szenvedők, vagy olyanok, akik elektronikus egészségügyi eszköz (pl. pacemaker) használatára szorulnak
- Lázas betegek
- Terhes, vagy menzesz periódusban lévő nők
- Balesetet szenvedett, vagy bőrbetegségben szenvedő személyek
- 14 év alatti gyerekek, ill. szellemileg labilis állapotban lévő személyek
- Orvosuk által pihenésre intett, vagy magukat rosszul érző személyek
- Nedves testű személyek
- Hőérzékeny személyek
- Akiknek gerincében ferdeülés, vagy bármiféle rendellenesség található
- Akiknek rosszindulatú daganata van

4. Biztonság

- Ellenőrizze a feszültséget, hogy megfelel-e a készülék előírásainak.
- Nedves kézzel ne húzza ki a tápvezetékét.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, az áramütést, ill. a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.
- Ne sértse fel a vezetékeket, és ne változtasson az áramkörön.
- Ne használjon nedves törülköndőt az elektromos részek, pl. főkapcsoló, vagy tápvezeték megtisztítására.
- Esetleges áramszünet ideje alatt maradjon távol a készüléktől a baleset elkerülése érdekében, ha az áram hirtelen visszajönne.
- Rendellenes működés esetén azonnal állítsa le a készüléket, és konzultáljon a kereskedővel/közvetítővel.
- Rosszullét esetén állítsa le a készüléket, és keresse fel orvosát.
- Nem ajánlott a készülék használata olyan személyeknek (beleértve a gyerekeket), akik fizikailag, szellemileg, vagy érzékelés szempontjából korlátozottak, kivéve, ha az ő egészségükért felelős személy jóváhagyta nekik a fotel használatát.
- Ha gyerekek használják a fotelt, erősen ajánlott a szülői, ill. felnőtt felügyelet.
- Ha a tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.


5. Karbantartás

- A készüléken csak szakember végezhet karbantartást, a felhasználónak tilos a fotel szétszerelése és önálló karbantartása.
- Kérjük, mindig áramtalanítsa a fotelt használat után.
- Ne használja a készüléket, ha meglazult a konnektor.
- Ha a készülék hosszú ideig használaton kívül van, tekerje fel a vezetékét, a fotelt pedig száraz és pormentes helyiségben tárolja.
- Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig magas hőmérsékletű helyiségben, tűz mellett, és ne tegye ki tartósan közvetlen napsugárzásnak.
- Ha a lecsavarható vezeték / tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.
- A készüléket mindig száraz ruhával tisztítsa meg. Ne használjon hígítót, benzint, vagy alkoholt.
- A készülék mechanikus alkatrészei speciálisan lettek megtervezve és legyártva, nem igényel különleges karbantartást.
- Ne használjon éles tárgyat a fotel mozgatására.
- Ne húzza, vagy gurítsa a fotelt egyenetlen talajon. Ilyenkor mindenképpen emeléssel mozgassa.
- Szakaszosan használja a készüléket; túl sokat egy huzamban ne működtesse.


6. Általános üzemzavarok orvoslása

- Használat közben a motor hangja teljesen természetes.
- Ha az irányító nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a tápvezeték megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz, valamint győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- Ha egy masszázsprogram beállított működési ideje lejár, a készülék automatikusan megáll. Ha a fotel túl sokáig van egyhuzamban működésben, a hőmérséklet-érzékelő berendezés automatikusan leállítja azt. Ilyenkor kérjük, várjon fél órát, és csak utána használja újra a készüléket.

Alkatrészek neve és funkciója

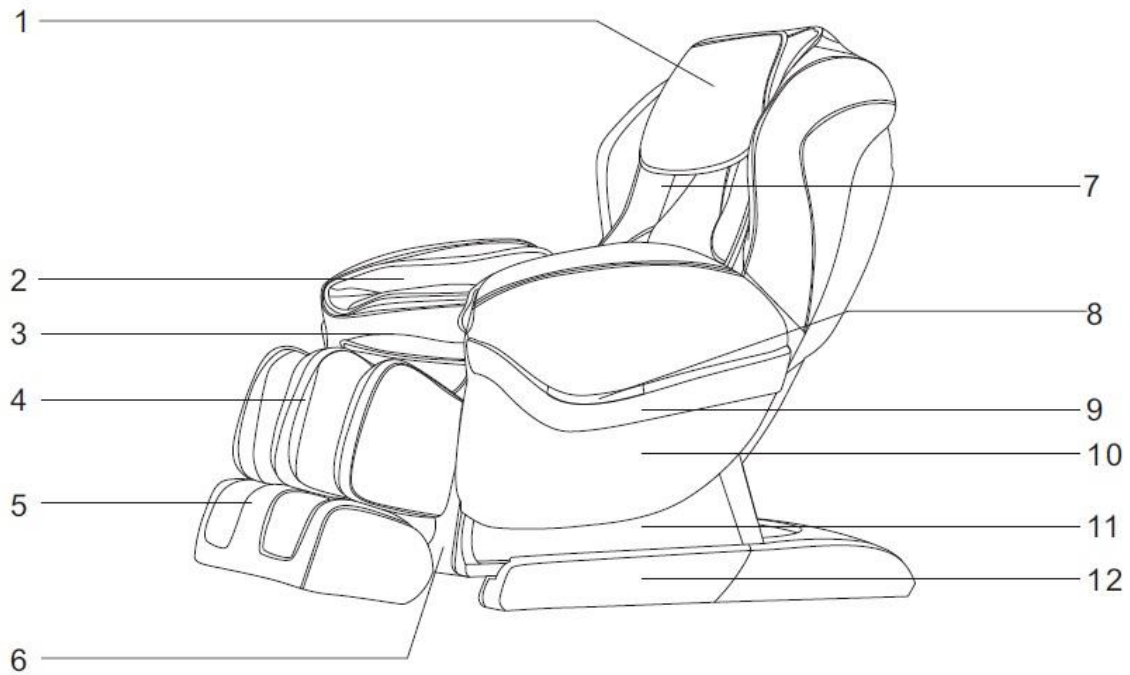

1. Fejpárna
2. Kari légzsákok
3. Ülőpárna
4. Vádli légzsákok
5. Láb légzsákok
6. Elülső burkolat
7. Hátpárna
8. LED lámpa
9. Díszcsík
10. Oldalpanel
11. Oldalsó burkolat
12. Alsó burkolat

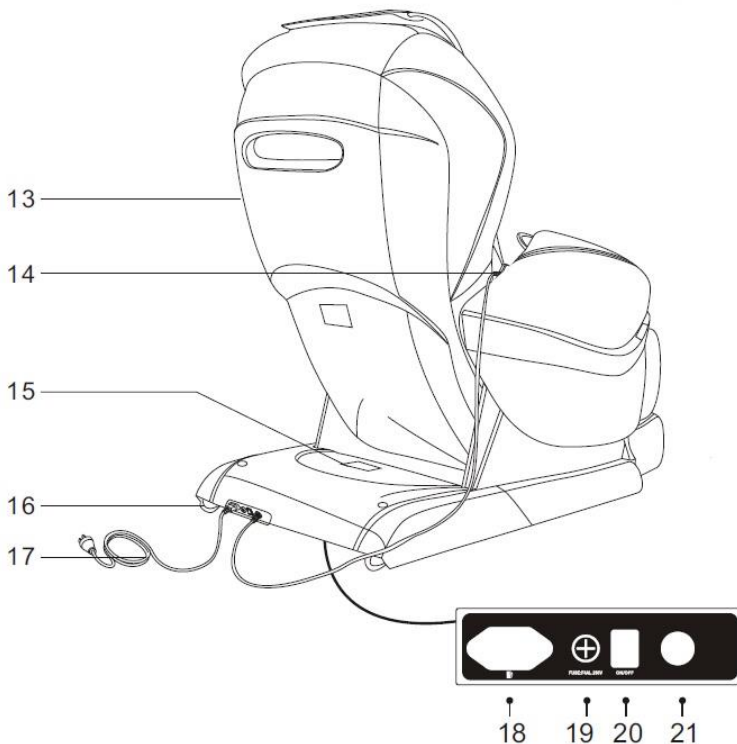

13. Háttámla fedél
14. Vezérlő
15. Hátsó váz burkolat
16. Kerék
17. Tápvezeték és dugó
18. Tápvezeték bemenet
19. Biztosíték
20. Főkapcsoló
21. Vezérlő vezeték bemenet

Funkciók

- A fotel intelligens, vertikálisan mozgó masszázskézekkel lett megtervezve, amelyek négy keréken mozognak.
- Masszázmódok: gyúrás, ütögetés, kopogtatás, shiatsu, szimultán gyúrás és ütögetés.
- Ötféle automatikus masszázsfunkció: komfort, relax, lazító, nyak és váll, hát és derék.
- Három eltávolítható memóriaprogram (M1, M2, M3)
- Felső test manuális masszázs ötféle opcióval: részleges, pontra ható, teljes, nyak és váll, hát és derék. Mindegyik opciónál három sebességfokozat kapcsolható. Pontra ható masszázsnál a görgők manuálisan mozgathatók felfelé és lefelé. Ütögetés, kopogtatás, és shiatsu módoknál a görgők háromféle szélességben állíthatóak: széles, közepes és szűk.
- Légnyomásos masszázs: három mód. teljes testmasszázs, karmasszázs (8 légszák), lábmasszázs (20 légszák), három erősségi fokozat állítható.
- Szénszálas hátmelegítő funkció
- Oldalsó kék LED lámpa
- A lábtartó kinyújtható, hogy passzoljon a testmagassághoz
- Továbbfejlesztett „előrecsúszás” funkció. A teljes foteltest egy sínen mozog dőlés közben, így helyet nyerünk a háttámla mögött.
 - Ugyanezen funkció eredménye a Zero Gravity állapot.

A készülék használata








A készülék használata

1. Csatlakoztassuk a fotelt egy megfelelően földelt konnektorba, majd a főkapcsolóval helyezzük áram alá.

2. A masszázs indítása

- A vezérlőn a piros kapcsológomb megnyomásával bekapcsol a masszázsfotel.
- A készülék először felméri a benne ülő személy testét, megállapítja a vállpozíciót, a szükséges, fontosabb masszázsponthoz.
- A felmérés után a görgők egy pár másodpercig a vállnál fognak állni, és előre-hátra mozogni. Utána csipogó hangot fogunk hallani. Eközben – ha nem érezzük megfelelőnek a görgők állását a vállunknál – manuálisan állíthatunk rajtuk, 10 magasságban. Ha 10 másodperc után nem állítunk a vállpozíción, a masszázs automatikusan elindul.

Gomb	Leírás	Kijelző
	Görgők felfelé mozgatása	
	Görgők lefelé mozgatása	

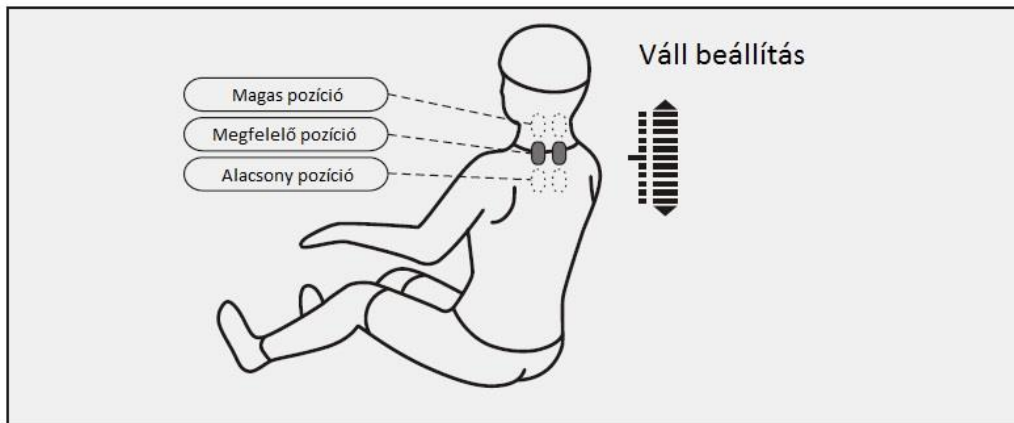


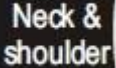
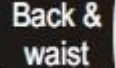


- Válasszuk ki a kívánt masszázsfunkciót
- Memória programok
 - Ha manuális masszázsprogramot állítottunk be, a program végén elmenthetjük azt, majd a fotel következő indításakor egyetlen gombnyomással előhívhatjuk.




A készülék használata

- Automata masszáz


Gomb	Leírás	Kijelző
	Mély masszázs az akupresszúrás pontokon, fájdalomcsillapítás	Auto F1
	Nyugalmi állapotba helyezi az izmokat, csontokat	Auto F2
	Vérkeringést serkenti	Auto F3
	Nyak és vállmasszázs	Auto F4
	Hát és derékmasszázs	Auto F5

- Felsőtest manuális masszáz







Funkció	Gomb	Állítható paraméterek	Kijelző
Masszázs	SHIATSU	sebesség, szélesség	
	KNEAD GYÚRÁS	sebesség	
	TAP ÜTÖGETÉS	sebesség, szélesség	
	KNEAD&TAP GYÚRÁS& ÜTÖGETÉS	sebesség	
	KNOCK KOPOGTATÁS	sebesség, szélesség	
Sebesség	SPEED	3 fokozat	 Speed
Szélesség	WIDTH	3 fokozat	 Width

A készülék használata


- Hátmasszázs

Gomb	Leírás	Kijelző
	Pontra ható masszáz	 H0
	Részleges masszáz egy adott területen	 H1
	Teljes felsőtest masszáz	 H2
	Nyak és vállmasszázs	 H3
	Hát és derékmasszázs	 H4
	Masszázsörgők pozíciójának állítása (részleges, és pontra ható masszázsmódban használható)	Mozgatás felfelé
		Mozgatás lefelé

- Légnyomásos masszáz




Funkció	Gomb	Leírás	Kijelző
Teljes testmasszázs	FULL AIR	Masszázs a karokon, vádlikon, lábfejen	Arm  Feet 
Karok	ARM	Masszázs a karokon	Arm 
Lábak	LEG	Masszázs a vádlikon, lábfejen	Feet 
Erősség	AIR PRESSURE INTENSITY	3 fokozatban állítható	Arm  Feet 

- Egyéb manuális funkciók

Funkció	Gomb	Leírás	Kijelző
Hátfűtés	BACK/HEAT	Infravörös fűtőfunkció, felmelegedés 3 perc alatt	

A készülék használata

- Egyéb manuális funkciók

Funkció	Gomb	Leírás
Felülés		A gomb folyamatos nyomására a háttámla emelkedik, a lábtartó ereszkedik. Elengedésre megáll. Amint eléri az ülőszintet, a fotel csipogó hangot ad.
Elfekvés		A gomb folyamatos nyomására a háttámla ereszkedik, a lábtartó emelkedik. Elengedésre megáll. Amint eléri a fekvőszintet, a fotel csipogó hangot ad.
Automata elfekvés		Gombnyomásra elindul a funkció, 3 különbözőből választhatunk

3. A masszázst leállítása, kikapcsolás

- Masszázs közben a piros gomb megnyomásával bármikor leállíthatjuk a készüléket. Ezután lehetőségünk van elmenteni a memóriába az aktuális, nekünk szimpatikus programot. A fotel visszaáll alappozícióba. Ha a masszázst a beállított időtartam elteltével fejeződik be, a görgők megállnak, a fotel marad az aktuálisan beállított pozíciójában. A piros gomb megnyomására fog visszaállni alappozícióba.
- Memória
 - A masszázstprogram befejeztével a kijelzőn a „memory” felirat fog villogni. Ekkor az M1, M2, vagy M3 gombok megnyomásával tárolhatjuk el az aktuálisan lefutott programot.
- A főkapcsoló segítségével áramtalanítsuk a fotelt, majd húzzuk ki a dugót a konnektorból.

4. Párnák használata

- A háttámlán lévő párnák igénynek megfelelően lágyabbá teszik a görgők általi masszázst.
 - A háttámla párnarésze a háttámla tetején elhelyezett cipzárral kapcsolódik a fotelhez, a rajta lévő fejpárna pedig tépőzárral kapcsolódik a háttámla párnájához.


5. Padlóvédelem

- Ha a fotelt fapadlón helyezzük el, idővel károsítani fogja azt. Javasolt szőnyeg használata.



6. A fotel mozgatása

- Győződjünk meg róla, hogy semmilyen elektromos vezeték, vagy egyéb akadály nincs az útban. A háttámlánál fogva a fotelt hátradöntve, majd a súlypontot a hátsó kerekre helyezve a fotelt a kívánt helyre guríthatjuk.

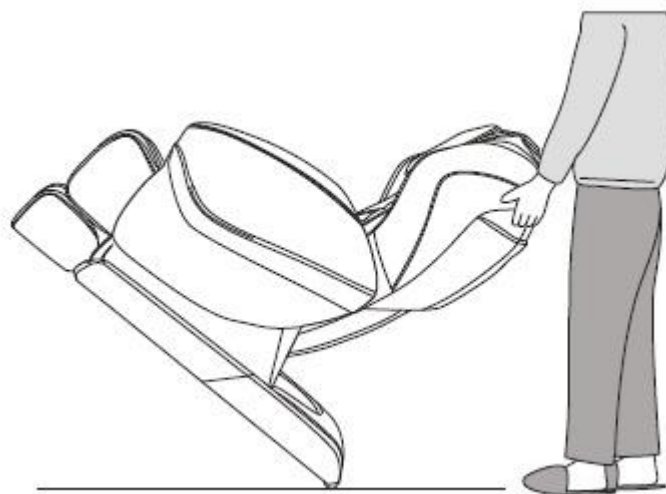

Műszaki adatok

Modell: SL-A90

Név: L.A. masszázsfotel

Merőleges feszültség: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz

Teljesítmény: 150W

Alap időtartam: 20 perc

Biztonsági struktúra: I. osztály

Felhasznált anyagok: PVC, PA, acél és elektronikus alkatrészek

ANYAG	PU	BŐR	TEXTIL	FA