


**BIONWELL PHOENIX  
MASSZÁZSFOTEL  
iRest SL-A389-1**

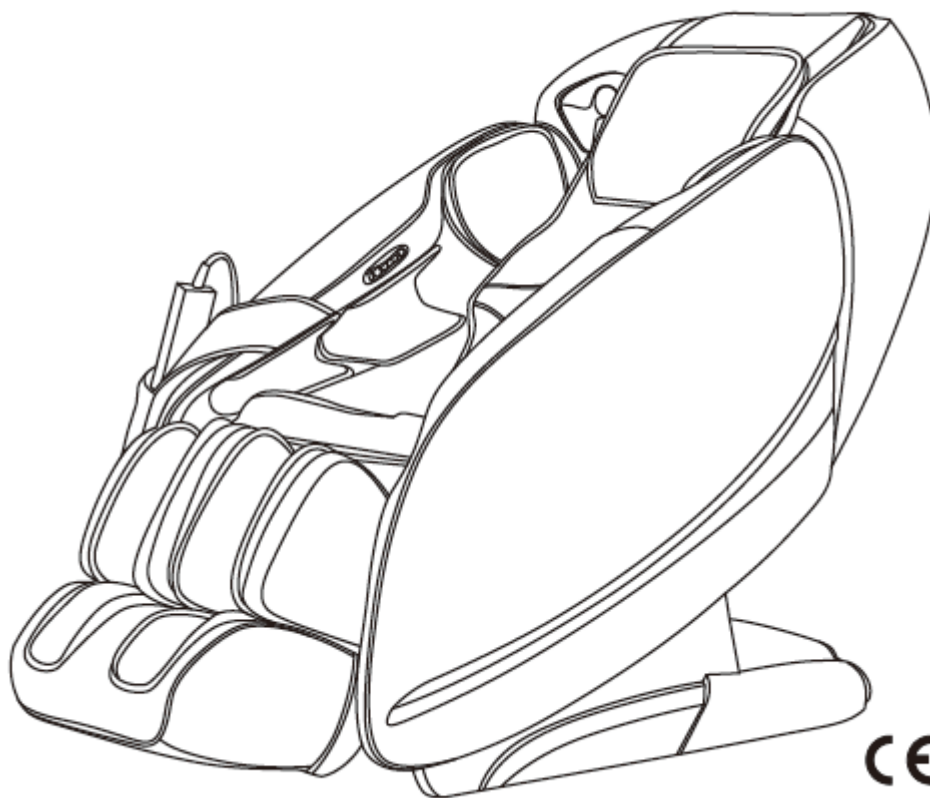

[www.bionwell.hu](http://www.bionwell.hu)

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Fokozott figyelemmel kövesse végig a biztonsági utasításokat, és kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbiekre is. Megjegyzés: cégünk fenntartja a jogot a fotel konstrukciójának és leírásának megváltoztatására minden további figyelmeztetés nélkül. Kérjük, hivatkozzon a fotel aktuális színére.

## Tartalom

---

Biztonság és karbantartás	3
Alkatrészek neve és helye	5
Funkciók, jellemzők	6
A készülék használata	7
Műszaki adatok	13

### 1. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



- Gyerekeknek tilos a mozgó alkatrészekhez nyúlni.
- Ügyeljen arra, hogy az áramforrás jól legyen földelve.
- Használat után, ill. tisztítás előtt húzza ki a konnektorból a készüléket, baleset, ill. a fotelban keletkező kár elkerülése érdekében.
- Kérjük, az útmutató alapján használja a masszázsfotelt.
- Ne használjon nem ajánlott kiegészítőket.
- Ne használja a fotelt a szabadban.
- Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.
- Tilos minden, az útmutatóban nem feltüntetett módon használni a masszázsfotelt.
- A készüléket egyhuzamban használni 20 percig ajánlott.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a bőrfelület sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha más fedőréteg sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a fűtőtest nyílása le van fedve vagy el van záródva.
- Ne ejtsen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- Ne aludjon el a masszázsfotel használatában közben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt ittas állapotban, vagy rossz közérzet esetén.
- Kérjük, várjon legalább 1 órát evés után, és csak azt követően használja a masszázsfotelt.
- Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne állítsa tartósan túl erőse a masszázst.

### 2. Környezet

- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt magas hőmérsékletű, ill. nyirkos helyiségben, pl. fürdőszobában.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt olyan helyen, ahol hirtelen hőmérsékletingadozás lehetséges.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túlzottan poros környezetben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túl kicsi helyiségben, vagy olyan helyen, ahol nincs megfelelő szellőzés.

### 3. Akik nem használhatják a masszázsfotelt

- Csontritkulásban szenvedők.
- Szívbetegségben szenvedők, vagy olyanok, akik elektronikus egészségügyi eszköz (pl. pacemaker) használatára szorulnak.
- Lázas betegek.
- Áldott állapotban lévő, vagy menzesz periódusban lévő nők.
- Balesetet szenvedett, vagy bőrbetegségben szenvedő személyek.
- 14 év alatti gyerekek, ill. szellemileg labilis állapotban lévő személyek.
- Orvosuk által pihenésre intett, vagy magukat rosszul érző személyek.
- Nedves testű személyeknek szigorúan TILOS.
- A készülék fűtött felülettel rendelkezik. Amennyiben hőre érzékeny, legyen óvatos a készülék használatakor.

### 4. Biztonság

- Ellenőrizze a feszültséget, ami megfelel a termék specifikációjának!
- Ne húzza ki nedves kézzel a készüléket a konnektorból.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, az áramütés, ill. a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.
- Ne sértse fel a vezetékeket, és ne változtasson az áramkörön.
- Ne használjon nedves törülőkendőt az elektromos részek, pl. főkapcsoló, vagy tápvezeték megtisztítására.
- Esetleges áramszünet ideje alatt maradjon távol a készüléktől, hogy ha az áram hirtelen visszajönne, elkerülje a balesetet.
- Rendellenes működés esetén azonnal állítsa le a készüléket, és konzultáljon a kereskedővel/közvetítővel.
- Rosszullét esetén állítsa le a készüléket, és keresse fel orvosát.
- Nem ajánlott a készülék használata olyan személyeknek (beleértve a gyerekeket), akik fizikailag, szellemileg, vagy érzékelés szempontjából korlátozottak, kivéve, ha az ő egészségükért felelős személy jóváhagyta nekik a fotel használatát.
- Ha gyerekek használják a fotelt, erősen ajánlott a szülői, ill. felnőtt felügyelet.
- Ha a tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.



### 5. Karbantartás

- A készüléken csak szakember végezhet karbantartást, a felhasználónak tilos a fotel szétszerelése és önálló karbantartása.
- Kérjük, mindig áramtalanítsa a fotelt használat után.
- Ne használja a készüléket, ha meglazult a konnektor.
- Ha a készülék hosszú ideig használaton kívül van, tekerje fel a vezetéket, a fotelt pedig száraz és pormentes helyiségben tárolja.
- Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig magas hőmérsékletű helyiségben, tűz mellett, és ne tegye ki tartósan közvetlen napsugárzásnak.
- Ha a lecsavarható vezeték / tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.
- A készüléket mindig száraz ruhával tisztítsa meg. Ne használjon hígítót, benzint, vagy alkoholt.
- A készülék mechanikus alkatrészei speciálisan lettek megtervezve és legyártva, nem igényel különleges karbantartást.
- Ne használjon éles tárgyat a fotel mozgatására.
- Ne húzza, vagy gurítsa a fotelt egyenetlen talajon. Ilyenkor mindenképpen emeléssel mozgassa.
- Szakaszosan használja a készüléket; túl sokat egy huzamban ne működtesse.

### 6. Általános üzemzavarok orvoslása

- Használat közben a motor hangja teljesen természetes.
- Ha az irányító nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a tápvezeték megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz, valamint győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- Ha egy masszázsprogram beállított működési ideje lejár, a készülék automatikusan megáll. Ha a fotel túl sokáig van egyhuzamban működésben, a hőmérséklet-érzékelő berendezés automatikusan leállítja azt. Ilyenkor kérjük, várjon fél órát, és csak utána használja újra a készüléket.

## Alkatrészek neve és helye

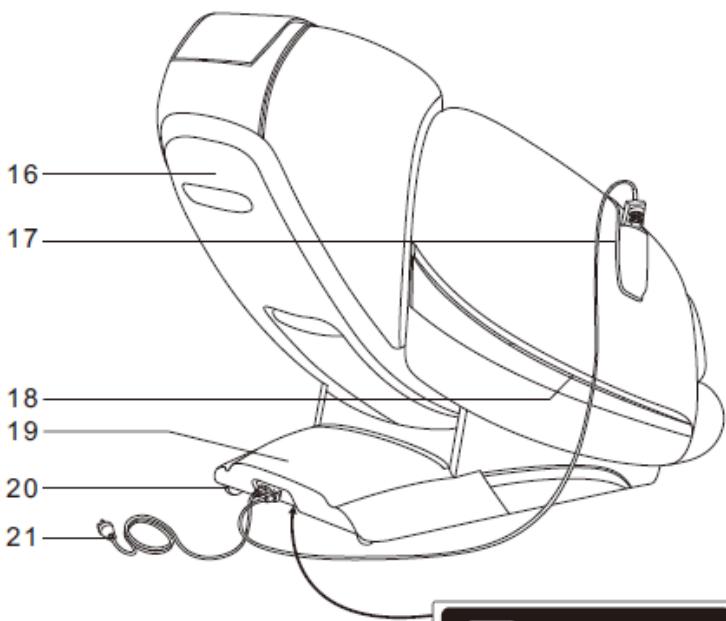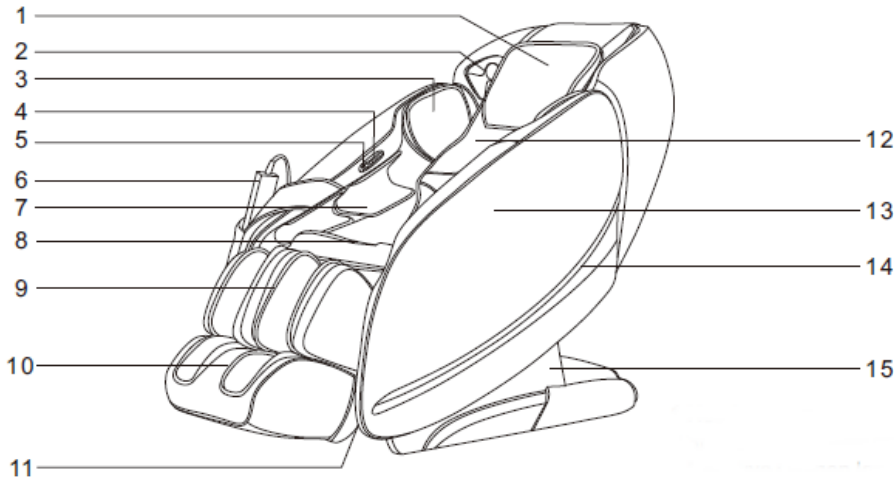

22 23 24 25

1. Fejpárna
2. 3D sztereó hangszóró és Negatív Oxigénion generátor
3. Felkarlégzsákok
4. Gyorsgombok a karfán
5. USB töltő
6. Vezérlő
7. Karlégzsákok
8. Ülőpárna
9. Lábtartó keret
10. Lábfejtartó keret
11. Vádlitartó
12. Hátpárna
13. Karfa
14. Karfa-dekoráció
15. Oldalborítás
16. Hátlap-borítás
17. Vezérlőtartó
18. LED fények
19. PCB doboz borítása
20. Kerekek a mozgathoz
21. Tápkábel
22. Tápkábel foglalata
23. Biztonsítószekrény/védőszele
24. Bekapcsoló gomb
25. Vezérlő-csatlakozóaljzat

## Funkciók, jellemzők

---

### Funkciók, jellemzők

- Függetlenül mozgó, négy kerék meghajtású tompa intelligens masszázsképek
- Ötféle emulációs masszázsmódszerrel: Shiatsu, gyúrás/dagasztás (kneading), kopogtatás/érintés (tapping), kopogás (knocking), egyidejű dagasztás és kopogtatás.
- Automatikus vállelhelyezkedés- és hely felismerés
- 6 db intelligens automata masszázs funkció: fájdalomcsillapító, pihentető, könnyed, felsőtest, alsótest és általános
- 2 memória-masszázs funkció (M1,M2), mellyel rögzítheti 2 kedvenc masszázst
- 5 féle manuális masszázslehetőség a felsőtest masszírozására: fix ponton történő, részenkénti, teljes testes, felsőtest- és alsótestmasszázs az ötféle emulációs masszázsmódszerrel, három állítható sebességgel. A fix ponton történő és a részenkénti masszázs a masszázsképek fel-le mozgásával beállítható a tökéletes, Önnek legmegfelelőbb masszázspont. A kopogtatás (tapping), a gyúró (kneading) és a kopogó (knocking) masszázsok során masszázsképek szélessége beállítható széles, közepes, illetve keskeny masszírozó funkciójára.
- 3 db légnyomás funkció 3 különböző erősséggel: teljes testes, kezét érintő (12 db légzsák) és lábat (16 db légzsák) érintő.
- A lábész görgős masszázsfunkcióval lett kialakítva a talprészénél.
- Alkalmazkodik a különböző vállszélességekhez. Állítható masszázs-szélesség a hátnál.
- Hátmelegítési funkció: szénszálas infravörös sugárzással
- A lábtartó és a háttámla fokozatmentesen is használható, hogy megfeleljen a különböző testmagasságoknak.
- A háttámla lefelé mozog masszázs közben, így a masszázsfotel a lehető legközelebb helyezhető a falhoz, nem történik helyvesztés az alapállapothoz képest.
- 3D sztereó hangszóró a karfa felső részén. Bluetooth segítségével zenelejátszás lehetséges okoseszköztől.
- Negatív ion generátor a karfa felső részén.
- LED fény a karfa mindkét oldalán.
- Könnyen kezelhető gyorsbillentyűk a jobb karfán.
- A fejpárna segítségével vagy a párna nélkül különböző masszázserősséget érhetünk el.
- USB töltési lehetőség a jobb karfán.

- Láb emelése, háttámla emelése és automatikus fekvőmód beállítási funkciók
- L alakú hátrész-masszírozó illeszkedik a test vonalaihoz
- Fekvő helyzetbe is állíthatóság (zero gravity)

## A készülék használata

### 1. A készülék bekapcsolása



Tápkábel csatlakoztatása




Áram alá helyezés  
Tápegység-kapcsoló  
helyezete

### 1. Masszázs indítása

a, A bekapcsológomb megnyomásával a masszázs automatikusan elindul, a fotel hátradől.


b, Automatikusan vállpozíció- és akupresszúrás pont felismerés, várakozás a teszt befejezésére.

c, Ezután a „fel” és „le” (adjust shoulder) gombokkal változtathatunk a vállpozíción (10 fokozatban), ha esetleg kényelmetlen lenne. Ha nem változtatunk, a masszázs automatikusan elindul 10 másodpercen belül.

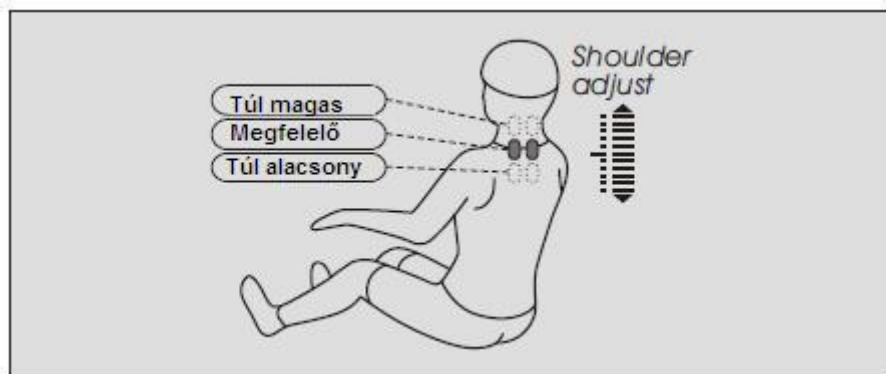





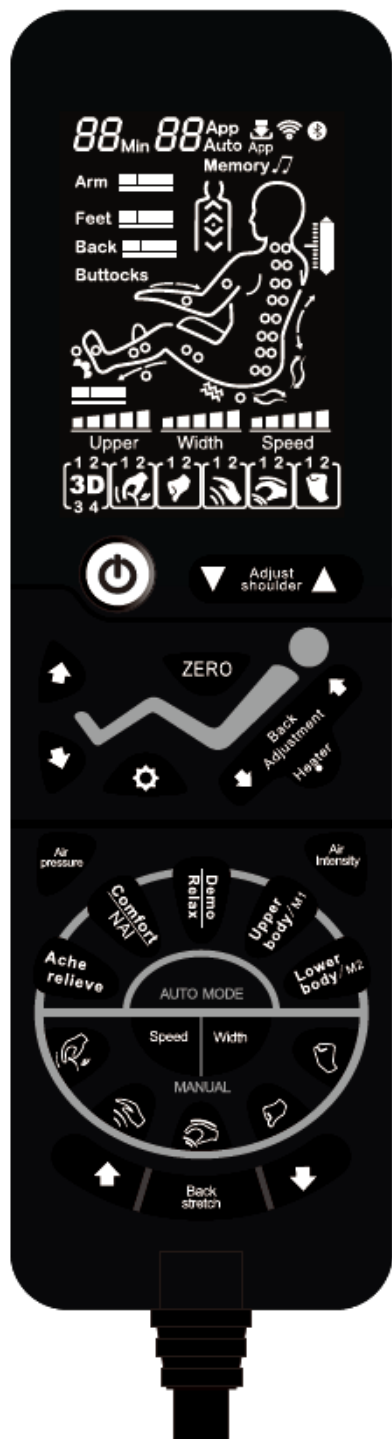

d, Válassza ki a masszázsfunkciót

Memóriamasszázs: Nyomja meg az „Upper body / M1” vagy a „Lower body / M2” gombot 3 másodpercig, majd lépjen be az M1 vagy M2 memória masszázsfunkcióba, amely elindítja az előző, beprogramozott masszázst.








## A készülék használata

### Automata masszázok



Gomb	Leírás	Kijelző
	Mélyre ható masszázs az akupresszúrás pontokon, mely hatékonyan enyhíti a fájdalmat.	Auto F1
	Ellazítja a testet.	Auto F2
	Elősegíti a vérkeringést.	Auto F3
	Az összes masszázs gyors megtapasztalása (nyomja meg a 2 másodpercig, majd ha szeretne váltson a sebességet)	Auto F0
	Felsőtestes masszázs	Auto F4
	Alsótestes masszázs	Auto F5

### Felsőtest kézi vezérlésű masszázsa




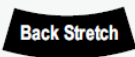
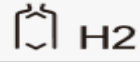


Gomb	Leírás	Kijelző
 Shiatsu	Shiatsu (sebesség és szélesség kiválasztása)	
 Knead&flap	Gyúrás & csapkodás (sebesség kiválasztása)	
 Flap	Csapkodás (sebesség és szélesség kiválasztása)	
 Knead	Gyúrás/dagasztás (sebesség kiválasztása)	
 Knock	Kopogás (sebesség és szélesség kiválasztása)	
 Speed	Három sebességi fokozat állítható	









## A készülék használata

	Három szélességi fokozat állítható	
---	------------------------------------	---





### Hátnyújtás

Gomb	Leírás		Kijelző
	Fix pozíciós (fix ponton történő) masszáz		
	Kis területen történő masszázs előre-hátra irányban		
	Teljes masszázs előre-hátra irányban		
	Felsőtestes masszázs előre-hátra irányban		
	Alsótestes masszázs előre-hátra irányban		
 	Masszázspon beállítása (fix pozíciós, kis területen történő, beállíthatja a masszázspozíciót)		Masszázkéz felfelé mozgatása <hr/> Masszázkéz lefelé mozgatása





### Légnyomásos masszázs

Gomb	Leírás	Kijelző
	Három légnyomás üzemmód (teljes test, kar és láb) az alsótesthez	Arm  Feet 
	Légerősség: Három erősségi fokozat állítható	Arm  Feet 




### Egyéb kézi vezérlésű funkciók

Gomb	Leírás	Kijelző
	Talpgörgő: talpgörgős kapcsoló, 3 sebességgel elérhető	
	Távoli infravörös hátfűtés, kellemes meleg érzést ad 3 perc elteltével	



## A készülék használata

Gomb	Leírás	Kijelző
	Negatív oxigénion-működés: Tartsa lenyomva 3 másodpercig a be- / kikapcsoláshoz	
 	Vádli(tartó) feljebb emelése - A vádli(tartó) lassan emelkedik, elengedésre megáll  Vádli(tartó) lejjebb engedése - A vádli(tartó) lassan ereszkedik, elengedésre megáll	
 	Háttámla feljebb emelése, elengedésre megáll  Háttámla lejjebb engedése	
	Automata fekvő mód három funkcióval	

### Gyorsbillentyűk a karfán

Gomb	Leírás
	Nyomja meg ezt a gombot a fotel ki- / bekapcsolásához
	Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a háttámla lassú emeléséhez és a lábtartó leengedéséhez. Engedje el a gombot a folyamat leállításához.
	Nyomja meg ezt a gombot, és ezzel bekapcsolja az automatikus hátra dőlés (zero gravity) üzemmódot, összesen 3 üzemmód választható.

## A készülék használata

Gomb	Leírás
	Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a háttámla lassú hátra döntéséhez és a lábtartó emeléséhez. Engedje el a gombot a folyamat leállításához.
<b>AUTO</b>	Nyomja meg a gombot az automata masszázsfunkciókért. (USB)
	USB csatlakozási lehetőség. Csatlakoztathatja, feltöltheti okostelefonját.

### 2. Masszázs leállítása, kikapcsolás

- Masszázs közben a piros gomb megnyomásával a masszázs bármikor leállítható, a lábtartó, a háttámla, a görgők visszaállnak eredeti pozíciójukba – közben beállíthatja a memóriamasszázszt - és a fotel kikapcsol. Ha a beállított idő lejár, a masszázsfunkciók leállnak – közben beállíthatja a memóriamasszázszt - , viszont a lábtartó és a háttámla nem állnak vissza eredeti pozícióba.
- Memóriamasszázs funkció: Leállítás vagy az idő lejáta esetén a kijelzőn a „Memory” ábra fog megjelenni és villogni, ekkor el lehet raktározni az aktuális masszázsprogramot az M1 vagy M2 gombokkal.
- Áramtalanítás, kikapcsolás





A tápegység kapcsolóhelyzetének ábrája

A tápvezeték eltávolítása a konnektorból


### 3. Fejpárna és háttámla párna használata

A fejpárna használata csökkentheti a gyúró/dagasztó masszázs (kneading) erősségét a nyaknál és a vállaknál. Ha erősebb masszázst szeretne ezeken a területeken, leveheti a

fejpárnát (a fejpárna azonban használata javasolt). A háttámla és a háttámlán lévő párna cipzárral (1), a fejpárna és a háttámla párnája tapasszal (2) csatlakoznak egymáshoz.

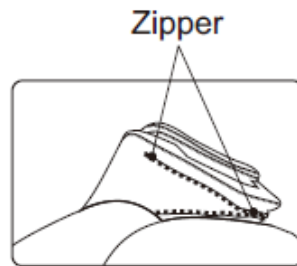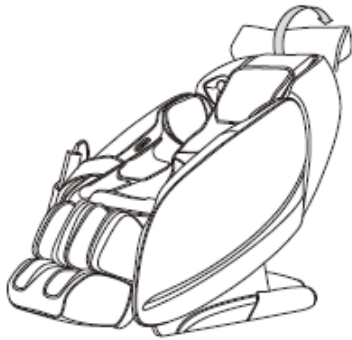

(1)

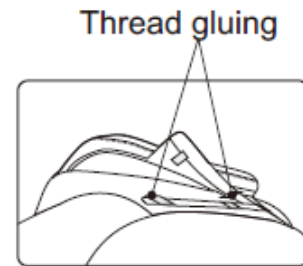

(2)

#### 4. A padló védelme

Ha a fotelt hosszú ideig tartjuk a fapadlón, kárt okozhat. Tanácsos egy szőnyegre tenni a készüléket.

Figyelmeztetés: ne mozgassuk a fotelt fapadlón, görgyös talajon, vagy szűk térben. A fotel mozgathatásához két ember szükséges. Az emelés közben hajtsa fel a vádlitartót, ne emelje a karfát közvetlenül, használja a háttámla burkolatának vágatait.

#### 5. Mozcgatás

Győződjön meg róla, hogy nincs semmilyen vezeték az útbán. Döntse hátra a fotelt egy bizonyos fokig, amíg a súly rá nem nehezedik a kerekerekekre, így már könnyebben mozgatható a fotel előre és hátra egyaránt. Ha megtalálta a fotel helyét, lassan, kíméletes módon engedje le a földre, és helyezze normál állapotba.

Megjegyzés: Mozcgatás előtt először kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, majd húzza ki a tápkábelt és a kézivezérlőt.



## Műszaki adatok

---

Modell: SL-A389-1 PHOENIX

Név: Masszázsfofel

Merőleges feszültség: 110-120V~60Hz   
220-240V~50Hz/60Hz

Névleges bemeneti teljesítmény: 150W

Időtartam: 20 perc

Biztonság: I. osztály

Felhasznált anyagok: PVC, PA, acél- és elektronikus alkatrészek

ANYAG	PU	BŐR	TEXTIL	FA